


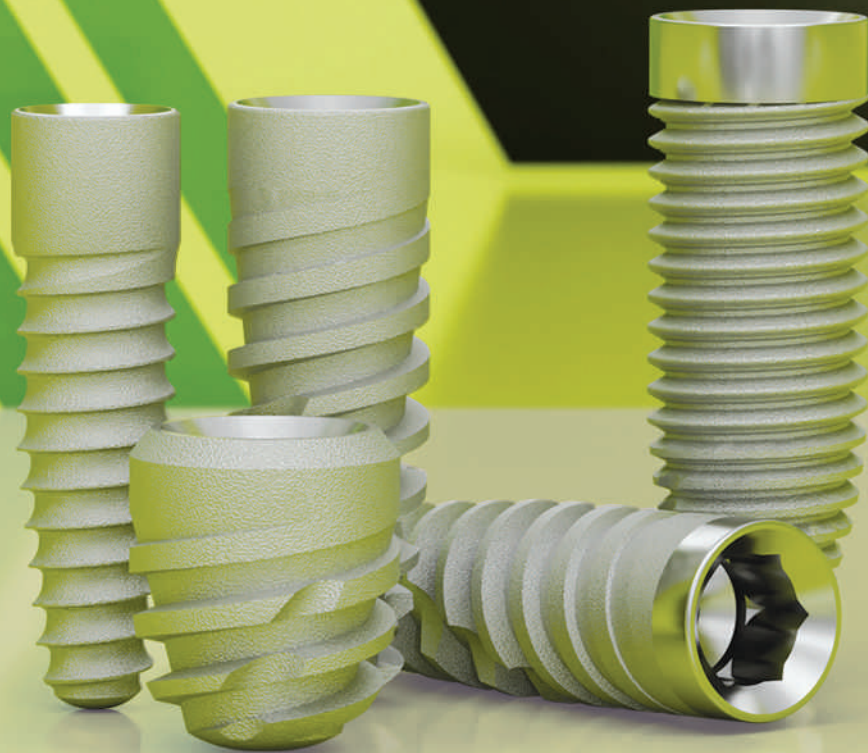


HELI
IMPLANTSERIES

CATALOGO **GENERALE**

IMPIANTI ESAGONO INTERNO

HELL

IMPLANT SERIES

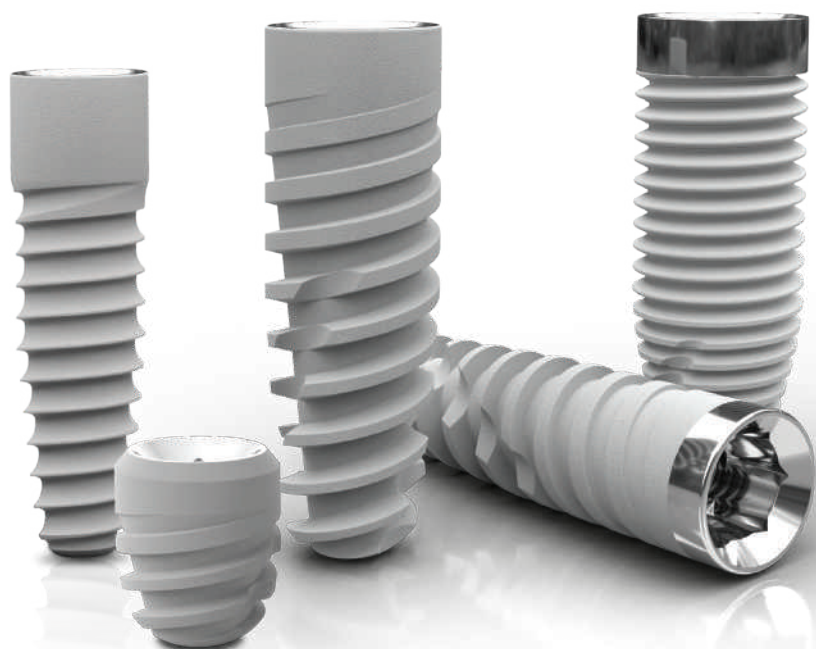



IDC® - Implant & Dental Company nasce dall'esperienza nel settore dentale e nella meccanica di precisione ed è una sintesi di esperienze di dentisti, esperti del settore nel campo dell'implantologia e del settore dentale.

IDC® studia, progetta e commercializza impianti dentali radicati nella tradizione ma con componenti e design innovativi che consentono di soddisfare le ultime esigenze sia del professionista che del paziente.

Il design unico dei sistemi implantari IDC® - HELI® - HELIKON® - FINE® - LUCID® - DITRE® - PTERID® - ZIGOPLUS® sono il risultato di ricerca e soluzioni innovative in collaborazione con istituti di ricerca e con opinion leader di livello nazionale e internazionale, per mantenere questo costantemente nella tecnologia all'avanguardia.

La ricerca della qualità, sia nella produzione che nell'organizzazione e nei servizi forniti, è una scelta strategica dell'azienda, nonché fattore chiave del suo successo. Vengono effettuati controlli giornalieri sul 100% diretto e rigoroso dei semilavorati al termine di ogni fase del processo produttivo, utilizzando apparecchiature sofisticate, ottiche di precisione.

Per garantire questo elevato livello di qualità, ogni prodotto è stato sottoposto a estesi processi di test e verifica sia interni che esterni.

L'azienda mantiene i più elevati standard di qualità in tutti gli aspetti delle nostre operazioni, dalla ricerca e sviluppo, all'approvvigionamento delle materie prime, alla produzione, allo stoccaggio e alla consegna del prodotto, ai consulenti di vendita e al servizio clienti.

Con il programma IDC Academy® intende inoltre essere vicino al medico e al paziente in ogni fase del trattamento fornendo consigli costanti dei nostri opinion leader su casi specifici.



INDICE

Trattamento Superficiale	6
HELI - Design e Caratteristiche	7
HELI CORTHO - Design e Caratteristiche	8
HELI / HELI CORTHO - Codici e Misure	9
HELI LUCID - Codici e Misure	10
HELI FINE - Design e Caratteristiche	11
HELI FINE - Codici e Misure	12
Packaging	13
Procedura Chirurgica Mountless	14
Montatori Impianti	16
Driver Protesici	17
Strumentario Chirurgico - Frese e Accessori	18
Strumentario Chirurgico - Stop Frese	19
Strumentario Chirurgico - Corticali e Maschiatori	21
Strumentario Chirurgico - Bone Mill	22
Strumentario Chirurgico - Frese Rimozione	23
Strumentario Chirurgico - Cricchetti e Accessori	24
Kit Chirurgici	25
HELI - Protocollo Chirurgico	28
Componenti Protesici	32
Componenti Protesici M.S.A.	61
Componenti Protesici Soluzioni Overdenture	69
HELI DITRE - Design e Caratteristiche	76
HELI DITRE - Codici e Misure	77
HELI DITRE - Protocollo Chirurgico	78
HELI DITRE - Componentistica Protesica	79
HELI DITRE - Componentistica Protesica M.S.A.	80
Chirurgia Guidata	82

LA SISTEMATICA IMPLANTARE IDC®

Le linee protesiche IDC® complete e diversificate, forniscono a dentisti e tecnici soluzioni complete per tutte le opzioni di restauro: protesi cementate, impianti e overdenture avvitate su cauzione. Il sistema protesico universale comprende monconi dritti, angolati e calcinabili, nonché attacchi sferici di diverse altezze e angolazioni, che consentono molteplici alternative di riabilitazione anche in spazi ristretti.



HELI
IMPLANT SERIES

IMPIANTO ESAGONO INTERNO

HELI® è un impianto conico con esagono interno. Le sue proprietà autoperforanti insieme ad un innovativo corpo a spirale consentono di cambiare direzione durante l'inserimento e di ottenere un'elevata stabilità primaria, anche in situazioni cliniche molto complesse. Offre un'ampia gamma di fixture per soddisfare le diverse esigenze di riabilitazione implantoprotesica.

HELICORTHO
SHORT IMPLANT SYSTEM



IMPIANTO ESAGONO INTERNO SHORT

CORTHO® disponibili nelle lunghezze da 6.0 mm e 8.0 mm con diametro rispettivamente di 4.2 - 5.0 - 6.0mm; gli impianti IDC Heli Cortho® rappresentano una soluzione per i casi con atrofie e altezza dell'osso limitata. Questo per minimizzare la necessità di innesto osseo.

Il design e il profilo filettato aggressivo sommati al corpo conico garantiscono stabilità primaria, anche in situazioni compromesse.

PTERID
PTERIGOID IMPLANT SYSTEM



IMPIANTO ESAGONO INTERNO CONNESSIONE CONICA PTERIGOIDEO

PTERID® sono degli speciali impianti dentali, più lunghi dei tradizionali (fino a 22mm) che vengono inseriti nel processo pterigoideo dell'osso sfenoide. Questa tipologia di impianti offrono un'elevata stabilità primaria e un carico immediato più sicuro. Possono essere utilizzati anche in combinazione con gli impianti dentali tradizionali e/o gli impianti zigomatici o gli impianti transinusali.

ZIGOPlus



IMPIANTO ZIGOMATICO

ZIGOPLUS® rappresenta la nuova frontiera degli impianti zigomatici. Grazie al suo design innovativo, non solo rende l'intervento più sicuro, ma estende anche le possibilità terapeutiche in caso di atrofia dell'osso mascellare. ZigoPlus® è l'impianto di riferimento nel campo della riabilitazione a carico immediato con impianti zigomatici.



DiTRE
IMPLANT PLATFORM Ø3.0

IMPIANTO ESAGONO INTERNO DIAMETRO Ø3.0

DITRE® è un impianto conico con esagono interno e connessione conica. Il piccolo diametro (Ø3.0) Gli impianti con diametro stretto (inferiore a 3.5 mm), la cui performance clinica è stata validata da numerosi studi con follow-up. Consentono di trattare in modo sicuro e prevedibile situazioni in cui gli impianti con diametro tradizionale aumenterebbero il rischio clinico, ad esempio indicazioni con tessuto duro minimo e spazio limitato.

HELIKON
CONICAL CONNECTION



IMPIANTO ESAGONO INTERNO CONNESSIONE CONICA

HELIKON® è un impianto conico con esagono interno e connessione conica. La connessione conica permette una perfetta tenuta tra impianto e moncone evitando micromovimenti e complicazioni. Le sue proprietà autoperforanti insieme ad un innovativo corpo a spirale consentono di cambiare direzione durante l'inserimento e di ottenere un'elevata stabilità primaria, anche in situazioni cliniche molto complesse.

SPEEDHEX
IMPLANT SERIES



IMPIANTO ESAGONO ESTERNO

SPEEDHEX® è un sistema implantare conico esagonale esterno offre un'ampia gamma di fixture per soddisfare le diverse esigenze di riabilitazione implantoprotesica. Questi sistemi sono progettati sia per l'inserimento con tecnica flap (doppia fase chirurgica) che per tecnica flapless (chirurgia monofase).

HBSSURFACETREATMENT

HYDROPHILICBIOLOGICALSURFACE

La lega di titanio è nota per la sua eccellente resistenza alla trazione e per la sua superiore biocompatibilità. IDC® utilizza Titanio Grado 4 per produrre tutti i suoi impianti.

La superficie ottenuta mediante sabbiatura e successiva acidificazione ($Sa\ 1,3\ \mu$), è realizzata con lo scopo di aumentare notevolmente la superficie di contatto e favorire la differenziazione delle cellule osteoblastiche. Il trattamento superficiale HBS (Hydrophilic Biological Surface) ha una rugosità superficiale media Sa di $1,3\ \mu$. Questo valore è in accordo con i dati della ricerca sperimentale che indicano una maggiore risposta osteoblastica da parte di superfici con tali caratteristiche.


I moduli di elaborazione forniscono un'ampia documentazione della sua efficacia e stabilità a lungo termine ed è un processo che rende il dispositivo indicato in condizioni standard e in presenza di qualità o quantità non ottimali di tessuto osseo. La superficie è realizzata da aziende leader nella ricerca e sviluppo di superfici implantari.

I trattamenti superficiali HBS combinano la sabbiatura e la successiva acidificazione.


Questa procedura aumenta efficacemente il valore di "aumento dell'area percentuale" che rappresenta la superficie di contatto tra l'impianto e l'osso.




INGRANDIMENTO -65 X
Immagini al microscopio elettronico di superfici HBS®

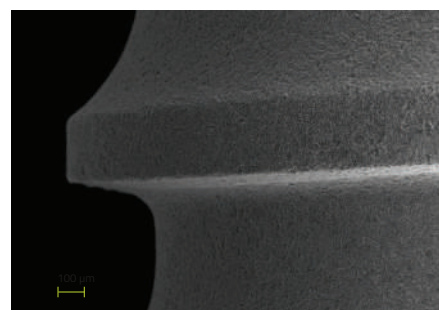


INGRANDIMENTO -200 X
Immagini al microscopio elettronico di superfici HBS®

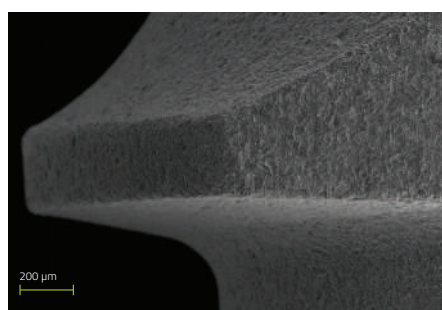


INGRANDIMENTO - 200 X
Immagini al microscopio elettronico di superfici HBS®

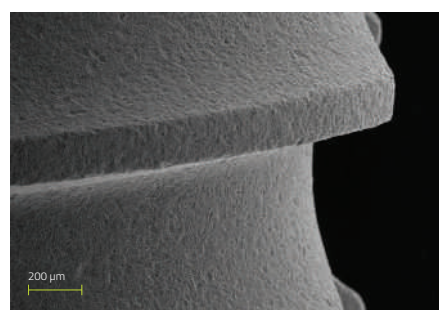

INGRANDIMENTO -200 X
Immagini al microscopio elettronico di superfici HBS®

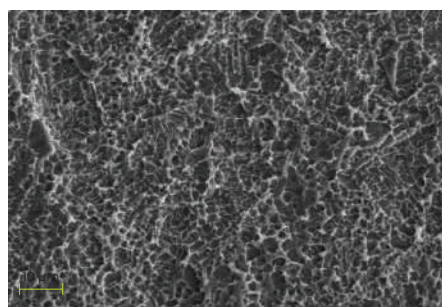

INGRANDIMENTO - 3.00 K X
Immagini al microscopio elettronico di superfici HBS®

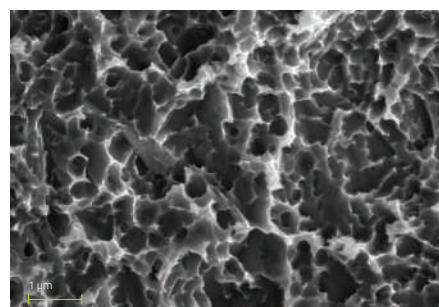

INGRANDIMENTO - 10.00 K X
Immagini al microscopio elettronico di superfici HBS®

IMPIANTI ESAGONO INTERNO

Heli® è un impianto conico con esagono interno. Le sue proprietà autoperforanti insieme ad un innovativo corpo a spirale consentono di cambiare direzione durante l'inserimento e di ottenere un'elevata stabilità primaria, anche in situazioni cliniche molto complesse.

Offre un'ampia gamma di fixture per soddisfare le diverse esigenze di riabilitazione implantoprotesica.

CORONA

CARATTERISTICHE:

- Bone platform switching;
- Superficie porosa fino alla testa dell'impianto;
- Spira continua lungo l'impianto.

VANTAGGI:

- Maggiore superficie di appoggio;
- Ridurre il riassorbimento crestale;
- Ottima distribuzione del carico;
- Riduce lo stress crestale.

L U C I D

PARTICOLARITÀ DELL'IMPIANTO HELI LUCID:

- Bone platform switching;
- Collo lucido: 1,0 mm macchinato per il massimo controllo dei tessuti.

CORPO

CARATTERISTICHE:

- Corpo cilindrico conico con doppia filettatura;
- Nucleo conico - più marcato rispetto alle spire;
- Corpo condensante simil-osteotomo.

VANTAGGI:

- Condensazione ossea;
- Stabilità primaria;
- Facile inserimento.

SPIRE

CARATTERISTICHE:

- Doppia filettatura 2x2.1mm;
- Ampio passo delle spire;
- Aumento spire verso apice;

VANTAGGI:

- Favorisce inserzione;
- Alta stabilità primaria in osso compromesso;
- Condensazione dell'osso;
- Consente una osteotomia ridotta.

DESIGN VARIABILE DELLE SPIRE

SPIRE TESTA
Spessore quadrato

SPIRE CENTRO
Spessore sottile

SPIRE APICE
"V Shape"

CONNESSIONE

CARATTERISTICHE:

- Esagono interno aumentato in precisione;
- Piattaforma unica per tutti i diametri.

VANTAGGI:

- Perfetta connessione impianto-moncone;
- Semplicità in fase di protesizzazione o riabilitazione protesica.

APICE

CARATTERISTICHE:

- Spire taglienti e profonde;
- Lame di fresatura apicali;
- Bordo apicale dritto;
- Design osteocondensante.

VANTAGGI:

- Autofilettante;
- Autoperforante;
- Facile inserzione;
- Previene danni alle strutture anatomiche;
- Facile penetrazione in siti sottodimensionati.

CARATTERISTICHE

Ora disponibili nelle lunghezze da 6.0 mm e 8.0 mm con diametro rispettivamente di 4.2 - 5.0 - 6.0mm; gli impianti IDC Heli Cortho® rappresentano una soluzione per i casi con atrofie e altezza dell'osso limitata. Questo per minimizzare la necessità di innesto osseo.

Il design e il profilo filettato aggressivo sommati al corpo conico garantiscono stabilità primaria, anche in situazioni compromesse.

La superficie HBS e l'azione platform switching favorisce il mantenimento dell'osso crestale e l'attacco del tessuto connettivo per un posizionamento flessibile in creste irregolari.

CONNESSIONE

CARATTERISTICHE:

- Connessione esagonale interna conica;
- Connessione implantare moncone a 60° aumentata di precisione

VANTAGGI:

- Perfetta connessione impianto-moncone;
- Semplicità nel processo di riabilitazione protesica o protesica.

CORONA

CARATTERISTICHE:

- Pressione ridotta lungo la testa dell'impianto;
- Superficie microporosa fino alla testa dell'impianto;
- Eccellente capacità di osteointegrazione (BIC aumentato del 10%).

VANTAGGI:

- Facilita l'aumento del volume osseo intorno alla testa;
- Ridurre il riassorbimento crestale;
- Ottimizzazione della distribuzione del carico;
- Ridurre lo stress crestale.

CORPO

CARATTERISTICHE:

- Corpo affusolato;
- Nucleo conico.

VANTAGGI:

- Condensazione ossea;
- Eccellente stabilità primaria;
- Facile inserimento.

SPIRE

CARATTERISTICHE:

- Spira con passo 0.8 mm (2 principi);
- Filettature inverse con ampi bordi d'attacco piatti per una maggiore stabilità;
- Penetrazione rapida e controllata.

VANTAGGI:

- Favorisce la procedura di inserimento;
- Elevata stabilità primaria nell'osso D4-D5;
- Consente la condensazione ossea;
- Consente una ridotta osteotomia.

APICE

CARATTERISTICHE:

- Efficace conicità di taglio;
- Funzione di centraggio e punta di presa;
- Area apicale estremamente stretta (1.7 mm);
- Design osteocondensante.

VANTAGGI:

- Controlla e facilita l'inserimento;
- Previene i danni alle strutture anatomiche;
- Ottimo su siti sottodimensionati.

CODICI IMPIANTI

HELI ø3.3

H33080	3.3x8.0 mm
H33100	3.3x10 mm
H33115	3.3x11.5 mm
H33130	3.3x13 mm
H33150	3.3x15 mm

HELI ø3.75

H375080	3.75x8.0 mm
H375100	3.75x10 mm
H375115	3.75x11.5 mm
H375130	3.75x13 mm
H375150	3.75x15 mm
H375180	3.75x18 mm
H375200	3.75x20 mm

HELI ø4.2


H42060	4.2x6.0 mm
H42080	4.2x8.0 mm
H42100	4.2x10 mm
H42115	4.2x11.5 mm
H42130	4.2x13 mm
H42150	4.2x15 mm
H42180	4.2x18 mm
H42200	4.2x20 mm

HELI ø5.0

H50060	5.0x6.0 mm
H50080	5.0x8.0 mm
H50100	5.0x10 mm
H50115	5.0x11.5 mm
H50130	5.0x13 mm
H50150	5.0x15 mm

HELI ø6.0

H60060	6.0x6.0 mm
H60080	6.0x8.0 mm
H60100	6.0x10 mm
H60115	6.0x11.5 mm
H60130	6.0x13 mm

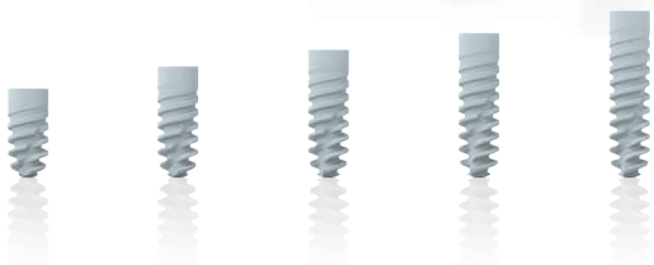


CODICI IMPIANTI

HELILUCID ø3.75

H375080L	3.75x8.0 mm
H375100L	3.75x10 mm
H375115L	3.75x11.5 mm
H375130L	3.75x13 mm
H375150L	3.75x15 mm
H375180L	3.75x18 mm
H375200L	3.75x20 mm

HELILUCID ø4.2

H42080L	4.2x8.0 mm
H42100L	4.2x10 mm
H42115L	4.2x11.5 mm
H42130L	4.2x13 mm
H42150L	4.2x15 mm
H42180L	4.2x18 mm
H42200L	4.2x20 mm
H42220L	4.2x22 mm
H42240L	4.2x24 mm

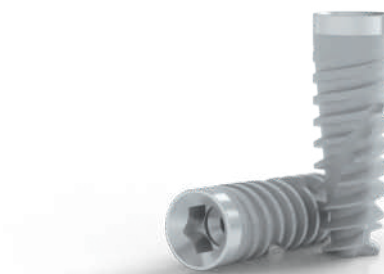

VITE TAPPO


ø3.75

1252



MISURE IMPLANTARI

PIATTAFORMA IMPIANTARE	Lunghezza Effettiva	Diametro impianto	Diametro Apice	Interfaccia Moncone	Interfaccia Ponte	Passo Spire	
3.3	3.3x8.0 mm	8.0	ø 3.5	ø 2.5	ø 3.5	ø 3.7	2.5
	3.3x10 mm	10	ø 3.5	ø 2.5	ø 3.5	ø 3.7	2.5
	3.3x11.5 mm	11.5	ø 3.5	ø 2.5	ø 3.5	ø 3.7	2.5
	3.3x13 mm	13	ø 3.5	ø 2.5	ø 3.5	ø 3.7	2.5
	3.3x15 mm	15	ø 3.5	ø 2.5	ø 3.5	ø 3.7	2.5
3.75	3.75x8.0 mm	8.0	ø 3.85	ø 3.0	ø 3.5	ø 3.85	2.5
	3.75x10 mm	10	ø 3.85	ø 3.0	ø 3.5	ø 3.85	2.5
	3.75x11.5 mm	11.5	ø 3.85	ø 3.0	ø 3.5	ø 3.85	2.5
	3.75x13 mm	13	ø 3.85	ø 3.0	ø 3.5	ø 3.85	2.5
	3.75x15 mm	15	ø 3.85	ø 3.0	ø 3.5	ø 3.85	2.5
	3.75x18 mm	18					
	3.75x20 mm	20					
4.2	4.2x6.0 mm	6.0	ø 4.2	ø 3.2	ø 3.85	ø 4.2	2.5
	4.2x8.0 mm	8.0	ø 4.2	ø 3.2	ø 3.85	ø 4.2	2.5
	4.2x10 mm	10	ø 4.2	ø 3.2	ø 3.85	ø 4.2	2.5
	4.2x11.5 mm	11.5	ø 4.2	ø 3.2	ø 3.85	ø 4.2	2.5
	4.2x13 mm	13	ø 4.2	ø 3.2	ø 3.85	ø 4.2	2.5
	4.2x15 mm	15	ø 4.2	ø 3.2	ø 3.85	ø 4.2	2.5
	4.2x18 mm	18	ø 4.2	ø 3.2	ø 3.85	ø 4.2	2.5
	4.2x20 mm	20	ø 4.2	ø 3.2	ø 3.85	ø 4.2	2.5
5.0	4.2x22 mm	22					
	4.2x24 mm	24					
	5.0x6.0 mm	6.0	ø 5.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 5.0	2.5
	5.0x8.0 mm	8.0	ø 5.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 5.0	2.5
	5.0x10 mm	10	ø 5.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 5.0	2.5
	5.0x11.5 mm	11.5	ø 5.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 5.0	2.5
6.0	5.0x13 mm	13	ø 5.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 5.0	2.5
	5.0x15 mm	15	ø 5.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 5.0	2.5
	6.0x6.0 mm	6.0	ø 6.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 6.0	2.5
	6.0x8.0 mm	8.0	ø 6.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 6.0	2.5
	6.0x10 mm	10	ø 6.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 6.0	2.5
	6.0x11.5 mm	11.5	ø 6.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 6.0	2.5
	6.0x13 mm	13	ø 6.0	ø 3.2	ø 3.85	ø 6.0	2.5

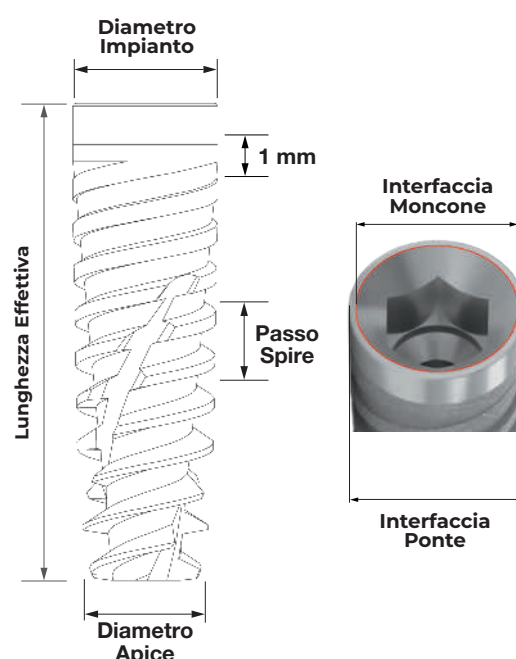

Tutte le misure sono in millimetri



HELI FINE® è un impianto identico, per quanto riguarda il design e le caratteristiche strutturali, all'impianto Heli. Si differenzia per il colletto lucido e per le spire fini, di conseguenza meno aggressive

CORONA

CARATTERISTICHE:

- Bone platform switching;
- Collo lucido: 1.0 mm lavorato a macchina per il massimo controllo dei tessuti;

VANTAGGI:

- Maggiore superficie di appoggio;
- Ridurre il riassorbimento crestale;
- Ottimizzazione della distribuzione del carico;
- Ridurre lo stress crestale.

CORPO

CARATTERISTICHE:

- Corpo cilindrico affusolato con doppie spire;
- Nucleo conico - più pronunciato nelle spire;
- Simil-osteotomo a corpo condensante.

VANTAGGI:

- Condensazione ossea;
- Efficace stabilità primaria;
- Facile inserimento.

SPIRE

CARATTERISTICHE:

- Spire fini meno aggressive;
- Doppie spire

VANTAGGI:

- Favorisce la procedura di inserimento;
- Elevata stabilità primaria nell'osso D4 e D5;
- Condensazione ossea;
- Consente un'osteotomia ridotta.

CONNESSIONE

CARATTERISTICHE:

- Precisione aumentata dell'esagono esterno;
- Piattaforma unica per tutti i diametri disponibili.

VANTAGGI:

- Perfetta connessione impianto-moncone;
- Facilità nel processo protesico e nella riabilitazione protesica.


APICE

CARATTERISTICHE:

- Spire affilate apicali;
- Rettilineo apicale;
- Progettazione osteocondensante.

VANTAGGI:

- Autofilettante;
- Autoperforante;
- Facile inserimento;
- Previene i danni alle strutture anatomiche.

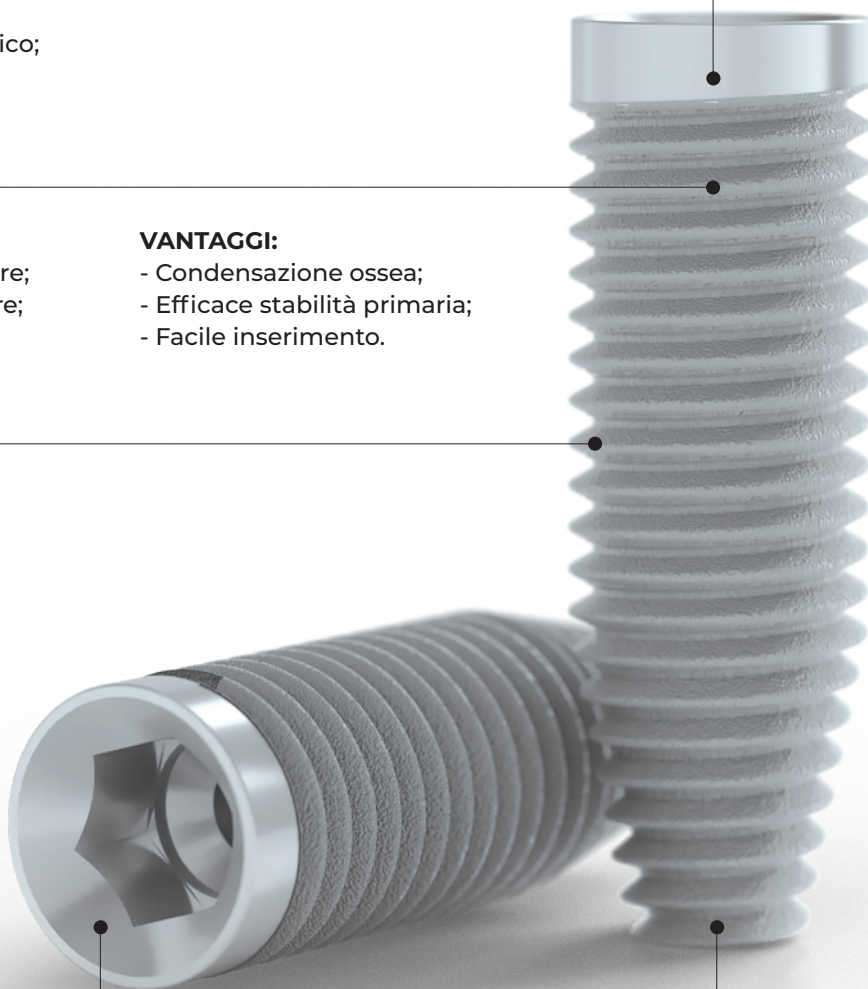

CODICI IMPIANTI

HELIFINE ø3.3

H33100LF	3.3x10 mm
H33115LF	3.3x11.5 mm
H33130LF	3.3x13 mm
H33150LF	3.3x15 mm

HELIFINE ø3.75

H375080LF	3.75x8.0 mm
H375100LF	3.75x10 mm
H375115LF	3.75x11.5 mm
H375130LF	3.75x13 mm
H375150LF	3.75x15 mm
H375180LF	3.75x18 mm
H375200LF	3.75x20 mm

HELIFINE ø4.2

H42080LF	4.2x8.0 mm
H42100LF	4.2x10 mm
H42115LF	4.2x11.5 mm
H42130LF	4.2x13 mm
H42150LF	4.2x15 mm
H42180LF	4.2x18 mm
H42200LF	4.2x20 mm
H42220LF	4.2x22 mm
H42240LF	4.2x24 mm

VITE TAPPO


ø3.75 1252



MISURE IMPLANTARI

	PIATTAFORMA IMPLANTARE	Lunghezza Effettiva	Diametro impianto	Diametro Apice	Interfaccia Moncone	Interfaccia Ponte	Passo Spire
3.3	3.3x10 mm	10	ø 3.5	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.7	2.3
	3.3x11.5 mm	11.5	ø 3.5	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.7	2.3
	3.3x13 mm	13	ø 3.5	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.7	2.3
	3.3x15 mm	15	ø 3.5	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.7	2.3
3.75	3.75x8.0 mm	8.0	ø 3.85	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.85	2.3
	3.75x10 mm	10	ø 3.85	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.85	2.3
	3.75x11.5 mm	11.5	ø 3.85	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.85	2.3
	3.75x13 mm	13	ø 3.85	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.85	2.3
	3.75x15 mm	15	ø 3.85	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.85	2.3
	3.75x18 mm	18	ø 3.85	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.85	2.3
4.2	3.75x20 mm	20	ø 3.85	ø 1.8	ø 3.5	ø 3.85	2.3
	4.2x8.0 mm	8.0	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3
	4.2x10 mm	10	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3
	4.2x11.5 mm	11.5	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3
	4.2x13 mm	13	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3
	4.2x15 mm	15	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3
	4.2x18 mm	18	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3
	4.2x20 mm	20	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3
	4.2x22 mm	22	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3
	4.2x24 mm	24	ø 4.2	ø 2.2	ø 3.85	ø 4.2	2.3

Tutte le misure sono in millimetri

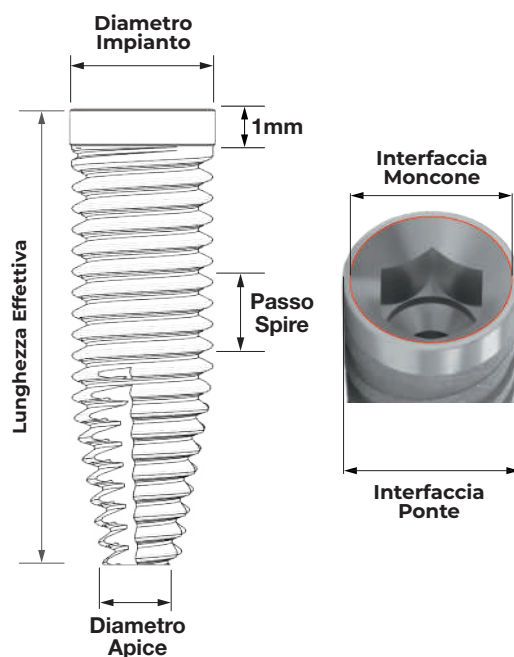

PACKAGINGBLISTER

Tutti gli impianti, gli accessori, le protesi e gli strumenti che fanno parte del sistema implantare IDC® sono adeguatamente elaborati attraverso un processo di certificato di decontaminazione e sono confezionati in una camera bianca di classe ISO 6.

Gli impianti sono forniti in confezione sterile. La confezione integra protegge l'impianto, sterilizzato con radiazioni ionizzanti, dagli agenti esterni e ne garantisce la sterilità fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'indicatore di cambio colore (rosso) segnala la corretta esposizione ai raggi gamma e la corretta sterilità del prodotto.



TAPPO SUPERIORE



IMPIANTO

AMPOLLA PLEXIGLASS



VITE COPERTURA

TAPPO INFERIORE



PROCEDURA CHIRURGICA **MOUNTLESS**

IDC® - Implant & Dental Company, offre una procedura di inserimento implantare molto semplice. L'impianto non necessita di mounter, in quanto si innesta direttamente nella connessione con il driver predisposto.

I driver IDC® sono progettati in modo tale da garantire una presa sicura, attraverso il sistema Friction-Fit. Questo sistema oltre ad evitare la deformazione dei bordi esagonali della connessione, permette allo stesso tempo, di effettuare una facile e sicura rimozione dall'alloggiamento della connessione implantare.



I drivers IDC®, hanno un indice visivo esagonale corrispondente alla protesi. Questa particolarità, crea uno spazio minimo che favorisce una completa visibilità del campo operatorio, oltre alla possibilità di orientare opportunamente la connessione esagonale.


Un solo strumento con un'unica piattaforma implantare (ø3.5 mm) consente l'inserimento di tutte le serie di impianti Heli®.

Attraverso l'apposito sistema Friction-Fit, i driver IDC® si innestano all'interno della connessione implantare, formando un unico blocco "di presa", sicuro ed un centraggio affidabile e diretto.

PRESA DELL'IMPIANTO

Aprire il blister, estrarre l'ampolla e rimuovere il tappo superiore (Fig. A).

Dopo aver pianificato precedentemente se si intende procedere con un serraggio manuale (Fig. B) o tramite contrangolo (Fig. C): scegliere il montatore dedicato e dopo aver ingaggiato l'impianto si può procedere all'estrazione dello stesso inserirlo nel sito implantare.

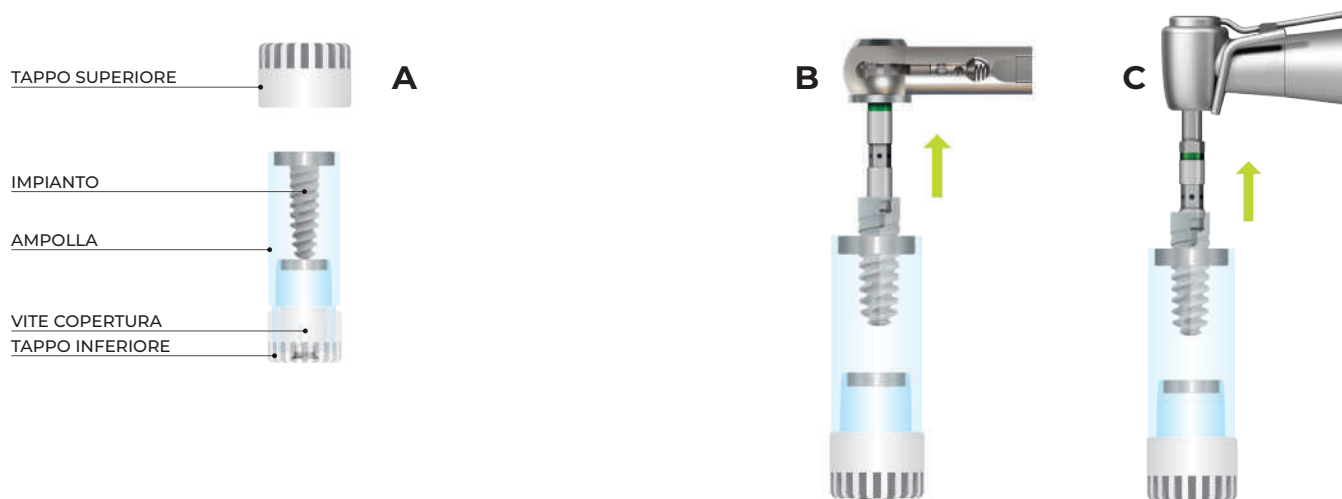

INSERIMENTO IMPIANTO


a. Iniziare a inserire l'impianto nell'osteotomia.

b. Quando si utilizza un'unità di fresatura, iniziare a entrare nell'impianto molto lentamente (25 giri/min).

IMPORTANTE

a. Il torque di inserimento massimo per gli impianti è di 50 Ncm e può essere misurato utilizzando il Manual Torque Wrench Surgical.

b. Non serrare eccessivamente la struttura. Un serraggio eccessivo può compromettere l'integrità della connessione interna e comprimere eccessivamente l'osso circostante, compromettendo l'osteointegrazione.

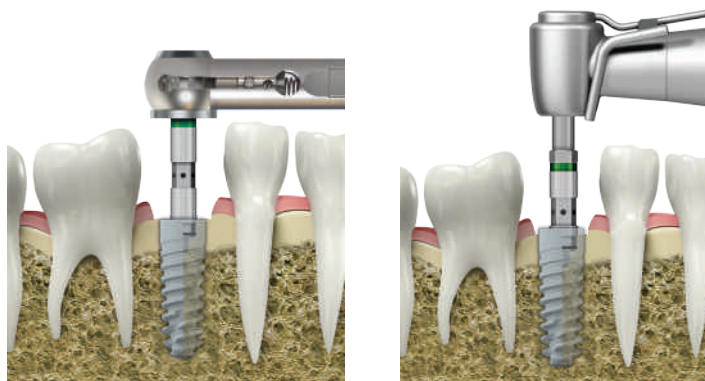


SERRAGGIO MANUALE

a. Collegare l'adattatore al cricchetto (ST1007) Driver contra (lungo corto st1091 st1092) e posizionare l'impianto fino alla profondità finale.

b. Non superare i 70 Ncm per gli impianti.

c. Rimuovere il driver con un semplice movimento verso l'alto o verso il basso.

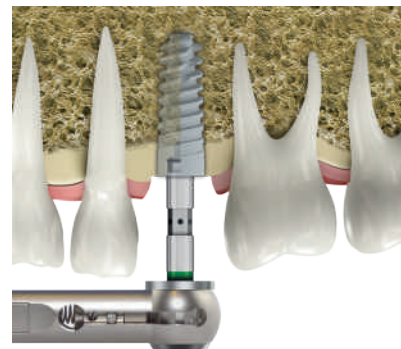

MONTATORI IMPIANTI

IDC® offre una vasta gamma di inseritori di impianti specifici da utilizzare per il prelievo e l'inserimento degli impianti.

Colore	Immagine	Tipologia	Lunghezza	Materiale	Codice
		EXTRA LUNGO	Lunghezza 59.8 mm	Acciaio Inox	ST1166
		LUNGO	Lunghezza 35.5 mm	Acciaio Inox	ST1065
		CORTO	Lunghezza 30.5 mm	Acciaio Inox	ST1064
		LUNGO	Lunghezza 27.5 mm	Acciaio Inox	ST1086
		CORTO	Lunghezza 23 mm	Acciaio Inox	ST1085




IMPUGNATURA CHIRURGICA
ST1594
A - Acciaio Inox



ADATTATORE CHIRURGICO CHIAVE DINAMOMETRICA
ST1314
A - Acciaio Inox

L'inseritore di impianto per contrangolo lungo (ST1065) è compatibile con il manico chirurgico (ST1320). Se per inserire l'impianto vengono utilizzati strumenti manuali, è necessario prestare una particolare attenzione per evitare un serraggio eccessivo.

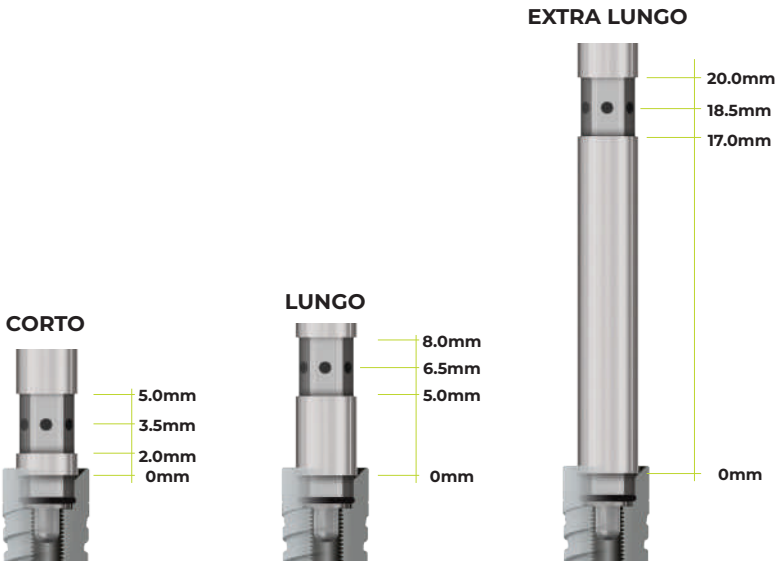

Le marcature rotonde sull'inseritore impianto indicano la distanza dalla spalla dell'impianto in intervalli di 1 mm.

DRIVER PROTESICI



DRIVER MANUALI

CORTO	ST1014
LUNGO	ST1024
A - Acciaio Inox	




DRIVER CHIAVE DINAMOMETRICA

CORTO - 7mm	ST1081
MEDIO - 15mm	ST1080
LUNGO - 21mm	ST1082
A - Acciaio Inox	




DRIVER CONTRANGOLO

CORTO - 7mm	ST1034
MEDIO - 15mm	ST1044
LUNGO - 21mm	ST1054
A - Acciaio Inox	

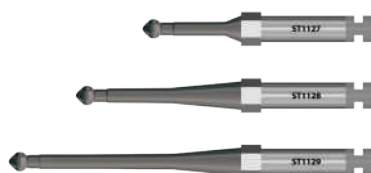

D.I.S. DRIVER ESA

CORTO	ST1127
MEDIO	ST1128
LUNGO	ST1129
A - Acciaio Inox	

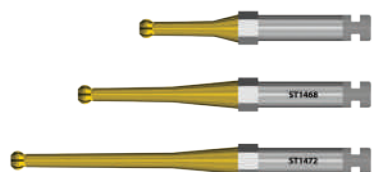

D.I.S. DRIVER TORX

CORTO	ST1464
MEDIO	ST1468
LUNGO	ST1472
A - Acciaio Inox	



ADATTATORE PROTESICO CHIAVE DINAMOMETRICA

ST1007

A - Acciaio Inox



IMPUGNATURA STUDIO ST1005

A - Acciaio Inox



IMPUGNATURA LABORATORIO

ST1006

A - Acciaio Inox

STRUMENTARIO CHIRURGICO

Fresa INIZIALE

La fresa a lancia è uno strumento di precisione in acciaio per uso chirurgico. Appuntita e tagliente consente un'incisione della corticale, pulita e precisa. Il disegno della lama garantisce un taglio efficace sia di punta che di lato. Presenta un diametro massimo di 1.9mm . La marcatura laser a 6.0mm indica la profondità a cui inserire sempre la fresa per ottenere un adeguato foro guida per le frese successive.



Frese CHIRURGICHE


Tutte le frese del sistema implantare Heli® sono fornite con codifica a colori, con colore corrispondente al diametro specifico dell'impianto. Per un controllo preciso della profondità, le frese sono compatibili con un sistema di stop.

FRESE									
	Fresa 1	Fresa 2	Fresa 3	Fresa 4	Fresa 5	Fresa 6	Fresa 7	Fresa 8	Fresa 8
Colore									
Immagine									
Diametro	ø 2.4	ø 2.8	ø 3.2	ø 3.5	ø 3.7	ø 4.0	ø 4.2	ø 4.7	ø 5.2
Diametro punta	ø 2.0	ø 2.4	ø 2.8	ø 3.3	ø 3.6	ø 3.7	ø 3.9	ø 4.4	ø 4.9
Codice	ST1068	ST1069	ST1070	ST1071	ST1630	ST1627	ST1631	ST1628	ST1629
Materiale	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox

***NB. Fresa ST1067 optional disponibile solo su richiesta per impianti DìTRE**

ATTENZIONE:

A seguito della funzione e del design delle frese, la punta è più lunga di 0.5 mm rispetto alla profondità di inserimento dell'impianto. Ad esempio, se si fresa fino alla marcatura da 10 mm, l'osteotomia effettiva avrà una profondità di 10.5 mm.

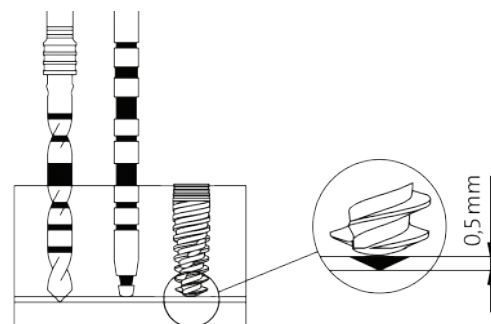

STRUMENTARIO CHIRURGICO

STOP Frese chirurgiche

Gli stop sono dispositivi da inserire in senso punta/gambo su frese predisposte a riceverli. Consentono di limitare la lunghezza di lavoro di una fresa ad altezza predeterminata.

IMPIANTI Ø3.0 - Ø3.3 - Ø3.75 - Ø4.2					
ST1094	ST1095	ST1096	ST1097	ST1098	ST1099
					
L6	L8	L10	L11.5	L13	L15

IMPIANTI Ø5.0 - Ø6.0					
ST1100	ST1101	ST1102	ST1103	ST1104	ST1105
					
L6	L8	L10	L11.5	L13	L15


STOP Inserimento e disinserimento

In ogni osteotomia, il maggiore ostacolo al fine di ottenere un lavoro perfetto, è rappresentato dal controllo della profondità per la sicurezza del paziente.

Vi è la necessità di un sistema di stop per fresa che sia al contempo: essenziale nel suo uso e semplice da usare ma soprattutto, che soddisfi l'esigenza di eseguire con sicurezza interventi di chirurgia implantare. Il nuovo Kit di Stop per Frese IDC® risponde esattamente a queste esigenze.


STEP 1

Selezionare lo stop per fresa appropriato.

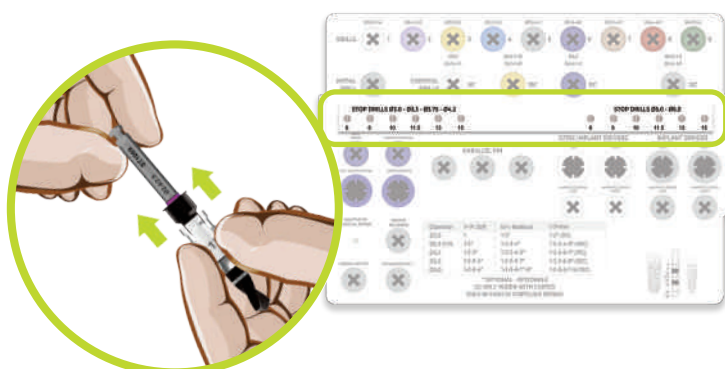

STEP 2

Verificare la profondità di fresaggio utilizzando la Guida di profondità per fresa.

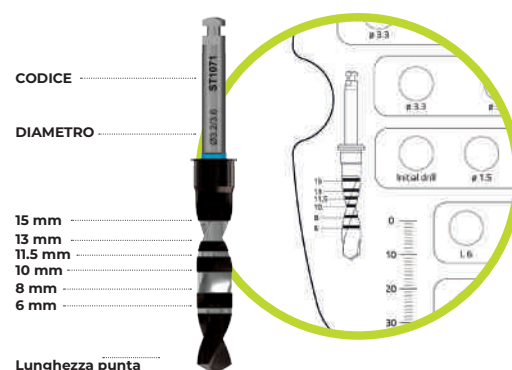

STEP 3

Creare l'osteotomia con la profondità predeterminata.



STEP 4

Dopo avere eseguito l'osteotomia, disingaggiare lo stop manualmente, tirandolo verso la punta della fresa e prestando particolare attenzione.



STRUMENTARIO CHIRURGICO

PROLUNGA Frese Chirurgiche

L'anello di arresto riduce l'efficacia dell'irrigazione quando si utilizza un estensore fresa. In questo caso, utilizzare un'irrigazione esterna aggiuntiva (ad esempio con una siringa) per garantire il corretto raffreddamento dell'osteotomia durante la fresatura.



PROLUNGA FRESA


ST1084

A - Acciaio Inox

GUIDE DI PROFONDITÀ E PARALLELISMO

Strumento progettato per misurare accuratamente la profondità dell'osteotomia. Funzione di controllo del parallelismo per l'analisi ai raggi X.

Ogni gradino è uguale all'altezza di ogni impianto IDC®

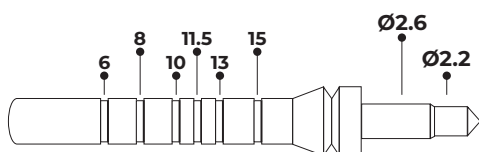

PIN PARALLELISMO

ST1079

A - Acciaio Inox

Strumento con doppia punta di misurazione (profondità osteotomia - altezza gengivale).

Profondità dell'osteotomia: pari a $\varnothing 1.9\text{mm}$, da esaminare la profondità del sito implantare con fresa $\varnothing 2\text{mm}$;


Altezza gengivale: pari a $\varnothing 3.7\text{mm}$, per esaminare l'altezza gengivale della protesi per adattamento e/o vite di guarigione.




**STRUMENTO
PIN PARALLELISMO**

ST1083

Ti5 - Titanio Grado 5

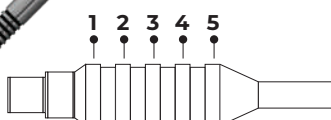

ALTEZZA GENGIVALE

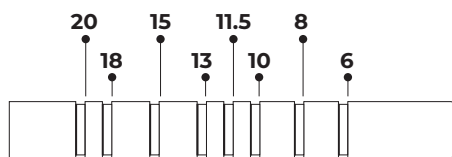


**PROFONDITÀ
DELL'OSTEOTOMIA**

STRUMENTARIO CHIRURGICO

FRESE CORTICALI

Ø3.0	Ø3.3/3.75	Ø4.2/4.3	Ø5.0/6.0
			
ST1074	ST1075	ST1076	ST1078

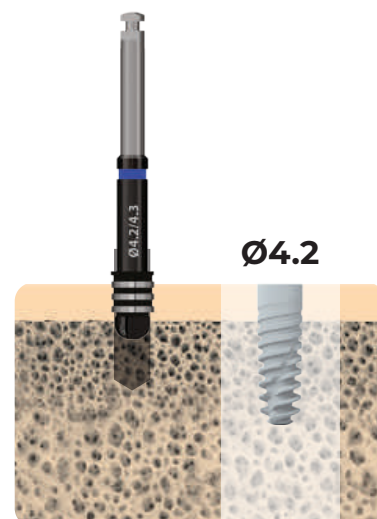


UTILIZZO DELLA FRESA CORTICALE


Nei casi con osso denso o con corticale spessa, si consiglia di utilizzare una fresa corticale per evitare la compressione.

NOTE:

Nei casi in cui si procede ad un rialzo del seno, per ottimizzare la stabilità primaria di potenziale, è sconsigliato l'utilizzo della fresa corticale.

MASCHIATORI

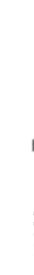Ø3.0	Ø3.3/3.75	Ø4.2/4.3	Ø5.0	Ø6.0
				
ST1087	ST1088	ST1089	ST1090	ST1091

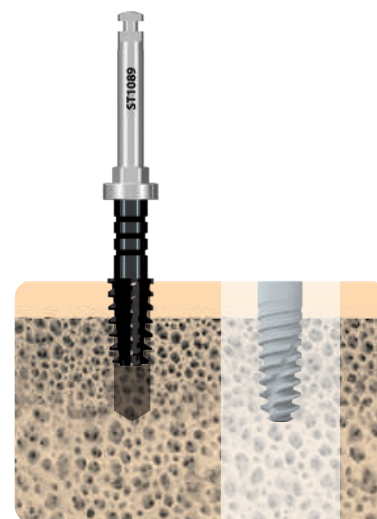

UTILIZZO DEL MASCHIATORE

Laddove esistano casi con osso corticale denso o spesso, si consiglia l'utilizzo di un maschiatore per completare adeguatamente l'inserimento dell'impianto.

NOTE:

Assicurarsi che la linea di profondità (contrassegnata con segni neri sul maschiatore) sia allineata con la lunghezza dell'impianto. Così facendo, la porzione apicale del sito, non sarà pre-maschiata e quindi consentirà un perfetto alloggiamento dell'impianto e una conseguente migliore stabilità primaria.

STRUMENTARIO CHIRURGICO

FRESE “BONE MILL” CON GUIDA

La Bone Mill Drill, viene utilizzata una volta posizionato l'impianto.

Ha la funzione di modellare l'osso corticale attorno al perimetro coronale della piattaforma implantare. Questo favorisce l'inserimento del Multi Sistem Abutment (M.S.A.) grazie ad una superficie libera e pulita.

IMPIANTO Ø3.3		IMPIANTO Ø3.75		IMPIANTO Ø4.2/5.0	
FRESA	GUIDA	FRESA	GUIDA	FRESA	GUIDA
					
ST1160	ST1161	ST1162	ST1163	ST1164	ST1163

FIG.1


Inserire la Guide Mill Screw all'interno dell'impianto.

FIG.2

Rimuovere ogni residuo osseo intorno alla piattaforma dell'impianto che impedirebbe all'abutment di essere inserito completamente. La rimozione con lo strumento rotante Bone Mill, in base al diametro della svasatura di rimozione necessaria.

FIG.3

Rimuovere la Guide Mill Screw dall'impianto, valutando la rimozione dell'interferenza ossea per inserimento del componente M.S.A.

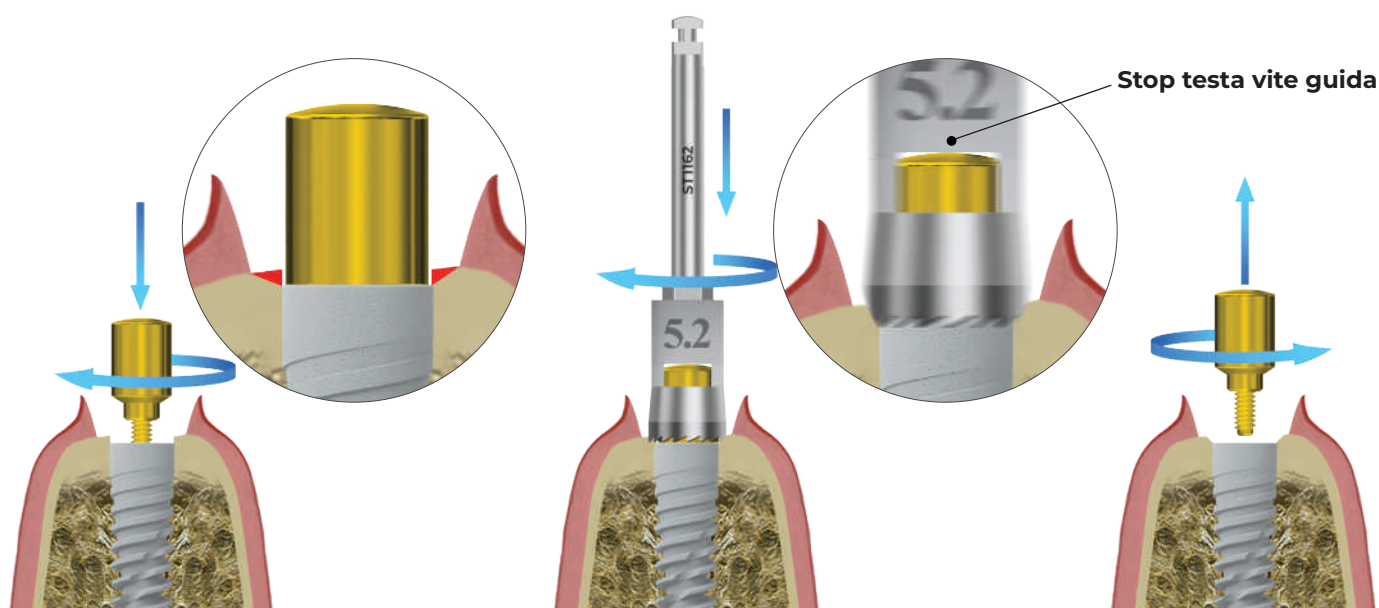

STRUMENTARIO CHIRURGICO

FRESE DI RIMOZIONE

Le nuove frese di rimozione di IDC® consentono un espianto sicuro degli impianti .

BENEFICI

- Le tacche di profondità segno incise con laser a 2, 6, 10 e 18 mm assicurano l'esposizione alla precisa profondità dell'impianto da espiantare.
- Le finestrelle nell'area di lavoro delle frese offrono una migliore visuale durante l'esposizione del corpo dell'impianto. Inoltre facilitano l'espulsione dei frammenti.
- Le frese di rimozione, realizzate in acciaio inossidabile, hanno una dentatura rongeur dall'elevata efficienza di taglio per un trattamento atraumatico.
- La dimensione dello strumento ed il codice prodotto indicato sulla taglierina consentono una facile identificazione delle quattro dimensioni.

IMPIANTO Ø3.3-3.75

Diametro Esterno ø 5.0
Diametro Interno ø 4.1

Lunghezza 10mm	Lunghezza 16mm
	
ST1168	ST1169

IMPIANTO Ø4.2

Diametro Esterno ø 5.5
Diametro Interno ø 4.5

Lunghezza 10mm	Lunghezza 16mm
	
ST1170	ST1171

IMPIANTO Ø5.0

Diametro Esterno ø 6.0
Diametro Interno ø 5.1

Lunghezza 10mm	Lunghezza 16mm
	
ST1172	ST1173

IMPIANTO Ø6.0

Diametro Esterno ø 7.0
Diametro Interno ø 6.1

Lunghezza 10mm	Lunghezza 16mm
	
ST1168	ST1169




ESTRATTORE IMPIANTO	ESTRATTORE IMPIANTO	ESTRATTORE IMPIANTO
		
NARROW Lungo	REGULAR Corto	WIDE Corto
ST1591	ST1592	ST1593

ISTRUZIONI DI LAVORO:

1. Mobilizzazione della gengiva. L'impianto è esposto nella zona superiore a una profondità di circa 1 - 2 mm come guida per la fresa per trapano.
2. L'impianto viene espantato con la fresa trepan con lavorazione intermittente e raffreddamento esterno costante. L'impianto può infine essere rimosso esercitando una leggera rotazione con una pinza per l'estrazione.

METODO

- Numero giri motore ottimali: (800-1000 giri/min)
- Utilizzo in contrangolo (riduzione di almeno 10:1) con costante raffreddamento esterno mediante soluzione fisiologica sterile.

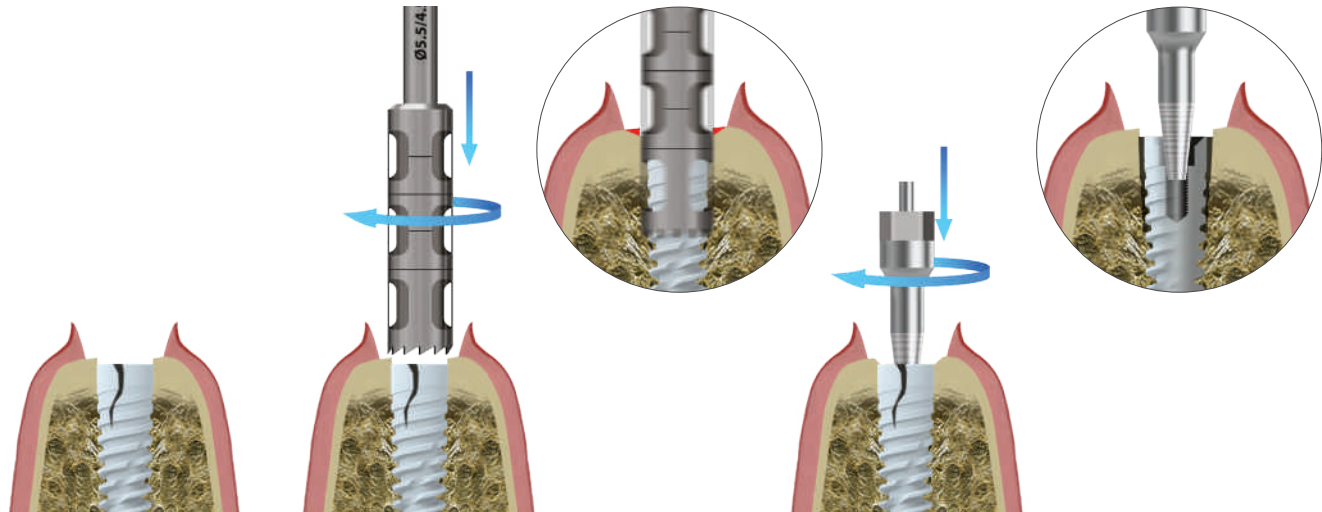


STRUMENTARIO **CHIRURGICO**

CRICCHETTI E COMPONENTI DINAMOMETRICHE

WRENCH		TORQUE WRENCH		TORQUE WRENCH	
					
USO	Chirurgia	USO	Chirurgia /Protesica	USO	Chirurgia / Protesica
TORQUE	∞ Ncm	TORQUE	10 / 30 / 50 / 70 Ncm	TORQUE	15 / 20 / 30 / 70 / ∞ Ncm
MATERIALE	Acciaio Inox	MATERIALE	Acciaio Inox	MATERIALE	Acciaio Inox
CODICE	ST1010	CODICE	ST1130	CODICE	ST1507

Nota: per garantire sia un perfetto funzionamento nel tempo che una perfetta pulizia, il cricchetto deve sempre essere messo da parte e le singole parti essere disinfettate, pulite e sterilizzate dopo l'uso. Il funzionamento deve essere controllato in tempo utile prima di ogni utilizzo.
Lettura del torque sulla componente dinamometrica:

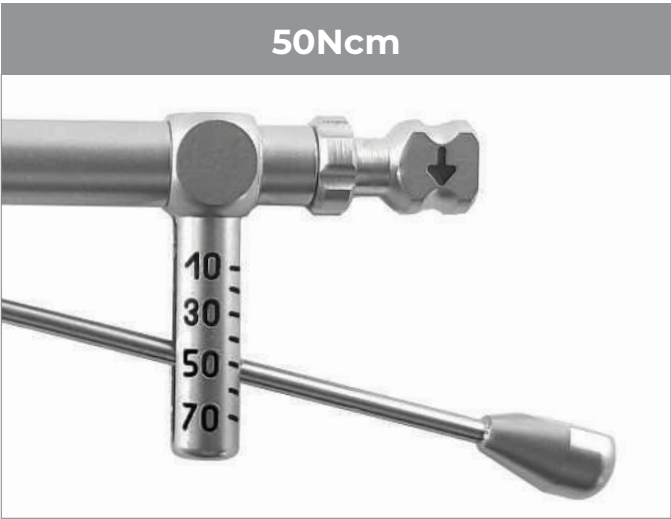



KITCHIRURGICI

Il kit chirurgico ICD® è progettato per la massima facilità d'uso ed ergonomia.

Le descrizioni degli strumenti sono stampate sul vassoio e il kit contiene la vite di arresto per un uso sicuro delle frese.


Il kit chirurgico IDC® fornisce tutti gli strumenti per operare in completa autonomia e con estrema efficacia in ogni condizione. Uno strumentario realizzato con i migliori materiali, seguendo i più alti standard di design, precisione ed ergonomia.

CONTROLLO DI PROFONDITÀ “GO and STOP”


Dotato di una nomenclatura estremamente leggibile, il Kit di Stop per Frese IDC, è fornito del sistema “Go&Stop”, di un codice colore, di un'organizzazione facile da seguire e di numerose altre caratteristiche che consentono un'ottima precisione e un notevole risparmio di tempo.




STOP FRESE Ø3.3 - 3.75 - 4.2

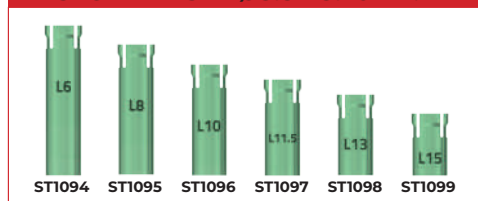

STOP FRESE Ø5.0 - 6.0

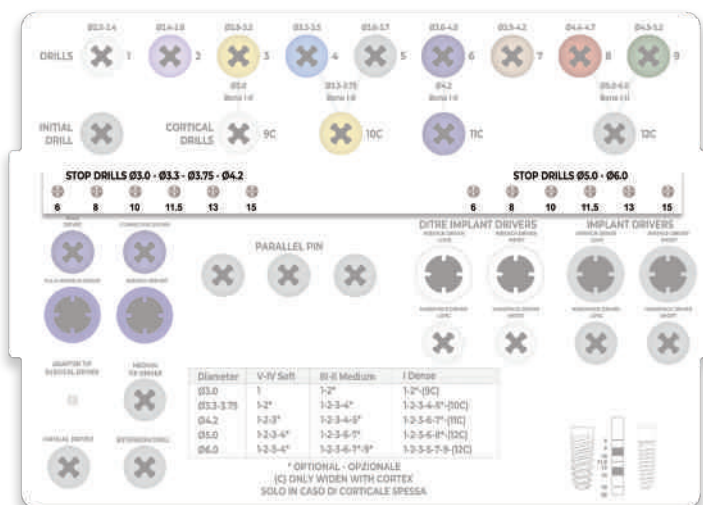

Vassoio inferiore

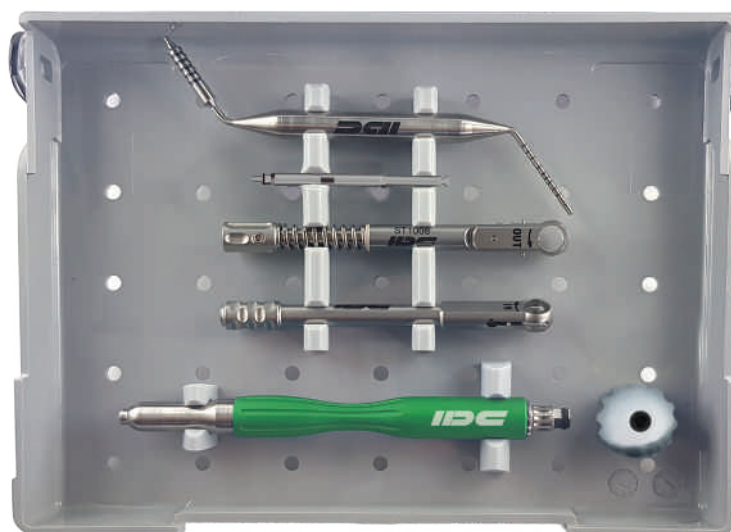

STRUMENTARIO



CHIAVE DINAMOMETRICA 10-45 Ncm
ST1008



PROFONDIMETRO
ST1083

IMPUGNATURA CHIRURGICA



DRIVER
ST1166



IMPUGNATURA DRIVER
ST1534



REGULATION CAP
ST1535

WRENCH DRIVER



CHIAVE
DINAMOMETRICA ∞
ST1100

WRENCH DRIVER



CHIAVE DINAMOMETRICA
10-70 Ncm
ST1130

LEGENDA:

cornici nere componenti compresi nel kit
cornici rosse componenti optional

PROTOCOLLO **CHIRURGICO**


IDC® - Implant & Dental Company, è in grado di offrire un'intera gamma di frese di alta qualità realizzate con un design innovativo e un materiale ad alte prestazioni (Kleinox Steel).

Un nuovo concetto che unisce il trapano ad una procedura chirurgica collaudata e altamente affidabile sia per il paziente che per l'operatore professionale.




- L'osteotomia deve procedere come indicato nella procedura chirurgica con abbondante e costante irrigazione di soluzione fisiologica sterile.
- Non superare mai i 45/50 Ncm al torque di inserimento dell'impianto.
Un serraggio eccessivo può causare danni alla connessione implantare e/o rottura con successiva necrosi del sito osseo.
- In caso di osso estremamente compatto si considera di effettuare alcune valutazioni preliminari dedicate al sito specifico.
- Tenere in considerazione la lunghezza della punta quando si prepara l'osteotomia
- Anche se il protocollo riportato è raccomandato per la maggior parte dei casi, in situazioni "particolari" potrebbero rendersi necessarie ulteriori valutazioni da parte del clinico


Densità Ossea Tipo I **ALTA**

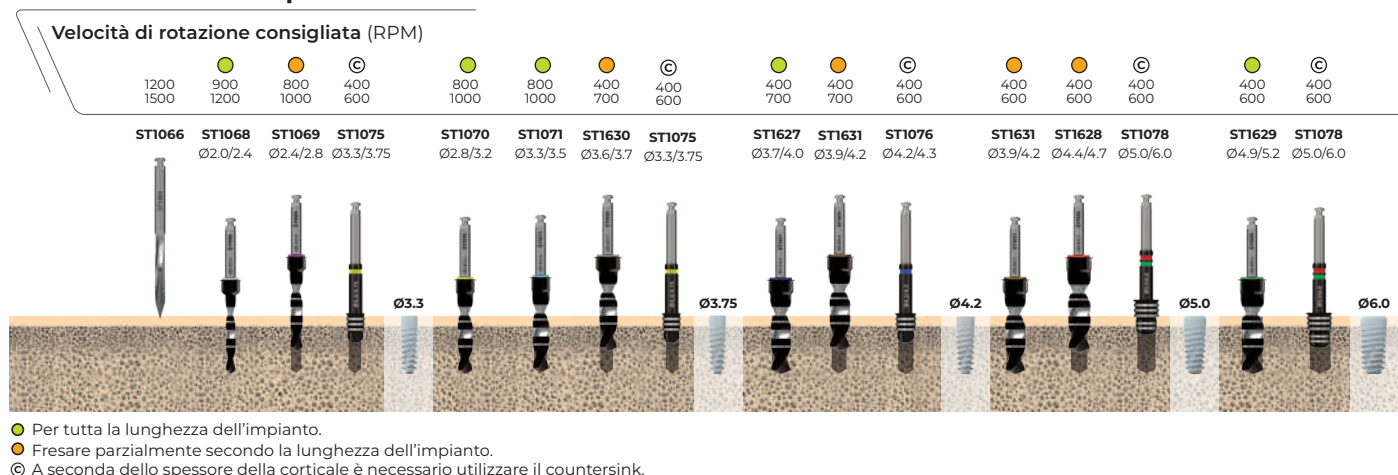

Densità Ossea Tipo II - III **MEDIA**

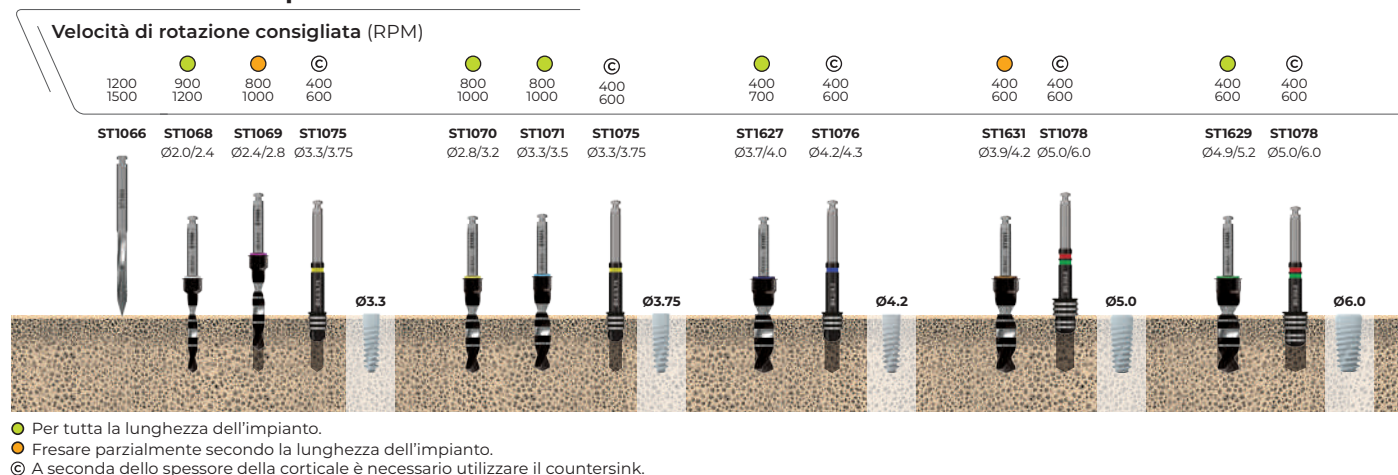

Densità Ossea Tipo IV **BASSA**

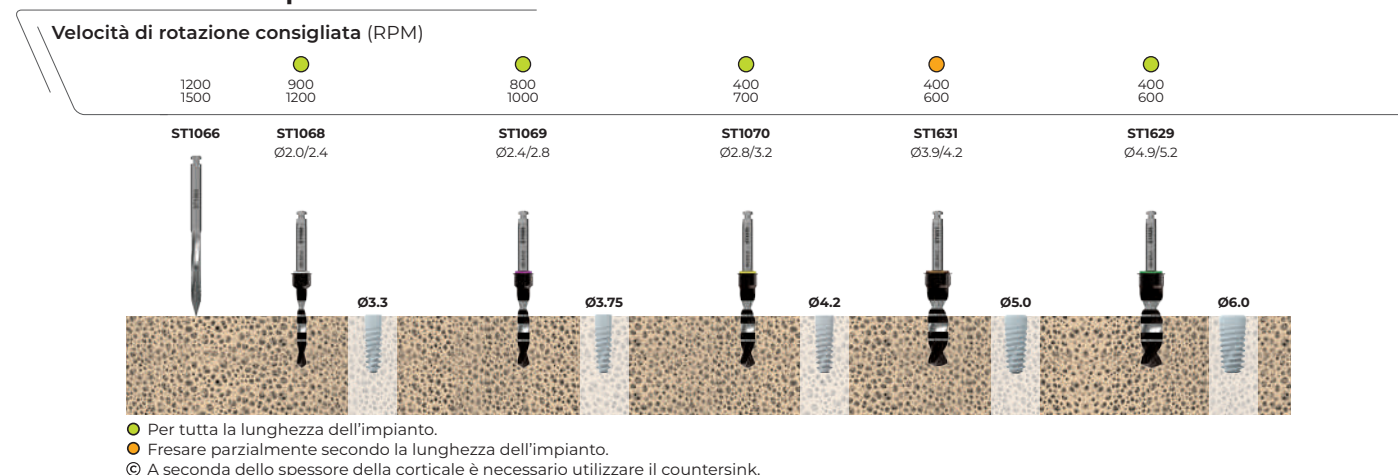


HELLI Fine


IMPLANT SERIES

- L'osteotomia deve procedere come indicato nella procedura chirurgica con abbondante e costante irrigazione di soluzione fisiologica sterile.
- Non superare mai i 45/50 Ncm al torque di inserimento dell'impianto.
Un serraggio eccessivo può causare danni alla connessione implantare e/o rottura con successiva necrosi del sito osseo.
- In caso di osso estremamente compatto si considera di effettuare alcune valutazioni preliminari dedicate al sito specifico.
- Tenere in considerazione la lunghezza della punta quando si prepara l'osteotomia
- Anche se il protocollo riportato è raccomandato per la maggior parte dei casi, in situazioni "particolari" potrebbero rendersi necessarie ulteriori valutazioni da parte del clinico


Densità Ossea Tipo I **ALTA**

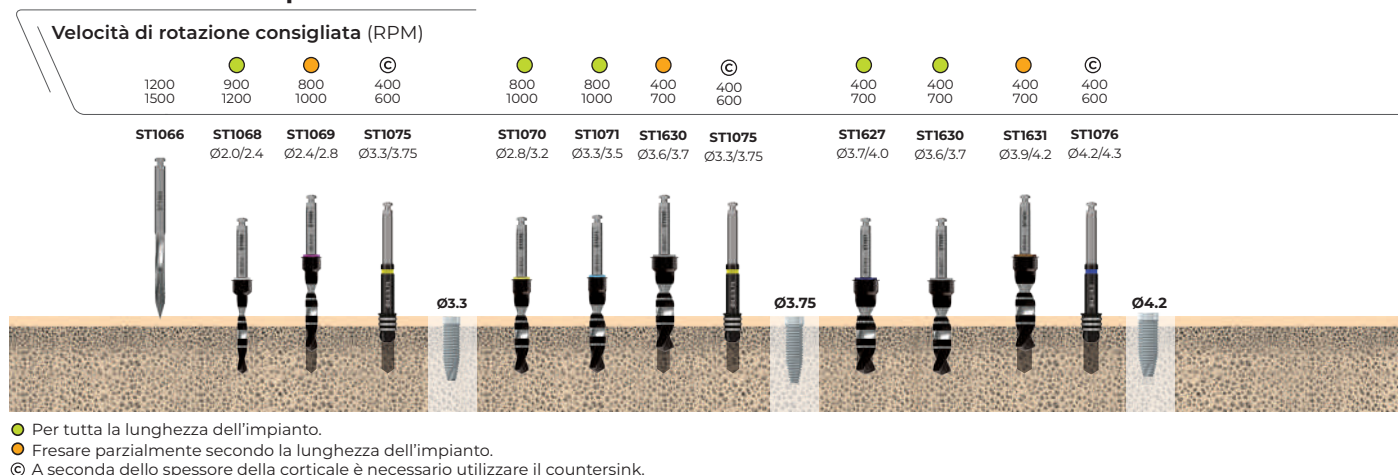

Densità Ossea Tipo II - III **MEDIA**

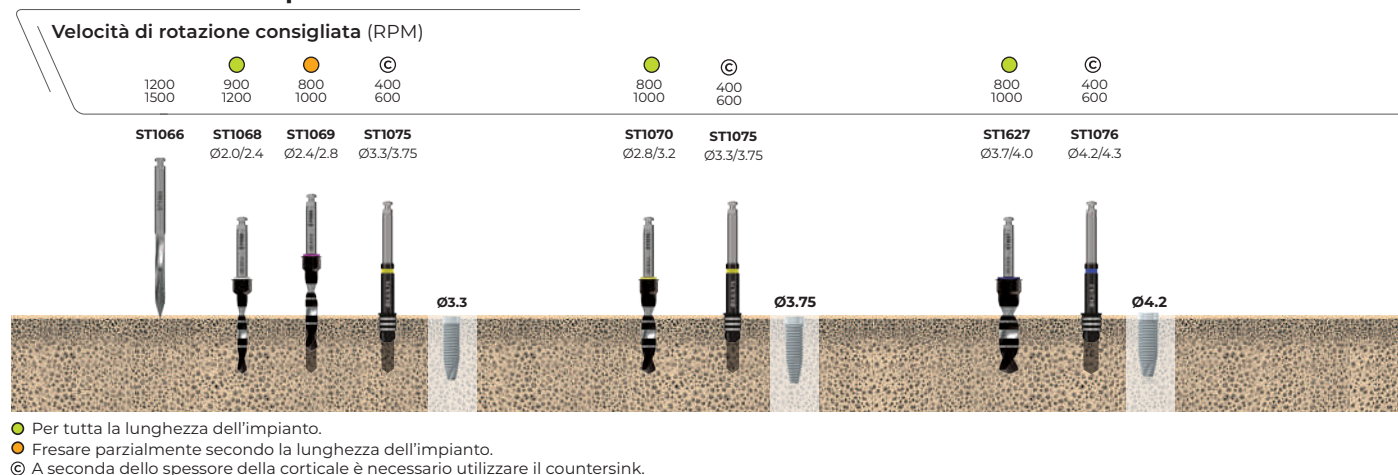


Densità Ossea Tipo IV **BASSA**

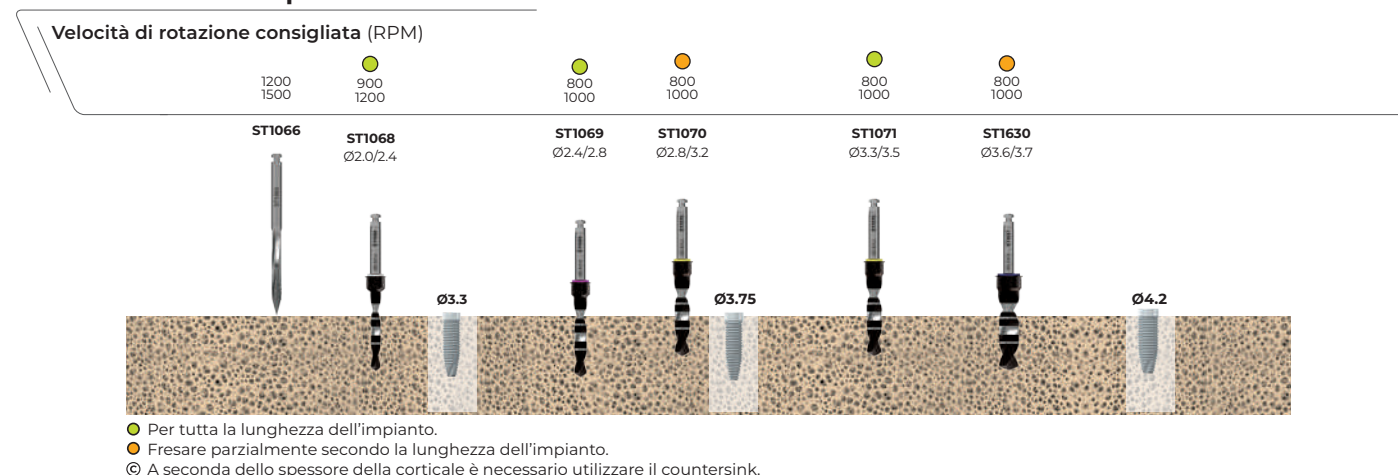

CONNESSIONE PROTESICA UNICA

La stessa piattaforma protesica 3.5 per tutti i diametri $\varnothing 3.3$, $\varnothing 3.75$, $\varnothing 4.2$, $\varnothing 5.0$, $\varnothing 6.0$. Questo porta ad una estrema semplificazione del lavoro degli odontoiatri e dei tecnici e rende la sistemica HELI, particolarmente performante e flessibile. L'esagono interno garantisce massima stabilità, ottima resistenza meccanica e riduce al minimo il "microgap" tra fixture e moncone.

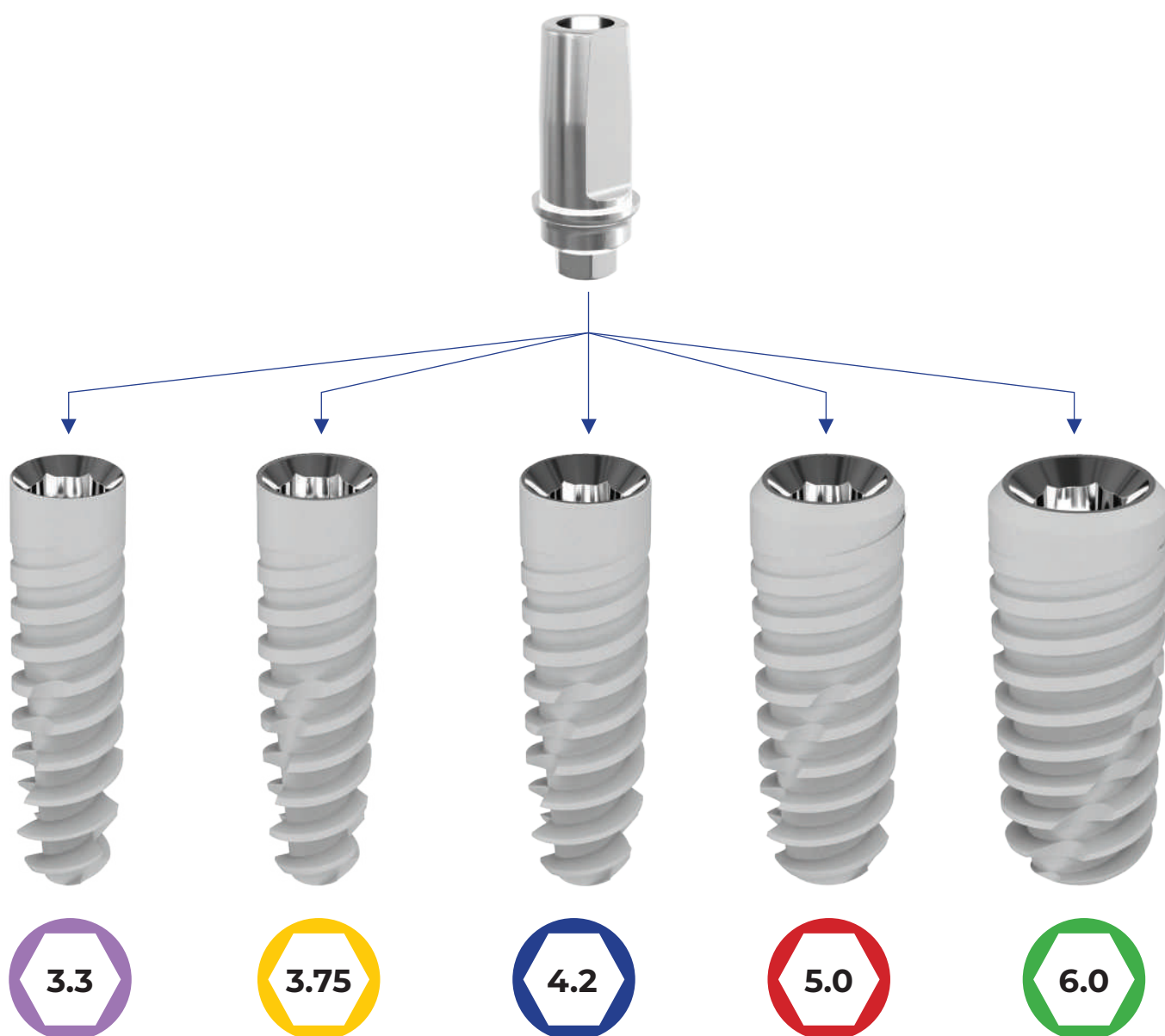

La connessione ad esagono esterno tra moncone e componente minimizza i problemi di allentamento e connessione impianto-abutment.
Il cambio di piattaforma integrato garantisce una maggiore stabilità dei tessuti molli.



COMPONENTI **PROTESICI**

I sistemi implantari ICD® - Implant & Dental Company, offrono diverse soluzioni protesiche. Sono disponibili monconi in titanio dritti o inclinati, monconi fresati, monconi o monconi calcinabili monconi per saldatura, connettori per barre e monconi per overdenture.

Componenti Protesi Cementata

TRANSFER OPEN TRAY


Questa tipologia di componenti IDC® sono progettati per lavorazioni di impronta con la tecnica open-tray quando le ritenzioni sono con profilo tagliente.

Il pick-up transfer open tray è costituito a sua volta da 2 pezzi: vite transfert e transfert (disponibile in due differenti lunghezze).

La tecnica a cucchiaio aperto prevede l'uso del pick-up transfert, il quale deve venire accuratamente posizionato e fissato nell'impianto e una volta preparato il portaimpronta personalizzato si può procedere con la presa dell'impronta. Quando il materiale da impronta si sarà indurito si potrà allentare la vite e rimuovere il portaimpronta. Il pick-up transfer rimarrà automaticamente nel materiale e su di esso verrà fissato e riposizionato l'analogo grazie all'uso della vite transfert.



STEP 1

Preparazione sito implantare per impronta
Impianto HELI
Transfer Open tray short (cod.1001)

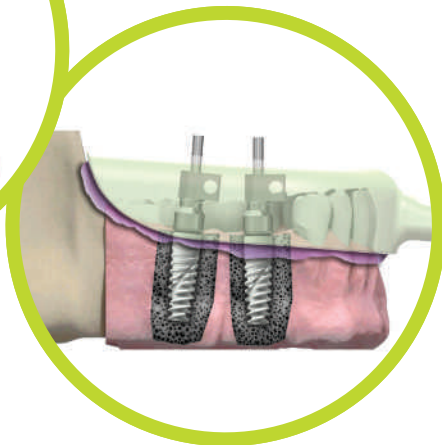


STEP 2

Preparazione sito implantare per impronta
Impianto HELI
Transfer Open tray short (cod.1001)
Analogo A.D.M. (cod.2219)

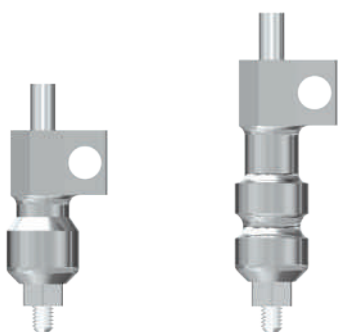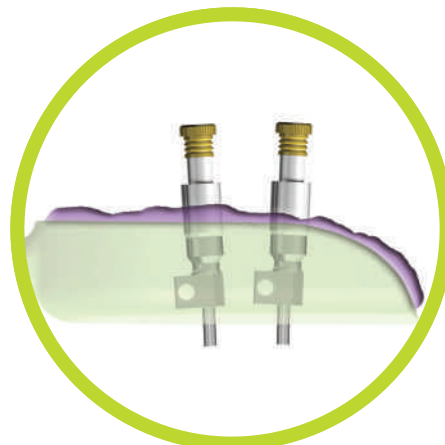

TRANSFER OPEN TRAY

Corto	1001
Lungo	1033
TI5 - Titanio Grado 5	

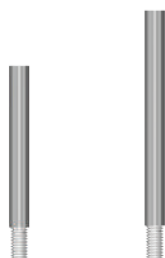

VITE TRANSFER

Corto	1038
Lungo	1039
TI5 - Titanio Grado 5	



Componenti Protesi Cementata

TRANSFER CLOSED TRAY

Questa tipologia di componenti IDC® è studiata per interventi con la tecnica dell'impronta a cucchiaio chiuso quando le ritenzioni sono a profilo arrotondato.

la tecnica "closed tray (a vassoio chiuso) garantisce una presa d'impronta facile e veloce per ogni paziente. Durante la rimozione del portaimpronta rimarrà inserito nel sistema e una volta svitato e rimosso dal cavo orale, il transfer in metallo verrà reinserito nel portaimpronta (già montato il suo analogo tramite vite dedicata).

Il moncone transfer a strappo per la tecnica a cucchiaio chiuso è consigliato in caso di limitatezza intro-occlusale e grazie agli spazi della cappetta monouso, garantisce una grande precisione durante il trasferimento dell'impronta e un facile posizionamento dell'analogo nel portaimpronta.


STEP 1

Preparazione sito implantare per impronta
HELI Implant
Transfer Closed Tray corto (cod.1002)



STEP 2

Preparazione sito implantare per
impronta
Transfer Closed Tray corto (cod.1002)
Analogo A.D.M. (cod.2219)

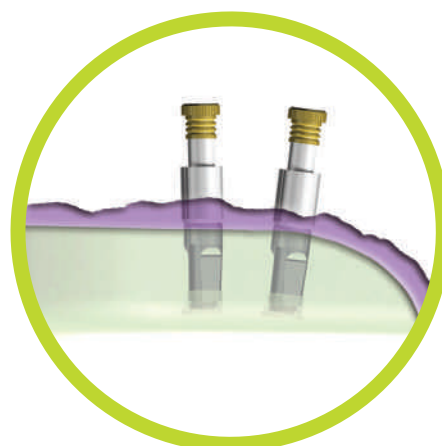

TRANSFER CLOSED TRAY

Corto 1002
Lungo 1032

TI5 - Titanio Grado 5



UNIVERSAL IMPRESSION CAP

2142

POM - Poliossimetilene



VITE TRANSFER

Corto 1110
Lungo 1111

TI5 - Titanio Grado 5



A.D.M.

ANALOG FOR DIGITAL MODEL

CARATTERISTICHE:

Costituiti da due pezzi riposizionabili con estrema precisione per ricostruzioni con tecnica Cad-Cam.

VANTAGGI / APPLICAZIONI:

- Estrema precisione e duttilità in fase Cad-Cam;
- Estrema precisione e duttilità in fase analogica.



CONNESSIONE

Sono disponibili per tutte le piattaforme implantari prodotte da Anteea: estrema precisione e risultati senza alterazioni.

DESIGN

Il disegno cilindrico con due scanalature nella parte inferiore garantiscono un'elevata accuratezza di riposizionamento sul modello ottenuto in stampa 3D. Con l'ausilio dell'apposito strumento d'inserimento viene facilitata e preservata l'accuratezza nella sede progettata.

BOCCOLA FILETTATA

Questa boccia filettata inferiore consente all'analogo di stabilizzarsi nella posizione adeguata con un'elevata precisione. Anteea consiglia il suo utilizzo in specifici casi per incollare l'analogo al modello 3D.

LIBRERIE

Le librerie implantari ADM sono disponibili per tutte le piattaforme prodotte da Anteea e costantemente aggiornate con i più performanti software disponibili in commercio:




ANALOGO A.D.M. 2219

A - Acciaio Inox

Componenti Protesi Cementata

MONCONE DI GUARIGIONE

Le viti di guarigione preparano il sito per l'inserimento della sovrastruttura e "modellano" il tessuto molle che circonda l'impianto. La vite appropriata va scelta in base allo spessore della mucosa. Viti di guarigione ampie vengono usate per rimodellare il tessuto molle di molari e premolari. Serrare usando un cacciavite esagonale di 1.25 mm o un adattatore per contrangolo con una torque tra i 10 Ncm.

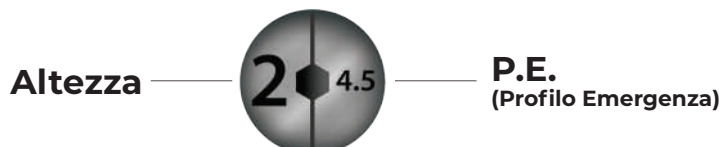

MONCONE GUARIGIONE Ø3.8 - SLIM

H 2.0 mm	1100
H 3.0 mm	1101
H 4.0 mm	1102
H 5.0 mm	1103
H 7.0 mm	1104

Ti5 - Titanio Grado 5



MONCONE GUARIGIONE Ø4.5 - REGULAR

H 2.0 mm	1021
H 3.0 mm	1022
H 4.0 mm	1023
H 5.0 mm	1024
H 7.0 mm	1025

Ti5 - Titanio Grado 5



MONCONE GUARIGIONE Ø5.5 - WIDE

H 2.0 mm	1026
H 3.0 mm	1027
H 4.0 mm	1028
H 5.0 mm	1029
H 7.0 mm	1030

Ti5 - Titanio Grado 5



MONCONE GUARIGIONE Ø6.5 - EXTRA WIDE

H 2.0 mm	1105
H 3.0 mm	1106
H 4.0 mm	1107
H 5.0 mm	1108
H 7.0 mm	1109

Ti5 - Titanio Grado 5



PLATFORM SWITCHING

RICOSTRUZIONI CON ABUTMENT A DIAMETRO RIDOTTO

Numerosi sono i fattori che influenzano il livello osseo e lo stato di salute del tessuto molle attorno a un impianto. Alcuni fattori sono legati al design e possono avere un'influenza determinante sul successo del trattamento.

L'utilizzo di abutment a diametro ridotto, il cosiddetto "Platform switching" (PS), ne è un valido esempio.

La connessione platform switching si verifica quando il diametro delle parti protesiche che emergono dall'impianto è minore rispetto a quello della piattaforma dell'impianto.

mentre nella maggior parte dei sistemi implantari il diametro di emergenza del moncone corrisponde alla piattaforma dell'impianto, nella platform switching questo viene ridotto pressoché alla dimensione della connessione.

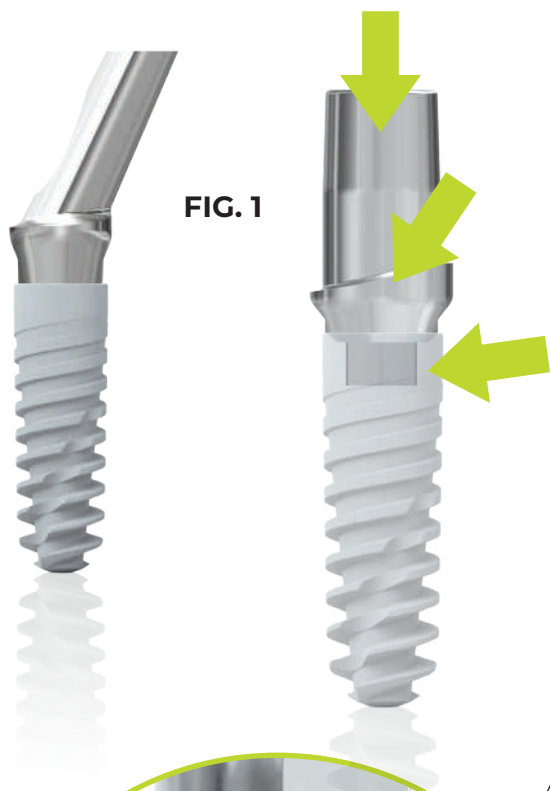


FIG. 1

FIG. 1 - COMPLETA DISTRIBUZIONE DELLE FORZE


L'utilizzo di componenti platform switching consente una distribuzione ottimale delle forze di pressione che vengono applicate alla struttura impianto-moncone. La distribuzione delle forze avviene in maniera omogenea su:

1. Moncone;
2. Sezione in titanio trasmutata;
3. All'interno della connessione.

FIG. 2 - AUMENTO DEI TESSUTI MOLLI GRAZIE AL PLATFORM SWITCHING

L'utilizzo di componenti platform switching allontana il punto di connessione impianto/abutment dai tessuti perimplantari e crea un miglior profilo di emergenza. Il concetto di platform switching è stato progettato per favorire l'aumento di volume dei tessuti molli, e per ottenere quindi risultati estetici a lungo termine.


FIG. 2

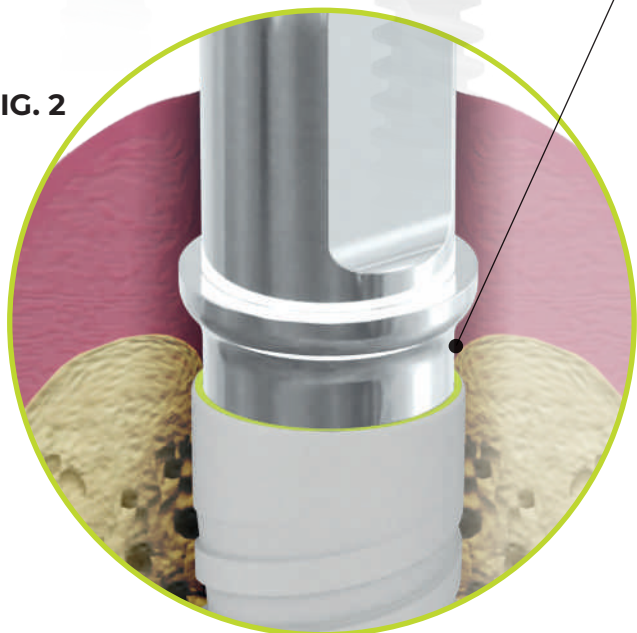

GLI OBIETTIVI DEL PLATFORM SWITCHING:

- Evitare ulteriore perdita d'osso e di tessuti dopo l'applicazione della protesi.
- Preservare la stabilità implantare.

L'effetto platform switching risulta in una buona quantità di fibre sopracrestali e l'ulteriore vantaggio di preservare l'osso sottostante.

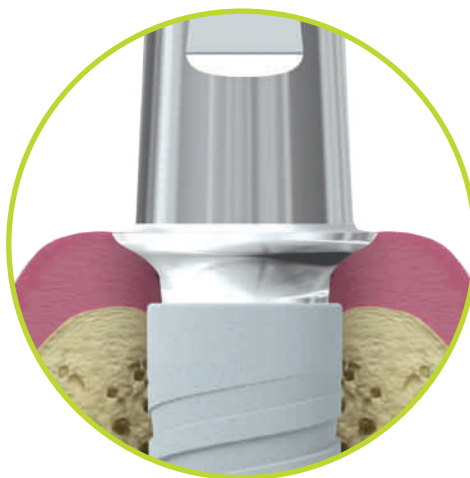

CONSERVAZIONE DELL'OSSO CRESTALE MIGLIORATA

Gli effetti positivi del platform switching sono stati descritti in numerosi studi nel corso degli anni e rappresentano un concetto comunemente accettato. Una meta-analisi pubblicata da M.A. Atieh et al. conclude che: "La perdita di osso marginale intorno agli impianti con platform switching è stata minore di quella che si verifica intorno agli impianti senza platform switching".

Componenti Protesi Cementata

MONCONE PROVVISORIO

I monconi provvisori sono progettati in quanto facilmente personalizzabili sia dal medico sia in laboratorio da un tecnico.

I monconi non rotanti sono utilizzati per:

- Corone provvisorie avvitate e cementate;
- Ponti provvisori cementati.

I monconi rotanti sono utilizzati per:

- Ponti provvisori avvitati;
- Ponti provvisori cementati.

NOTA

Posizionare i restauri provvisori in sottoocclusione. I monconi provvisori possono essere collegati verticalmente per non più di 6 mm con strumenti e tecniche standard.

I dispositivi sono forniti non sterili e sono monouso.

Gli abutment possono essere sterilizzati in autoclave.



MONCONE PROVVISORIO

NON ROTANTE

H 1.5 mm - P.E. 3.8 **1003**

H 1.5 mm - P.E. 4.5 **1112**

TI5 - Titanio Grado 5



MONCONE PROVVISORIO

ROTANTE

H 1.5 mm - P.E. 3.8 **1004**

H 1.5 mm - P.E. 4.5 **1113**

TI5 - Titanio Grado 5



CANNULA CALCINABILE **2157**

PMMA - Polimetilmetacrilato

Confezione 5pz



VITE PRIMARIA

TI5 - Titanio Grado 5

1034



Componenti Protesi Cementata

MONCONE PER STRUTTURE MULTIPLE

Queste cannule sono progettate per soddisfare le esigenze relative alla fase protesica provvisoria avvitata.

La destinazione di questi componenti è dedicata all'uso nei casi di strutture multiple avvitata e grazie all'elevata lunghezza e alla loro morfologia ritentiva forniscono un'ottima base per qualsiasi tecnica di saldatura.

Sono disponibili in titanio e acciaio e rendono possibile la realizzazione di protesi avvitata mediante varie tecniche:

- incollaggio
- saldatura
- sovrافusione



MONCONE SALDATURA TITANIO

Rotante

1139

Ti5 - Titanio Grado 5




MONCONE SALDATURA ACCIAIO

Rotante

1140

A - Acciaio Inox

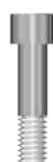

VITE PRIMARIA

1034

Ti5 - Titanio Grado 5



Componenti Protesi Cementata

MONCONE PROVVISORIO

“AVVITAMENTO DIRETTO” *Easy*

Il moncone provvisorio per avvitamento diretto è stato progettato per una funzione immediata evitando la procedura di “seconda fase”.

Un notevole risparmio di tempo per il medico e per il paziente.

Gli abutment esagonali Easy-Exa® sono utilizzati per:

- Corone provvisorie cementate immediate.

Gli abutment esagonali Easy-Conical® sono utilizzati per:

- Ponti temporanei immediati.

NOTA

Tutti i monconi sono progettati per una funzione immediata. Sono accompagnati da un cilindro in plastica per supportare e velocizzare la procedura protesica.

I dispositivi sono forniti non sterili e sono monouso. Gli abutment possono essere sterilizzati in autoclave.



MONCONE “PER SINGOLO”

+ CALCINABILE

H 1.5 mm - P.E. 4.0 **1114**

H 3.0 mm - P.E. 4.0 **1115**

CALCINABILE* **1119**

Ti5 - Titanio Grado 5

* POM - Poliossimetilene

* Confezione 5 Pz.



MONCONE “PER PONTI”

+ CALCINABILE

H 0.5 mm - P.E. 4.0 **1116**

H 1.5 mm - P.E. 4.0 **1117**

H 3.0 mm - P.E. 4.0 **1118**

CALCINABILE* **1120**

Ti5 - Titanio Grado 5

* POM - Poliossimetilene

* Confezione 5 Pz.



Componenti Protesi Cementata

MONCONE DRITTO



I monconi dritti IDC® sono componenti in titanio che vengono fissati all'impianto tramite viti protesiche, creando così un ancoraggio protesico.

UTILIZZO

- Protesi cementata

CARATTERISTICHE

- Estrema semplicità di utilizzo e personalizzazione;
- Possibilità di correggere disparallelismi fino a 15°;
- Particolarmente adatto per realizzare corone doppie o telescopiche;
- Forma cilindrica simile al profilo di emergenza di un dente naturale;
- Alto livello di sicurezza.



MONCONE DRITTO

P.E. 3.8 NN	1031
P.E. 4.5 RN	1011
P.E. 5.5 WN	1012
P.E. 6.5 XL	1141

TI5 - Titanio Grado 5



VITE PRIMARIA

TI5 - Titanio Grado 5

1034



Componenti Protesi Cementata

MONCONE ESTETICO

I monconi anatomici IDC® sono componenti in titanio che vengono fissati all'impianto tramite viti protesiche, creando così un ancoraggio protesico.

UTILIZZO

- Protesi cementata.

CARATTERISTICHE

- Estrema semplicità di utilizzo e personalizzazione;
- Adattamento al contorno naturale dei tessuti dovuto alle diverse altezze e larghezze dei margini disponibili;
- Collegamento Connessa.

NOTA

Non indicato per rivestimenti ceramici diretti. La corretta stabilità del moncone viene preservata mantenendo un'altezza minima di 3 mm sopra il margine della mucosa.

Il limite del cemento non deve essere superiore a 2 mm al di sotto della mucosa. Si consiglia di utilizzare una nuova vite per l'inserimento definitivo del moncone.



MONCONE ESTETICO - P.E. 4.5

H 1.0 mm	1125
H 2.0 mm	1126
H 3.5 mm	1127

Ti5 - Titanio Grado 5



MONCONE ESTETICO - P.E. 5.5

H 1.0 mm	1159
H 2.0 mm	1160
H 3.5 mm	1144

Ti5 - Titanio Grado 5



MONCONE ESTETICO - P.E. 6.5

H 1.0 mm	1145
H 2.0 mm	1146
H 3.5 mm	1158

Ti5 - Titanio Grado 5



VITE PRIMARIA

Ti5 - Titanio Grado 5

1034



Componenti Protesi Cementata

MONCONE ANGOLATO 15°

I monconi anatomici IDC® sono componenti in titanio che vengono fissati all'impianto tramite viti protesiche, creando così un ancoraggio protesico.

UTILIZZO

- Protesi cementata.

CARATTERISTICHE

- Estrema semplicità di utilizzo e personalizzazione;
- Adattamento al contorno naturale dei tessuti dovuto alle diverse altezze e larghezze dei margini disponibili;
- Collegamento Connessa.

NOTA

Non indicato per rivestimenti ceramici diretti. La corretta stabilità del moncone viene preservata mantenendo un'altezza minima di 3 mm sopra il margine della mucosa.

Il limite del cemento non deve essere superiore a 2 mm al di sotto della mucosa. Si consiglia di utilizzare una nuova vite per l'inserimento definitivo del moncone.




MONCONE ANGOLATO 15°

H 2.0 mm - P.E. 4.5 **1013**

H 2.0 mm - P.E. 5.5 **1014**

TI5 - Titanio Grado 5

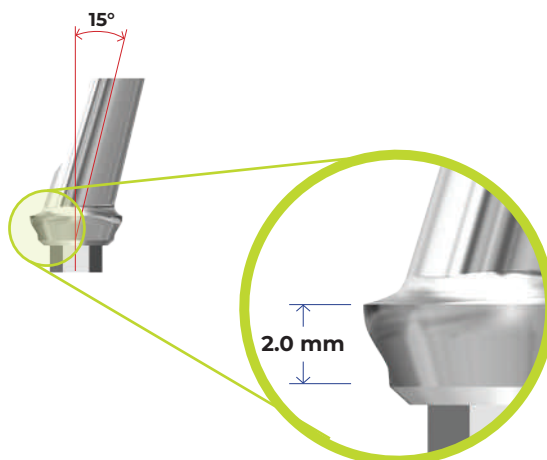


MONCONE ANGOLATO 15°

H 4.0 mm - P.E. 4.5 **1015**

H 4.0 mm - P.E. 5.5 **1016**

TI5 - Titanio Grado 5

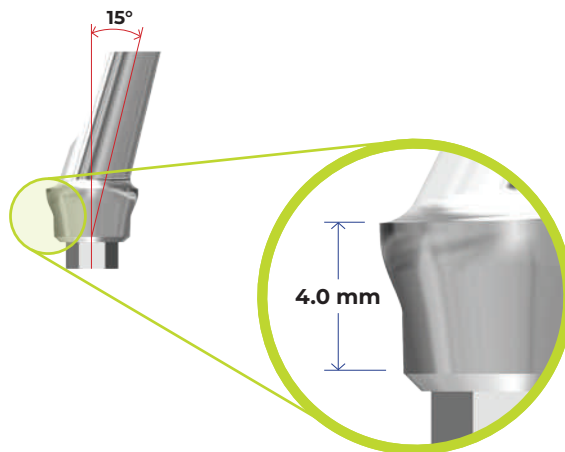

VITE PRIMARIA

TI5 - Titanio Grado 5

1034



Componenti Protesi Cementata


MONCONE ANGOLATO 25°

MONCONE ANGOLATO 25°

H 2.0 mm - P.E. 4.5 **1017**

H 2.0 mm - P.E. 5.5 **1018**

TI5 - Titanio Grado 5

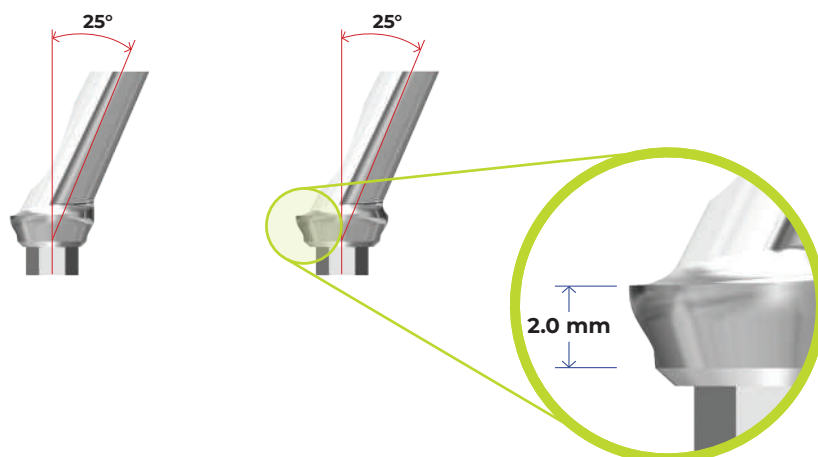


MONCONE ANGOLATO 25°

H 4.0 mm - P.E. 4.5 **1019**

H 4.0 mm - P.E. 5.5 **1020**

TI5 - Titanio Grado 5

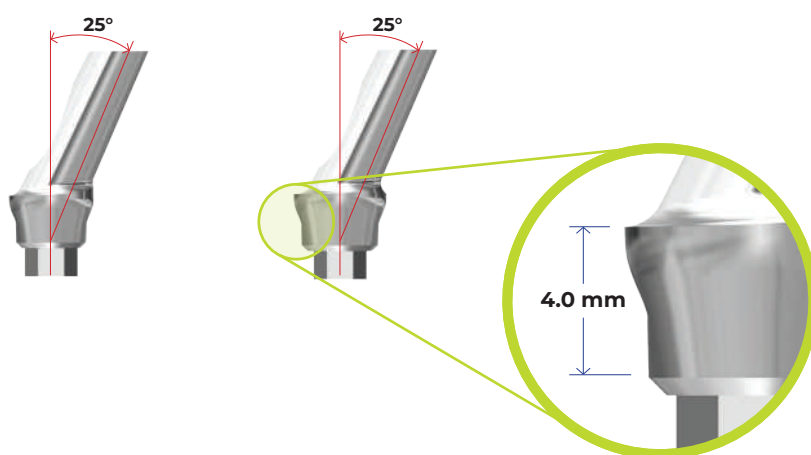

VITE PRIMARIA

TI5 - Titanio Grado 5

1034



Componenti Protesi Cementata

MONCONE PERSONALIZZATO

COMBY CHROME

Il moncone Comby Chrome di IDC® - Implant & Dental Company è una soluzione universale di facile processo per i restauri supportati da impianti.

Si compone di una base in cromo cobalto (base in lega senza nichel), un manicotto di modellazione plastica e una vite di fissaggio.


Il moncone Comby Chrome di IDC® offre una soluzione conveniente per monconi a base di leghe auree con una straordinaria flessibilità sia per il tecnico che per il modellatore grazie al suo profilo di emergenza gengivale adattabile secondo le esigenze individuali.

Sia per progetti di protesi cementata che per ricostruzioni avvitate, Comby Chrome® consente restauri protesici, anche in casi in cui non è possibile utilizzare monconi standard fresabili, in casi dove è troppo profondo il tragitto tras mucoso e nel caso di forti disparallelismi.

La cera da modellazione aderisce facilmente al manicotto di modellazione plastica.



MAGNUM SOLARE

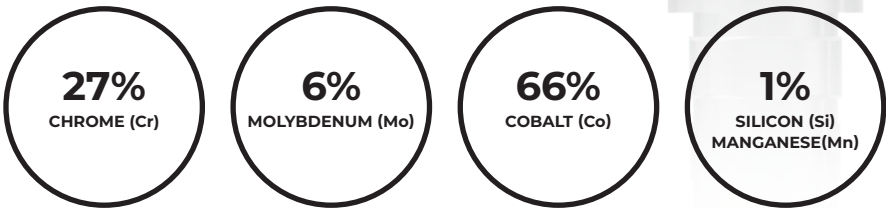

CE 0123 ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 22674

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Temperatura di solidus-liquidus	1307 ÷ 1417 °C
Coefficiente di espansione termica	(25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1
Punto di fusione	1470 °C
Densità	8,4 g/cm3
Durezza Vickers	255 HV10
Allungamento percentuale a rottura	11 %
Carico unitario di snervamento	(Rp0.2) 395 MPa
Modulo di elasticità	233 GPa
Massima temperatura di cottura	980°C
Colore	Bianco

La fusione con leghe vili, meno predicibile rispetto a quella con leghe nobili, aumenta la difficoltà di mantenere la precisione a livello della connessione protesica perché oltre ai fattori di intimo contatto tra le leghe e resistenza meccanica subentrano anche problematiche di fenomeni corrosivi, ben noti agli odontotecnici.

Poiché queste leghe durante il loro riscaldamento si ossidano, è necessario avere ulteriori accorgimenti durante la preparazione dei modellati, durante la procedura di messa in rivestimento e fusione per evitare complicanze non solo di tipo meccanico, ma anche biologico.



L'inserimento del cilindro in resina sul moncone Comby Chrome facilita la modellazione del tragitto della vite protesica. Posizionare il moncone nel modello master assicurandosi che l'abutment sia correttamente ingaggiato prima di serrare la vite di fissaggio.

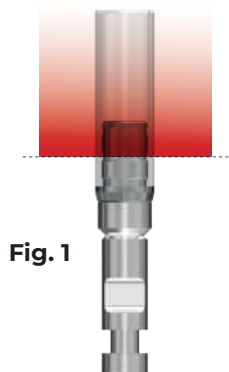


Fig. 1

AREA TAGLIO

A seconda delle circostanze individuali, la cannula di modellazione plastica può essere tagliato in conformità con i requisiti individuali di modellazione (Fig. 1).

Ricostruire la forma ottimale della battuta con la cera da modellazione usuale. Riempire con cura la parte della zona antirotazionale sopra la spalla del pilastro con la cera di modellazione. Assicurarsi che la zona antirotazionale sopra la spalla sia completamente rivestita con uno strato uniforme di cera per modellare (vedi dettaglio 2).

Addensare la cera per evitare bolle sulla zona di connessione metallo. La modellazione sul pilastro deve essere sufficientemente spessa (uno strato di cera di almeno 0,7 mm). Durante la modellazione, utilizzare sempre una mascherina gengivale per garantire che il profilo di emergenza della corona sia ottimamente sagomato (Fig. 2).

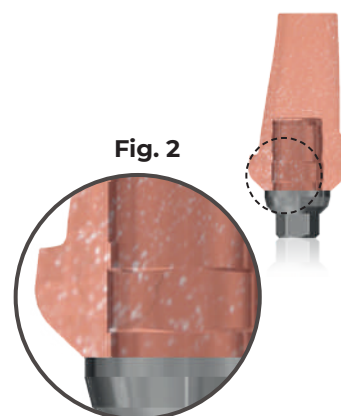


Fig. 2

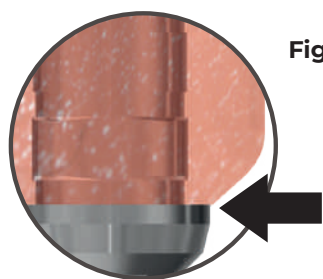


Fig. 3

Assicurarsi che non vi sia cera sul margine del bordo circolare della base di battuta per evitare la fuoriuscita della lega di sovrافusione (Fig. 3) Rivestire il componente modellato nel modo consueto con materiali di alta qualità di rivestimento.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Effettuare la smuffolatura delicatamente con gli ultrasuoni, getto d'acqua, decapaggio o pennello in fibra di vetro.

Per rimuovere lo strato di ossido usare perle di uso di vetro (50 micron / 2 ~ 4 bar).

Non sabbare la connessione del moncone, al fine di evitare danneggiamenti all'abutment.

Utilizzare una nuova vite di riscontro per l'inserimento definitivo della componente secondaria. Stringere la vite primaria con l'aiuto di una chiave dinamometrica calibrata rispettando le raccomandazioni concernenti la coppia di serraggio.

Utilizzare il cacciavite originale fornito.

CONTRAINDICAZIONI

è consigliato non inclinare l'abutment oltre 30 gradi, su impianti con diametro inferiore a 4 mm e destinati alla regione posteriore.

Viti in dotazione

VANTAGGI

I Monconi Comby Chrome® sono forniti con vite "standard" in dotazione. A richiesta del cliente, la vite "standard" può essere sostituita con vite D.I.S. Torx o Esagono.



**I Monconi Comby Chrome®
sono disponibili per modellazione Cad-Cam
e sono compatibile con librerie:**





MONCONE PERSONALIZZATO COMBY CHROME

Rotante	1046
Non Rotante	1047
Cr.Co - Lega Cromo Cobalto	
PMMA - Polimetilmetacrilato	



VITE PRIMARIA

1034

Ti5 - Titanio Grado 5



VITE D.I.S.

Dinamic Inclinated Screw

D.I.S. Esagono 1142

D.I.S. Torx 1165



Componenti Protesi Cementata MONCONE CALCINABILE


Si connettono direttamente all'impianto con l'apposita vite e sono realizzati in PMMA, una resina che non lascia nessun residuo durante le operazioni di fusione. I monconi calcinabili IDC® sono ideali per ottenere soluzioni estetiche valide, rispettando la forma anatomica del profilo emergente del dente. Con questi componenti è inoltre possibile correggere angolazioni e disparallelismi durante la lavorazione del manufatto.

ATTENZIONE per il laboratorio: Prima della fusione, non serrare le cannule interamente calcinabili sui modelli a un torque maggiore di 8-10 Ncm, poichè i polimeri hanno una resistenza inferiore al metallo.



MONCONE CALCINABILE

Rotante	1005
Non Rotante	1006
PMMA - Polimetilmetacrilato	

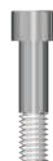

VITE PRIMARIA

1034

Ti5 - Titanio Grado 5



COMBY CHROME 360

Esistono situazioni in cui l'asse lungo dell'impianto risulta una posizione sfavorevole del foro di accesso della vite protesica. Una soluzione potrebbe essere sacrificare la recuperabilità e cementare il foro di accesso o comprometterlo risultati estetici. Con il sistema Comby Chrome 360®, Anteea offre una struttura in PMMA al fine di ottenere una struttura dinamica a 360° con inclinazione max fino a 25°.

Il concetto di vite e cacciavite DIS basato su Torx® appositamente progettato manterrà la capacità di utilizzare tutta la coppia consigliata anche alla massima angolazione. Per facilitare il lavoro protesico utilizzando le tradizionali procedure di fusione, Comby Chrome 360® possono essere utilizzate cannule calcinabili preformate in PMMA.


Vengono consegnati in confezioni multiple da 5 pezzi, sia nella versione diritta che ad angolo con 10° e 20°.

Sono progettati per ottimizzare il posizionamento e il serraggio della vite D.I.S.® con l'apposito driver.



Driver e Vite angolata D.I.S.

I driver per viti Angolate D.I.S. seguono rigorosamente i parametri di progettazione del sistema a sfera Torx®. Torx® ha stabilito lo standard globale in termini di affidabilità: questo assicura una coppia di serraggio ottimale anche al massimo angolo del driver. Le viti D.I.S. infatti, sono progettate e indicate per realizzare sovrastrutture protesiche nel materiale scelto dall'operatore.


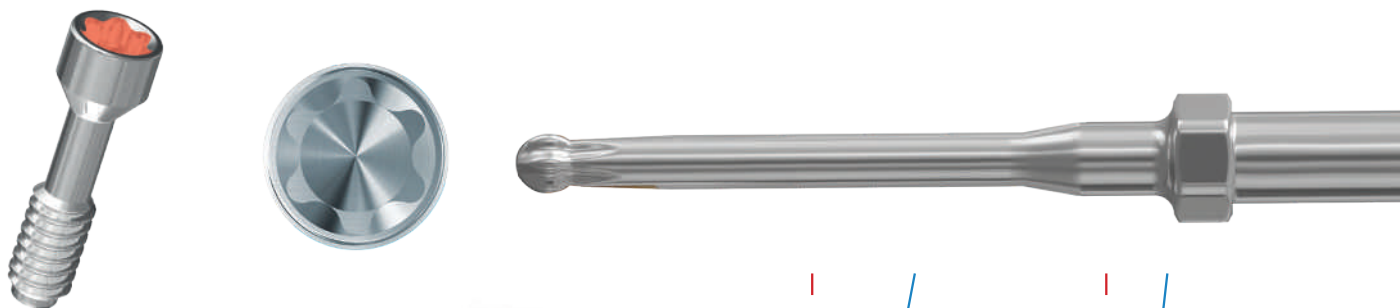


Caratteristiche e vantaggi

Base e cannula realizzate in POM - Polimetilmetacrilato

Fino al 30% di riduzione tempo di progettazione del foro di emergenza all'interno delle librerie per migliorare ulteriormente il flessibilità e risultato estetico

Vite D.I.S. Torx® e driver che consentono di raggiungere 25° di angolazione con pieno controllo della coppia consigliata.

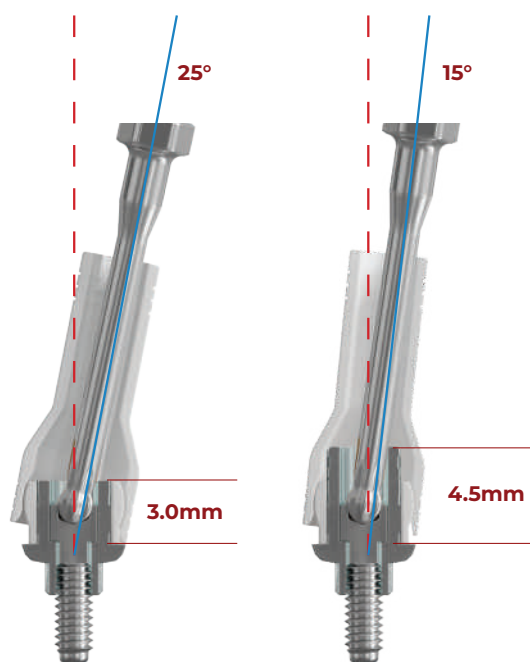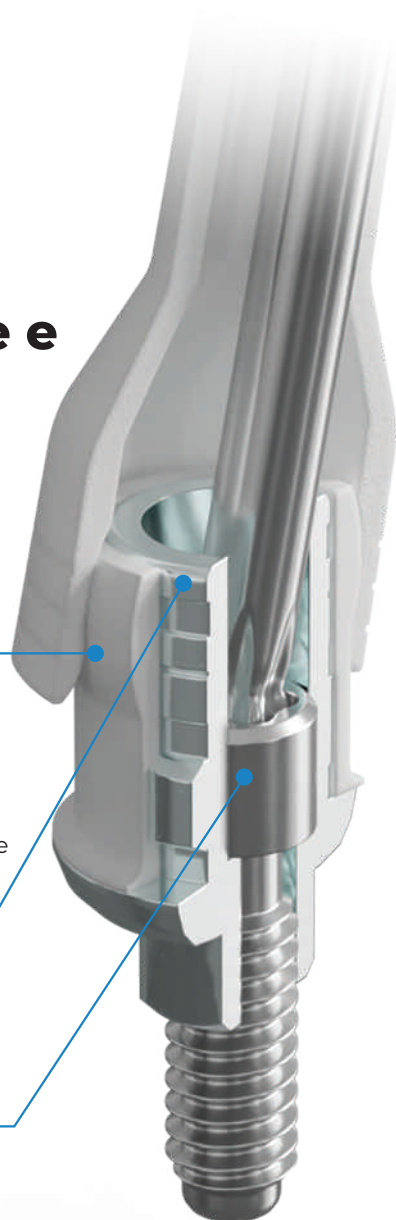

Procedendo con il taglio della base ad un'altezza di 4.5mm si può raggiungere un'inclinazione di 15°. Tagliando ad un'altezza di 3.0mm l'inclinazione può arrivare a 25°.



COMBY CHROME 360°
Cr.Co - Lega Cromo Cobalto

ST1511


DUALSistem

MONCONE PERSONALIZZABILE PER TECNICA DA INCOLLAGGIO

I monconi personalizzabili per per tecnica da incollaggio ANTEEA DualSistem® nascono per dare a chi opera nel settore implantare (Odontoiatra - Odontotecnico - Centri Fresaggio) un sistema completo per la realizzazione di protesi dentali su impianti, con le interfacce di bonding della tecnica di modellazione CAD, manualmente o con la tecnica di fusione a cera persa.

Il prodotto viene venduto con vite e calcinabile, che permette di avere sempre gli spessori programmati per l'incollaggio sia della dima generata dalla scansione del converter, sia con la tecnica della fusione a cera persa. Il sistema DualSistem® consentirà la realizzazione di restauri in Titanio, Zirconia, Laser-Melting (SLM), Ceramica Pressata e tutti i materiali ceramici di nuova generazione.

Il sistema offre un'alternativa economica per corone e ponti in lega a base di metalli nobili, senza rinunciare allo standard di precisione della connessione e alla compatibilità della casa implantare scelta dal cliente.

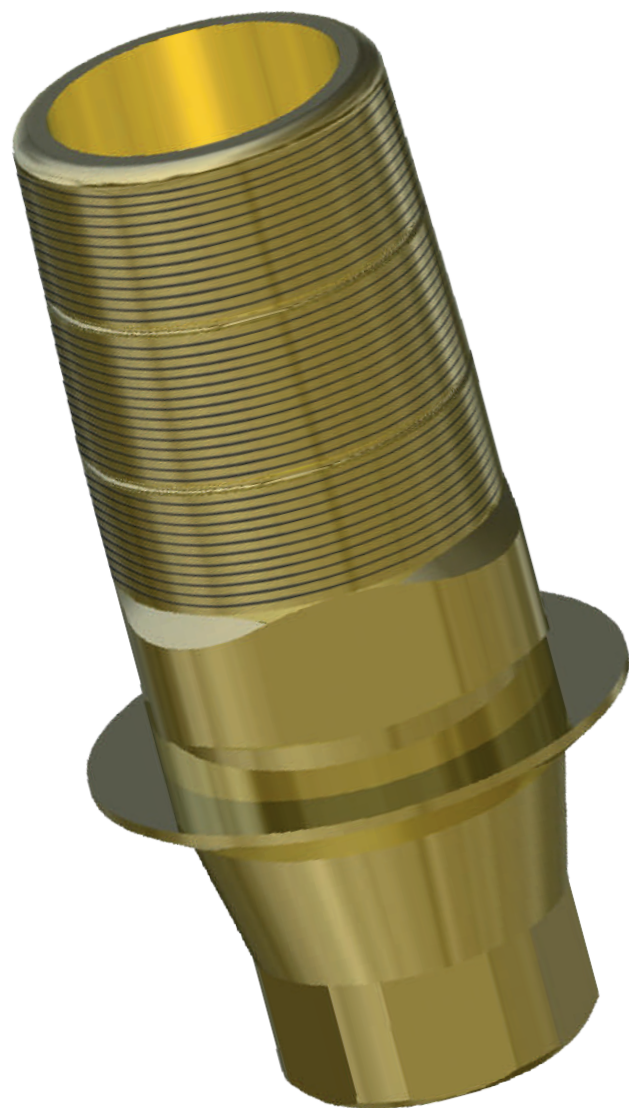

VANTAGGI

- La cannula calcinabile in dotazione consente una semplice modellazione del prodotto protesico
- Varie altezze transmucose disponibili a catalogo
- Struttura modellabile e personalizzabile grazie ai "Cut Marks" gestiti dal software (Fig.1)
- Configurazione personalizzabile su casi protesici che prevedono l'inclinazione della vite attraverso il canale. (Fig. 2-3)

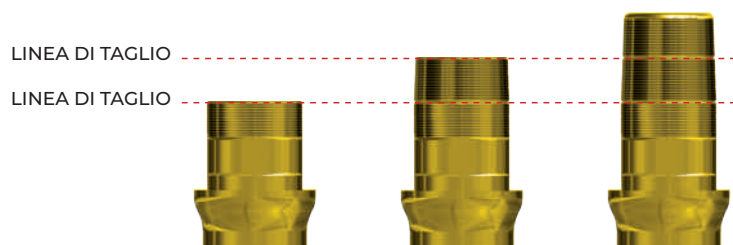


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

DUALSistem TBASE ISTRUZIONI PER TAGLIO

Taglio Lineare

VANTAGGI


Il tecnico può modellare il Tbase Dual Sistem® seguendo le linee "Cut Marks".

Anteea Srl fornisce un supporto completo per casi protesici che prevedono l'inclinazione del canale della vite, in dettaglio:

- Vite e cacciavite dedicati
- Librerie di impianti dedicate



I Base Dual System® vengono forniti ad un'altezza di 6 mm con tacche per il taglio "Cut Marks"

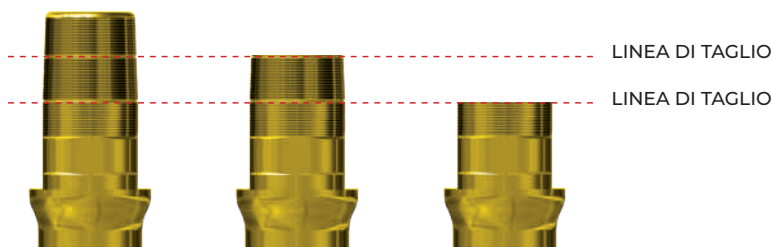

TBase Dual Sistem® tagliato con misure Librerie Anteea Srl


Taglio Personalizzato

VANTAGGI


Il tecnico può modellare liberamente il Tbase Dual Sistem® seguendo sia le linee "Cut Marks" che fresando e adattando il manufatto al percorso inclinato.

Anteea Srl fornisce un supporto completo per casi protesici che comportano l'inclinazione del canale della vite, in dettaglio:

- Vite dedicata (D.I.S. Dinamic Inclinated Screws) e cacciavite specifico dedicato
- Librerie di impianti dedicate

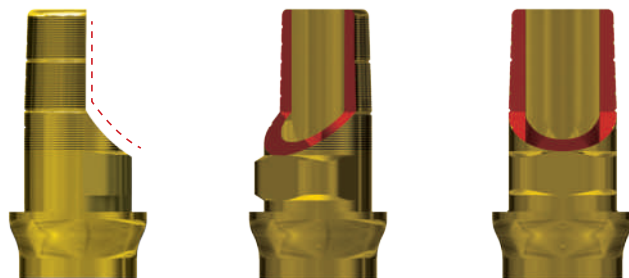

Il Base Dual System® può essere tagliato a mano libera dal tecnico, seguendo la forma del prodotto

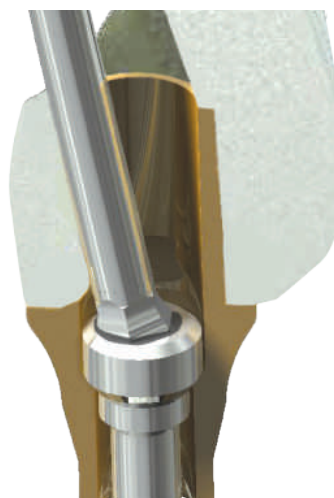

Viti in dotazione

VANTAGGI

I Monconi Dual Sistem® sono forniti con vite "standard" in dotazione. A richiesta del cliente, la vite "standard" può essere sostituita con vite D.I.S. Torx.



I Monconi Dual Sistem® sono disponibili per modellazione Cad-Cam e sono compatibile con librerie:





DUALSistem

MONCONE PERSONALIZZATO ROTANTE

H 0.5 mm	1040
H 1.5 mm	1041
H 2.5 mm	1042

TI5 - Titanio Grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici DUAL SYSTEM riceverete:
vite D.I.S. Testa esagonale

Aggiungendo la lettera **t** ai codici DUAL SYSTEM riceverete:
vite D.I.S. Testa torx



CANNULA CALCINABILE*

Rotante **1256**

PMMA - Polimetilmetacrilato

***Confezione 5pz**



DUALSistem

MONCONE PERSONALIZZATO NON ROTANTE

H 0.5 mm	1043
H 1.5 mm	1044
H 2.5 mm	1045

TI5 - Titanio Grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici DUAL SYSTEM riceverete:
vite D.I.S. Testa esagonale

Aggiungendo la lettera **t** ai codici DUAL SYSTEM riceverete:
vite D.I.S. Testa torx



CANNULA CALCINABILE*

Non Rotante **1257**

PMMA - Polimetilmetacrilato

***Confezione 5pz**



SCANBODY DUAL

NARROW Rotante **SCAN N-R**

NARROW Non Rotante **SCAN N**

PEEK - Polietereeterchetone



VITE PRIMARIA

1034

TI5 - Titanio Grado 5



VITE D.I.S.

Dynamic Inclined Screw


D.I.S. Esagono **1142**

D.I.S. Torx **1165**



SHAPER



Regolatore di forma

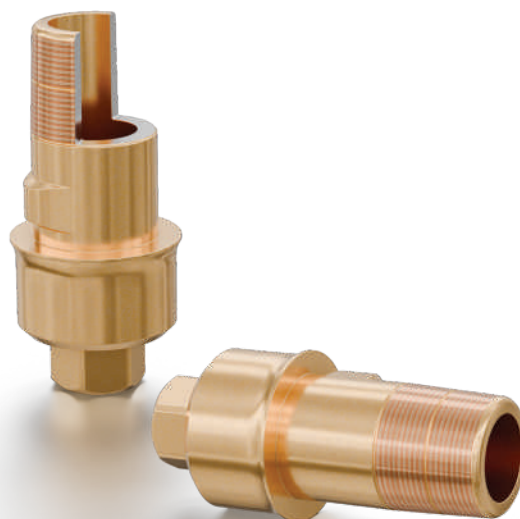

Scegliere un TiBase adatto per ciascun caso clinico e per il ripristino, è essenziale per un successo a lungo termine: Shaper è il regolatore di taglio modulare che offre la possibilità di personalizzare i TiBase Dual Sistem Anteea in modo semplice e preciso.

TIBASE DUAL SISTEM

I TiBase Dual Sistem Anteea nascono con la possibilità di essere tagliati e conformati in base alle caratteristiche del manufatto che il tecnico dovrà preparare. Le due linee di taglio posizionate a 30 e 45mm sono preformate e danno un indice preciso. Le microscanalature sulla superficie consentono di avere un miglior grip sui materiali compositi.

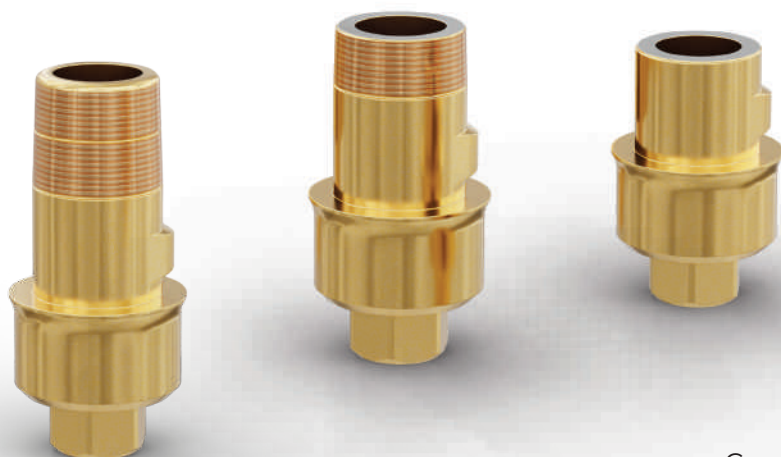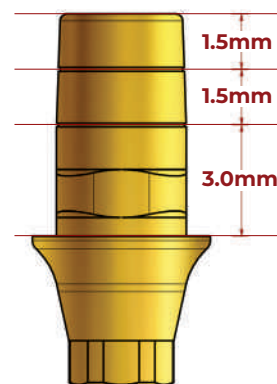

DESIGN - CARATTERISTICHE


Disponibile in tre differenti geometrie Shaper 90°. Shaper45 e Shaper30 questo consente una personalizzazione completa del TiBase Dual sistem e un estremo controllo in fase di taglio.

+ Una volta inserito il TiBase Dual Sistem all'interno del regolatore scelto, il perno blocca i movimenti del Dual Sistem e consente un taglio preciso.



Corpo in Ottone

Superfici lisce
"cutting edge"

Perno in acciaio
bloccaggio a vite

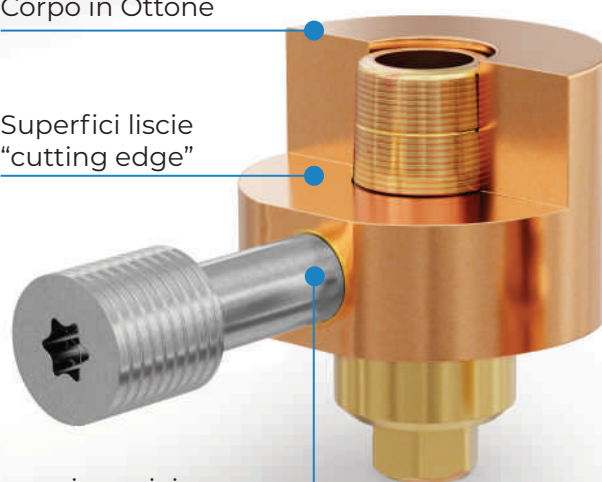



SHAPER90

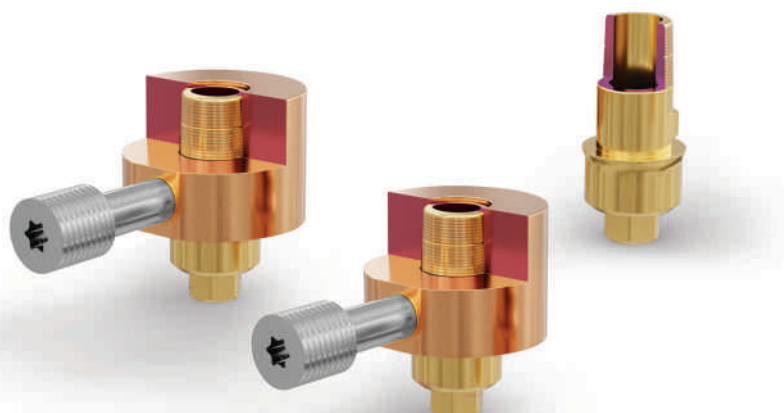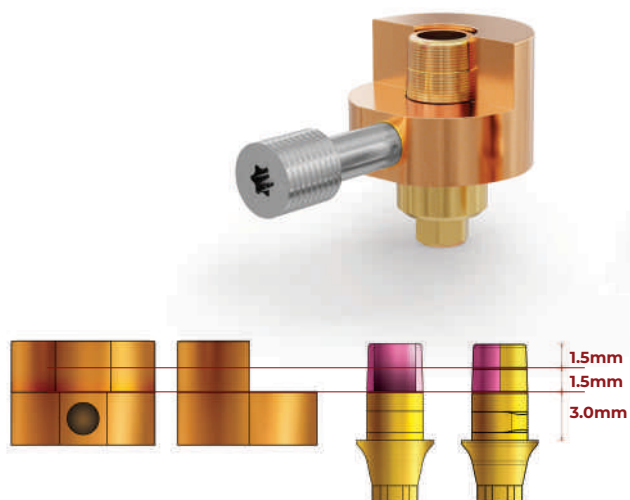

Shaper90 consente di effettuare sui TiBase Dual Sistem Anteea tagli ortogonali in sicurezza e con assoluta precisione. La sua geometria permette di operare su TiBase "pretagliati" con altezza 3.0mm, 4.5mm e 6.0mm

SHAPER 90 NARROW	ST1323
SHAPER 90 REGULAR	ST1324
SHAPER 90 WIDE	ST1325



SHAPER45

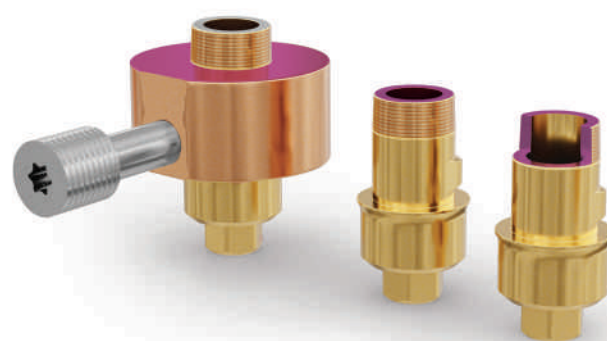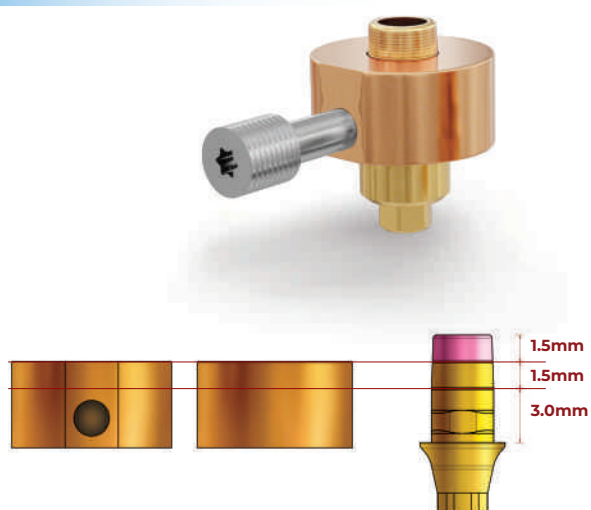

Shaper45 consente di effettuare tagli sui TiBase Dual Sistem Anteea tagli ortogonali in sicurezza e con assoluta precisione con altezza 4.5mm.

SHAPER 45 NARROW	ST1327
SHAPER 45 REGULAR	ST1329
SHAPER 45 WIDE	ST1331

SHAPER30

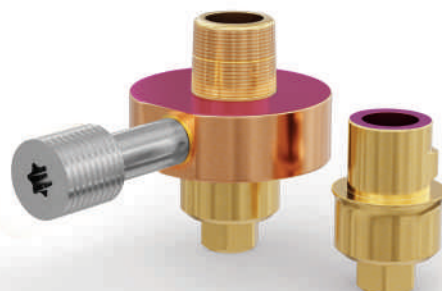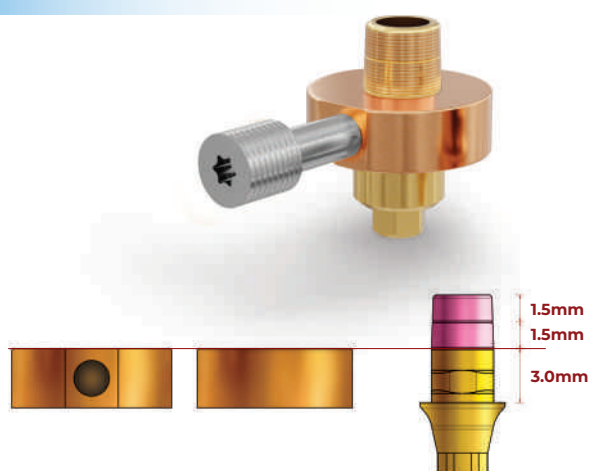

Shaper30 consente di effettuare tagli sui TiBase Dual Sistem Anteea tagli ortogonali in sicurezza e con assoluta precisione con altezza 3.0mm.

SHAPER 30 NARROW	ST1326
SHAPER 30 REGULAR	ST1328
SHAPER 30 WIDE	ST1330

DUALSistem360

Esistono situazioni in cui l'asse lungo dell'impianto risulta una posizione sfavorevole del foro di accesso della vite protesica. Una soluzione potrebbe essere sacrificare la recuperabilità e cementare il foro di accesso o comprometterlo risultati estetici. Con il sistema Dual Sistem 360®, Anteea offre una struttura in PMMA di ottenere una struttura dinamica a 360° con inclinazione max fino a 25°.

Il concetto di vite e cacciavite DIS basato su Torx® appositamente progettato manterrà la capacità di utilizzare tutta la coppia consigliata anche alla massima angolazione. Per facilitare il lavoro protesico utilizzando le tradizionali procedure di fusione, Dual Sistem 360® possono essere utilizzate cannule calcinabili preformate in PMMA.


Vengono consegnati in confezioni multiple da 5 pezzi, sia nella versione diritta che pr ad angolo con 10° e 20°.

Sono progettati per ottimizzare il posizionamento e il serraggio della vite D.I.S.® con l'apposito driver.



Driver e Vite angolata D.I.S.

I driver per viti Angolate D.I.S. seguono rigorosamente i parametri di progettazione del sistema a sfera Torx®. Torx® ha stabilito lo standard globale in termini di affidabilità: questo assicura una coppia di serraggio ottimale anche al massimo angolo del driver. Le viti D.I.S. infatti, sono progettate e indicate per realizzare sovrastrutture protesiche nel materiale scelto dall'operatore.


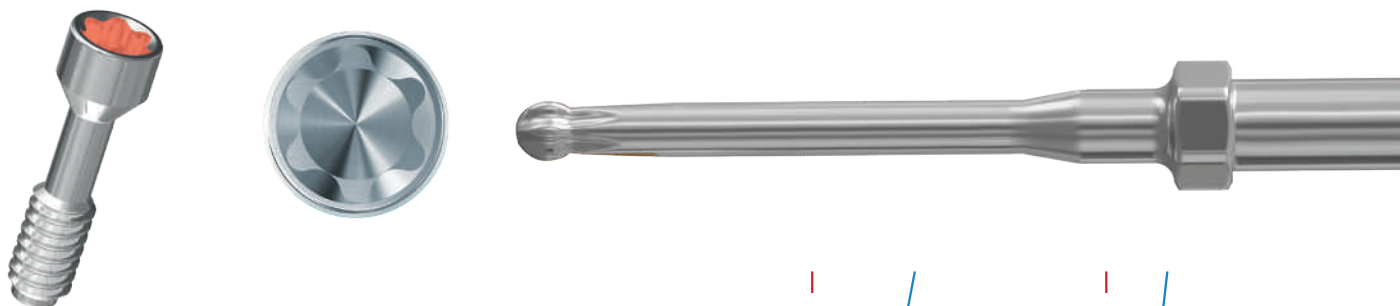


Caratteristiche e vantaggi

Base e cannula realizzate in POM - Polimetilmetacrilato

30% di riduzione tempo di progettazione del foro di emergenza all'interno delle librerie per migliorare ulteriormente la flessibilità e risultato estetico

Vite D.I.S. Torx® e driver che consentono di raggiungere 25° di angolazione con pieno controllo della coppia consigliata.

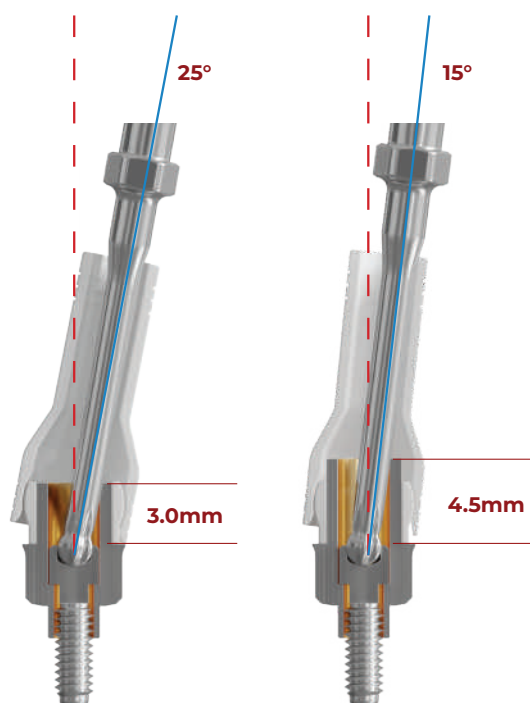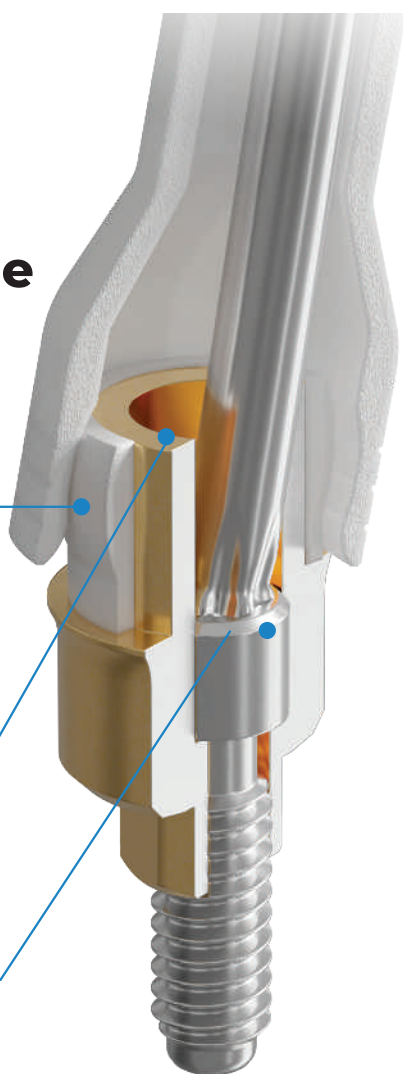

Procedendo con il taglio della base Dual Sistem®, ad un'altezza di 4.5mm si può raggiungere un'inclinazione di 15°. Tagliando ad un'altezza di 3.0mm l'inclinazione può arrivare a 25°.



DUALSistem 360°
PMMA - Polimetilmetacrilato



ST1511

Componenti Protesi Cementata

I.C. INTERFACE CONNECTION

Il sistema I.C. Interface Connection IDC®, è un innovativo “accesso protesico”, progettato per la connessione esagono interno Heli®.

Il concetto è di avere un abutment connesso all'impianto, senza successiva cementazione dello stesso: questo grazie allo speciale adattatore metallico che unisce meccanicamente i due elementi (impianto- abutment) tramite la corretta angolazione della vite di serraggio.

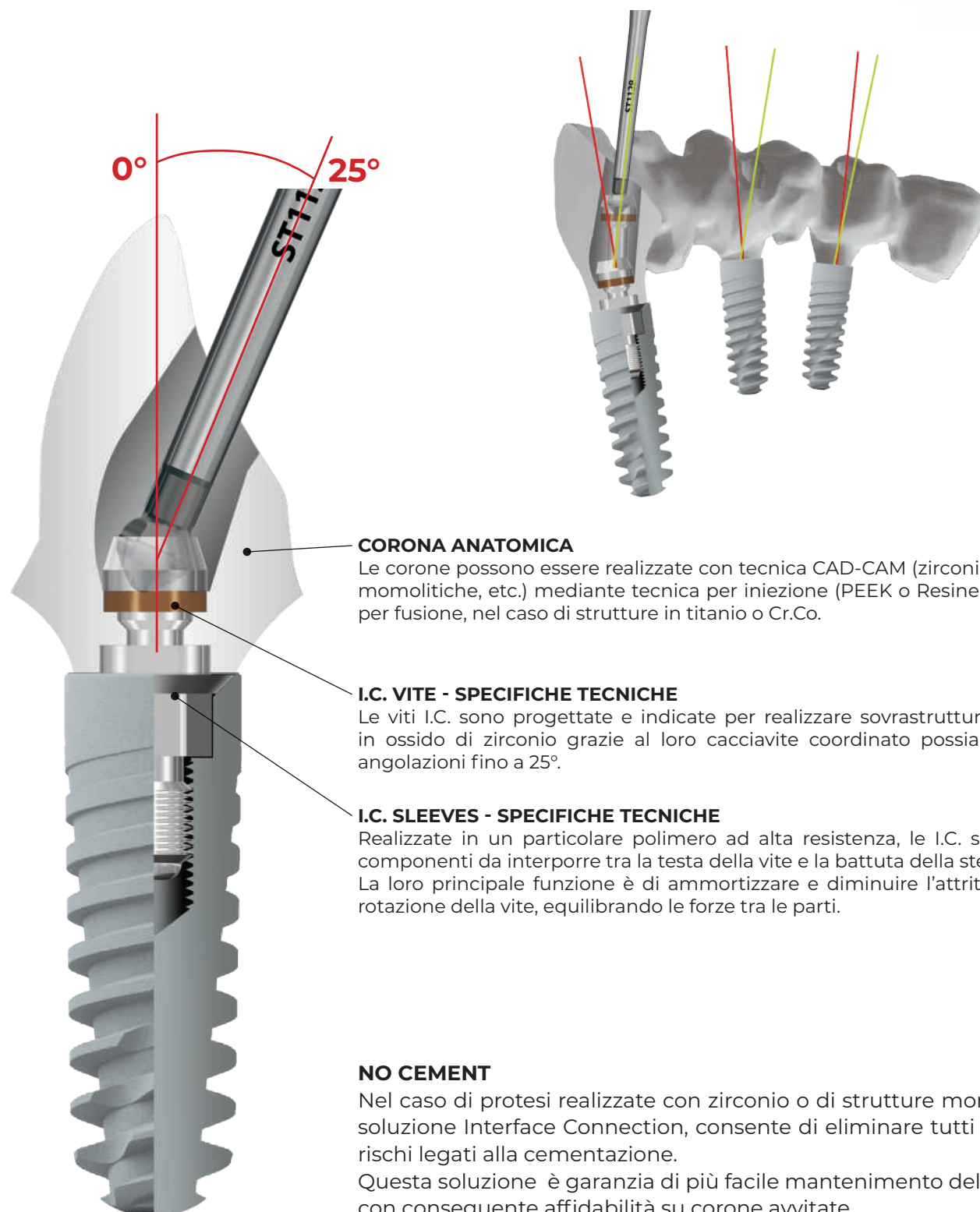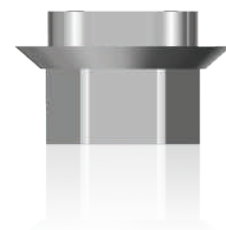

CORONA ANATOMICA

Le corone possono essere realizzate con tecnica CAD-CAM (zirconia, ceramiche momolitiche, etc.) mediante tecnica per iniezione (PEEK o Resine rinforzate) o per fusione, nel caso di strutture in titanio o Cr.Co.

I.C. VITE - SPECIFICHE TECNICHE

Le viti I.C. sono progettate e indicate per realizzare sovrastrutture protesiche in ossido di zirconio grazie al loro cacciavite coordinato possiamo risolvere angolazioni fino a 25°.

I.C. SLEEVES - SPECIFICHE TECNICHE

Realizzate in un particolare polimero ad alta resistenza, le I.C. sleeves, sono componenti da interporre tra la testa della vite e la battuta della stessa.

La loro principale funzione è di ammortizzare e diminuire l'attrito dato dalla rotazione della vite, equilibrando le forze tra le parti.

NO CEMENT

Nel caso di protesi realizzate con zirconio o di strutture monolitiche, la soluzione Interface Connection, consente di eliminare tutti i potenziali rischi legati alla cementazione.

Questa soluzione è garanzia di più facile mantenimento della struttura con conseguente affidabilità su corone avvitate.



I.C. CONNECTION BASE

Rotante	1273
Non Rotante	1274
Ti5 - Titanio Grado 5	

I convertitori I.C. BASE consentono con il loro utilizzo il conseguimento di risultati estetici, garantendo al contempo un'altissima precisione di accoppiamento ed un torque di serraggio invariato rispetto al metallo. Presentano la stessa funzionalità dei tradizionali link(DUAL SISTEM) da incollaggio e sono abbinati ad una vite DIS anodizzata DORATA per foro inclinato da utilizzarsi con relativo cacciavite dedicato. È possibile realizzare abutment individuali ed elementi singoli con tecnica avvitata diretta, sia da modello che da file. Presentano un ingaggio TRILOBATO sezionato attivabile che rende non necessario alcun tipo di cementazione.

I convertitori I.C. BASE consentono con il loro utilizzo il conseguimento di risultati estetici, garantendo al contempo un'altissima precisione di accoppiamento ed un torque di serraggio invariato rispetto al metallo.



I.C. CALCINABILE UNIVERSALE

Rotante	1277
Non Rotante	1276
PMMA - Polimetilmetacrilato	

Si connettono direttamente all'impianto con l'apposita vite e sono realizzati in Pom, una resina che non lascia nessun residuo durante le operazioni di fusione. Con questi componenti è inoltre possibile correggere angolazioni e disparallelismi durante la lavorazione del manufatto, prima della realizzazione del manufatto.



I.C. SLEEVE 1275

PEEK - Polietereeterchetone
Confezione da 10 pz

Realizzate in un particolare polimero ad alta resistenza, le I.C. sleeves, sono componenti da interporre tra la testa della vite e la battuta della stessa. La loro principale funzione è di ammortizzare e diminuire l'attrito dato dalla rotazione della vite, equilibrando le forze tra le parti (zirconia e vite).




I.C. VITE

D.I.S. Esa	1143
D.I.S. Torx	1278
Ti5 - Titanio Grado 5	

Le viti I.C. sono progettate e indicate per realizzare sovrastrutture protesiche in ossido di zirconio grazie al loro cacciavite coordinato possiamo risolvere angolazioni fino a 25°.

Disponibili con connessione Esa e Torx.

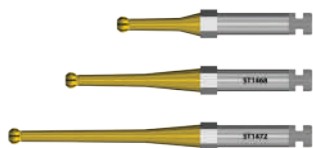

D.I.S. DRIVER TORX

Corto	ST1464
Medio	ST1468
Lungo	ST1472
A - Acciaio Inox	



D.I.S. DRIVER ESA

Corto	ST1127
Medio	ST1128
Lungo	ST1129
A - Acciaio Inox	



IMPUGNATURA STUDIO ST1005

A - Acciaio Inox



ADATTATORE CHIRURGICO CHIAVE DINAMOMETRICA ST1314

A - Acciaio Inox

Il sistema I.C. Interface Connection IDC® è disponibile per modellazione Cad-Cam ed è compatibile con librerie:



Componenti Protesi Cementata

MONCONE I-BASE

Il sistema I-Base IDC®, è compatibile con sistema CEREC®.

La connessione dell' abutment HELI® si può combinare con la geometria di CEREC® T-Base L.

È inoltre possibile produrre abutment personalizzati per modellazione usando il sistema CEREC®.

A. I-Base IDC®, è compatibile con la libreria Zimmer® - ø3.5.

B. Tutti i blocchi (di differente materiale), nel software sistema CEREC® T-Base L., possono essere utilizzati per questo processo.



MONCONE I-BASE

Non Rotante - H 0.5 mm	1152
Non Rotante - H 1.5 mm	1153
Non Rotante - H 2.5 mm	1154

TI5 - Titanio Grado 5



SCANPOST - L

1155

TI5 - Titanio Grado 5



VITE PRIMARIA

1034

TI5 - Titanio Grado 5



VITE D.I.S.

Dinamic Inclinated Screw

D.I.S. Esagono

1142

D.I.S. Torx

1165

TI5 - Titanio Grado 5



Componenti Protesi Cementata

MONCONE PERSONALIZZATO

FOR PRESS

Il sistema ForPress di IDC® dà la possibilità di realizzare manufatti individuali. Con le consuete procedure odontotecniche ed il sistema ad iniezione possono essere realizzati monconi individuali in modo rapido e sicuro. È possibile utilizzare questa tecnica in ogni laboratorio, preparando abutment ed altre soluzioni protesiche personalizzate ed individuali (Figura 1 e 2).

Tutte queste soluzioni protesiche, grazie alla proprietà dei materiali attualmente presenti sul mercato (PEEK) garantiscono una durata a lungo termine ed offrono ai pazienti un maggior comfort, grazie alle proprietà del materiale di assorbire e alleggerire il carico massimo masticatorio.

Il moncone può essere applicato subito dopo l'inserimento implantare come provvisorio, senza essere nuovamente rimosso e preservando il rimodellamento del tessuto gengivale nella zona del solco: la premessa ottimale per la conservazione dell'osso a lungo termine.

UTILIZZO

In pochi minuti, utilizzando le consuete procedure odontotecniche, sulla base in titanio è possibile realizzare l'abutment individuale con la forma più consona alla situazione. La base in titanio IDC è indicata per tutti i tipi di impianto sia Heli che SpeedHex con il platform switching.






Successivamente l'abutment viene realizzato con l'apparecchio ad iniezione for 2 press.



FIG. 1



FIG. 2

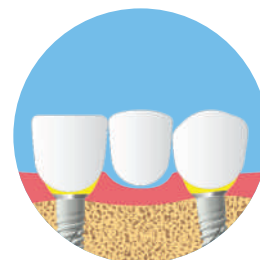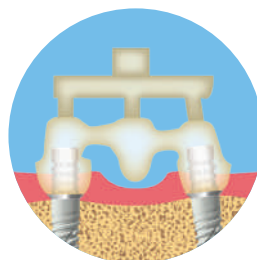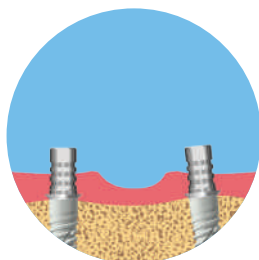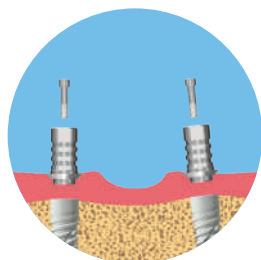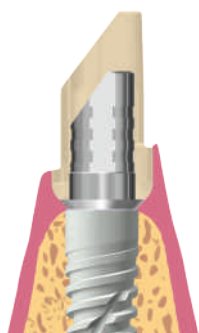

MONCONE FOR PRESS

Rotante	1048
Non Rotante	1049
TI5 - Titanio Grado 5	



VITE PRIMARIA 1034

TI5 - Titanio Grado 5



VITE D.I.S.

Dinamic Inclinated Screw

D.I.S. Esagono 1142

D.I.S. Torx 1165

TI5 - Titanio Grado 5





COMPONENTI **PROTESICI** **M.S.A. MULTI SYSTEM** **ABUTMENT**

Il sistema M.S.A. (Multi System Abutment) IDC®, consente in un solo giorno di procedere all'estrazione e all'inserimento degli impianti ed applicare la protesi provvisoria con un ponte fisso immediato.


In tal modo i pazienti non saranno mai edentuli e avranno sempre una protesi fissa stabile.

La protesi provvisoria, inoltre, garantisce un miglioramento al paziente fin da subito, a livello psicologico, estetico e funzionale.

Componenti Secondarie M.S.A. MULTI SYSTEM ABUTMENT

Un moderno sistema multiprotesico, per realizzare ponti avvitati, barre avvitate e "toronto bridges" ma anche unità singola.


Il perfetto accoppiamento tra impianto e componente secondaria consente la semplificazione delle componenti terziarie per tutti i tipi di impianto. Le angolazioni sono comprese tra 17° e 45°.

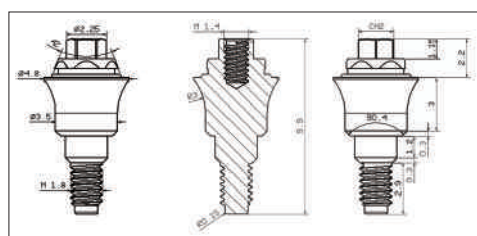

MONCONE M.S.A.

H 1.0 mm	1060
H 2.0 mm	1061
H 3.0 mm	1062
H 4.0 mm	1063
H 5.0 mm	1064


Ti5 - Titanio Grado 5

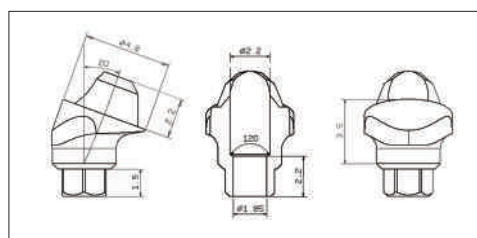

MONCONE M.S.A. 17°

H 2.5 mm	1065
H 3.5 mm	1066
H 4.5 mm	1067


Ti5 - Titanio Grado 5

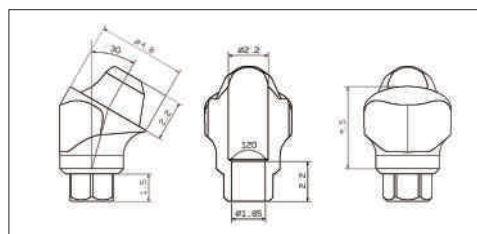

MONCONE M.S.A. 30°

H 3.5 mm	1068
H 4.5 mm	1069
H 5.5 mm	1070

Ti5 - Titanio Grado 5

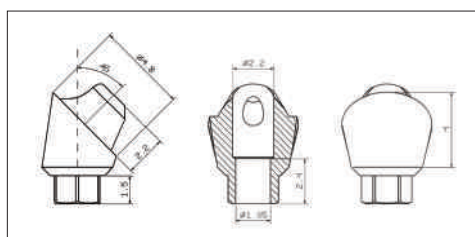

MONCONE M.S.A. 45°

H 4.0 mm	1071
----------	------

Ti5 - Titanio Grado 5




VITE M.S.A.

Ti5 - Titanio Grado 5

1161



Trasportatori Componenti Secondarie M.S.A. MULTI SYSTEM ABUTMENT

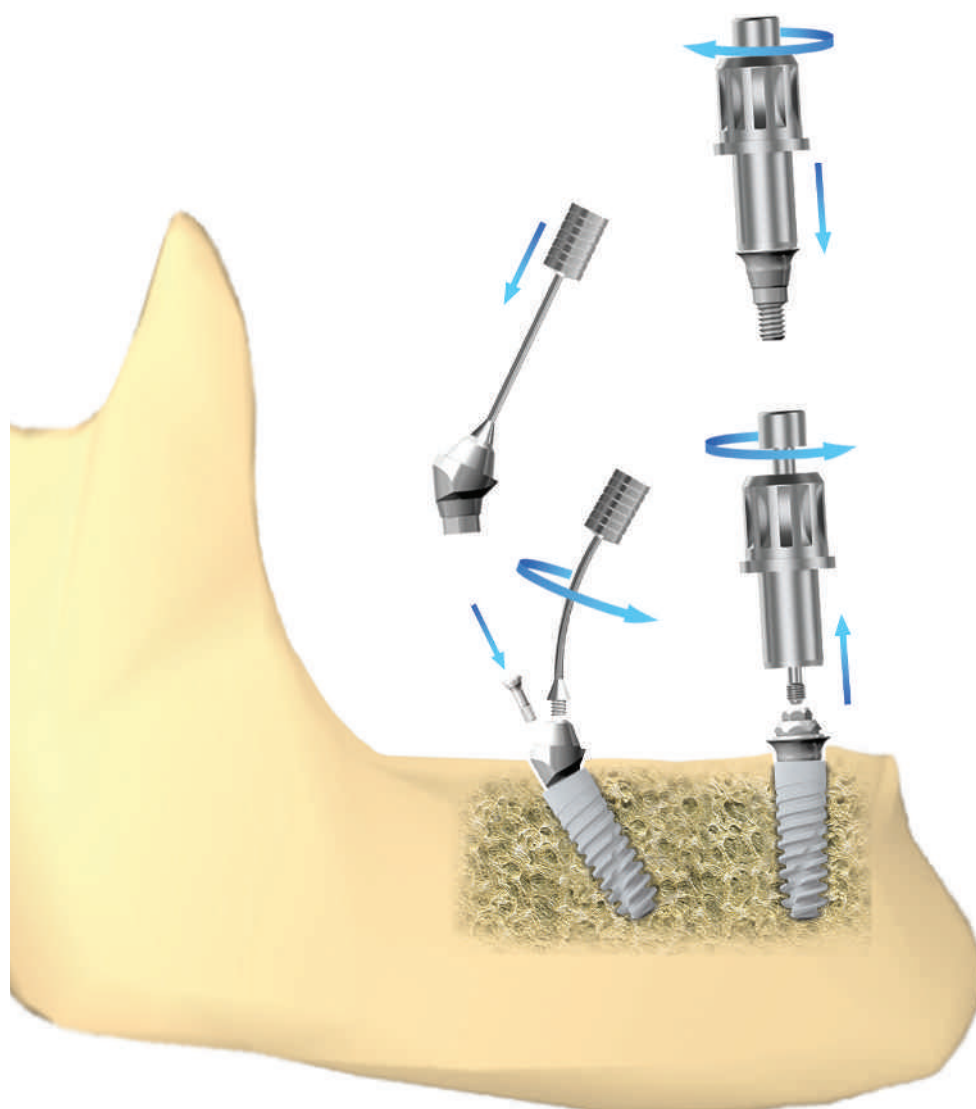

I posizionatori (ST1106-ST1107-ST1210) facilitano il collocamento preciso del componente M.S.A. all'interno del sito implantare.


Il posizionatore per M.S.A. dritto aggancia il componente verticalmente e funge da trasportatore. Il posizionatore per M.S.A. angolato si avvita al foro di inserimento della vite di fissaggio lasciando libero il foro per la vite di aggancio all'implanto.

N.B. I posizionatori sono compresi nella confezione del componente M.S.A scelto



POSIZIONATORE DINAMOMETRICA M.S.A. DRITTO

Lunga **ST1106**
Corta **ST1107**
A - Acciaio Inox

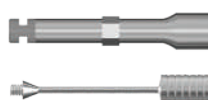

CHIAVE M.S.A.

Contrangolo **ST1001**
Posizionatore **ST1210***
A - Acciaio Inox
*compreso nel moncone m.s.a.

Componenti Protesi

M.S.A. MULTI SYSTEM ABUTMENT

Un moderno sistema multiprotesico, per realizzare ponti avvitati, barre avvitati e "toronto bridges".

La varietà, la precisione e la duttilità dei componenti protesici avvitati IDC®, permette di correggere in maniera semplice, immediata ed efficace, il disparallelismo tra i vari impianti per un inserimento senza tensioni (passive-fit) della protesi.



COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



A.D.M.
ANALOGO DIGITAL MODEL M.S.A. 2212
A - Acciaio Inox

Analogo A.D.M. per abutment M.S.A. in Acciaio per modellazione Cad-Cam compatibile con librerie:



A.D.M.
ANALOGO DIGITAL MODEL M.S.A. 1270
A - Acciaio Inox

Analogo Analogico per abutment M.S.A. in Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY M.S.A. 1073
VITE TRANSFER M.S.A. 1036
T15 - Titanio Grado 5

Transfer pick-up in titanio grado 5 per moncone M.S.A. rotante.

Vite per transfer inclusa (cod. 1073), adatta alla presa d'impronta con cucchiaino individuale aperto.



TRANSFER CLOSED TRAY M.S.A. 1164
T15 - Titanio Grado 5
COPERTURA IMPRESSIONE
CLOSED TRAY M.S.A. 1268
PMMA - Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

Transfer closed tray M.S.A. in titanio grado 5 per moncone M.S.A. rotante.

Vite per transfer inclusa, adatta alla presa d'impronta con cucchiaino individuale chiuso corredato dalla cappetta da impronta (1268)



VITE COPERTURA M.S.A. 1077
T15 - Titanio Grado 5

Vite protezione M.S.A. in titanio grado 5, progettato per proteggere la connessione dell'impianto dalla ricrescita della mucosa.



ANALOGO PROTEZIONE M.S.A. 1080
A - Acciaio Inox
Confezione 5pz

Analogo protezione per abutment M.S.A. in acciaio. Protegge la connessione dell'abutment, del ponte implantare o della barra implantare, mentre vengono lucidati dal clinico o dal laboratorio. Torque serraggio 8-10 Ncm.

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM M.S.A. H4.0mm	1076
DUAL SISTEM M.S.A. H9.0mm	1279
DUAL SISTEM M.S.A. NON ROTANTE H9.0mm	1280

TI5 - Titanio Grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**

Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE PASSIVAZIONE H4.0mm	1258
CALCINABILE PASSIVAZIONE H9.0mm	2271

Confezione 5pz

POM - Polimetilmetacrilato



CANNULA 360° CALCINABILE M.S.A. DUAL SISTEM	ST 1594
--	----------------

POM - Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**

DUALSistem

Moncone personalizzabile in titanio grado 5, per abutment M.S.A.

Sono ideali per la realizzazione mediante tecnica di incollaggio, di ponti o barre formati da più elementi.

La superficie esterna, di forma conica, facilita notevolmente l'inserimento e la passivazione del restauro in bocca.

N.B. Sono disponibili librerie coordinate per progettazione Cad- Cam

I Dual Sistem 360° sono pilastri individualizzabili, consentono la libertà di angolazione della protesi fino a 25°, con la possibilità di dislocare il foro per la vite passante in posizione palatale o linguale, evitando così fori vestibolari e consentendo un maggiore spessore vestibolare della ceramica.

La sinergia tra la cilindro calcinabile sulla testa sferica del Dual Sistem integrato con l'uso del cacciavite DIS permette di ingaggiare la testa della vite in presenza di angolazioni accentuate.

COMBY CHROME

Moncone personalizzabile in Cromo Cobalto per monconi M.S.A., rotanti.

Questo componente unisce alla semplicità delle soluzioni calcinabili una base in lega altamente biocompatibile con un elevato indice di resistenza alla corrosione.

I Comby Chrome 360° sono pilastri individualizzabili tramite fusione e sovrافusione, consentono la libertà di angolazione della protesi fino a 25°. Il beneficio primario di questa tecnologia consiste nella possibilità di dislocare il foro per la vite passante in posizione palatale o linguale, evitando così fori vestibolari e consentendo un maggiore spessore vestibolare della ceramica.

Questo è reso possibile dalla sinergia tra la cilindro calcinabile sulla testa sferica del Combi Chrome, e con il cacciavite DIS dal particolare design permette di ingaggiare la testa della vite in presenza di angolazioni accentuate.



MONCONE PERSONALIZZABILE COMBY CHROME M.S.A.	1078
---	-------------

Cr.Co. - Lega di Cromo Cobalto



CANNULA 360° CALCINABILE M.S.A. COMBY CHROME	ST 1594
---	----------------

POM - Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



MONCONE CALCINABILE M.S.A.	1075
-----------------------------------	-------------

POM - Polimetilmetacrilato



FULL 360° CALCINABILE M.S.A.	1290
-------------------------------------	-------------

POM - Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**

Moncone calcinabile in PMMA per abutment M.S.A., rotanti. Il torque raccomandato per serrare tutte le sovrastrutture ottenute per fusione agli abutment è di 20-25 Ncm.

La cannula calcinabile integrale 360°, consente la libertà di angolazione della protesi fino a 25°. è possibile così dislocare il foro per la vite passante in posizione palatale o linguale, evitando così fori vestibolari e consentendo un maggiore spessore vestibolare della ceramica.

N.B. Si faccia però attenzione in laboratorio, prima della fusione, a non serrare le cannule interamente calcinabili sui modelli a un torque maggiore di 8-10 Ncm, poiché i polimeri hanno una resistenza inferiore al metallo.



SCANBODY M.S.A.
VITE SCANBODY M.S.A. 8.0 mm
AL - Alluminio Ergal Mediale

SCAN-MSA
1137

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies

Con corpi di scansione estremamente precisi è possibile calcolare con precisione la posizione dell'impianto, con l'ausilio del software. Questo scan body è progettato per scansioni singole e ponti da laboratorio .
Adatto per tastatori a contatto.
Autoclavabili e riutilizzabili.



INTRAORAL SCANBODY M.S.A.
VITE SCANBODY M.S.A. 8.0 mm
Ti4 - Titanio Grado 4

SCAN 1001
1137

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies

Gli scan abutment intraorali sono dispositivi fondamentali per effettuare un adeguato processo di scansione, sia per uso intraorale che per uso su modello dentale.
Posizionati su analogo o su M.S.A., consentono durante il processo di acquisizione, di rilevare con altissima precisione il corretto posizionamento dell'impianto all'interno del progetto implanto-protetico. Autoclavabili e riutilizzabili.



SCANBODY M.S.A. SHORT H9.0 mm
VITE SCANBODY M.S.A. 6.0 mm
Ti4 - Titanio Grado 4

SCAN 1020
1136

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies

Gli Scanbody M.S.A. Short servono per trasferire il posizionamento della connessione del Multi Sistem Abutment. La sua altezza di 9 mm migliora la scansione evitando di mandare fuori focus la telecamera.
I Pin di congiunzione possono essere utilizzati per migliorare la lettura della scanner , dando continuità alla scansione
Vite di serraggio è inclusa.



MICRO-VITE M.S.A.
Ti5 - Titanio Grado 5

1037

Vite per componenti protesiche M.S.A.
In dotazione con tutte le componenti per la realizzazione della sovrastruttura.

15
Ncm



MICRO-VITE ZIRCONIA M.S.A.
Ti5 - Titanio Grado 5

1269

Vite specifica per avvitamento della sovrastruttura in zirconia direttamente al componente M.S.A.

15
Ncm




MICRO-VITE D.I.S
● Connessione Esagono
★ Connessione Torx
Ti5 - Titanio Grado 5

2218
2226

Questa particolare tipologia di microvite consente di regolare l'angolazione di accesso alla struttura fino a 25°

15
Ncm

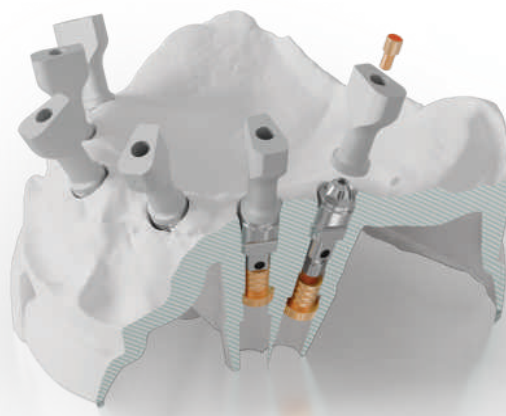

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO




MONCONE PROVVISORIO M.S.A. **1074**
TI5 - Titanio Grado 5

Cannula in titanio grado 5 per abutment m.s.a., rotanti. Utilizzati per protesizzazione immediata e definitiva o per eventuale ribasatura di protesi già esistenti. o per utilizzo come provvisorio.
Cannula e vite di serraggio inclusa (cod. 1033).
Torque 20-25 Ncm.



MONCONE TITANIO M.S.A 360° **1282**
TI5 - Titanio Grado 5

Il moncone titanio M.S.A. 360° facilita con la libertà di angolazione di 25°, di dislocare così i fori vestibolari: evitando l'uso dei Multi Unit Abutment nei carichi immediati.

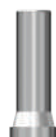

MONCONE SALDATURA TITANIO M.S.A. **1079**
TI5 - Titanio Grado 5

Componenti per monconi M.S.A. in titanio grado 5. dedicati ad una protesizzazione mediante saldatura intraorale o ad una eventuale ribasatura di una vecchia protesi per utilizzo come provvisorio.
Vite di serraggio inclusa (cod. 1037).
Torque 20-25 Ncm.




MONCONE SALDATURA ACCIAIO M.S.A. **1132**
A - Acciaio Inox

Moncone saldatura per abutment m.s.a. in Acciaio. Sono dedicati ad una protesizzazione mediante saldatura intraorale o ad una eventuale ribasatura di protesi già esistenti, o per utilizzo come provvisorio.
Vite di serraggio inclusa (cod. 1037).
Torque 20-25 Ncm.



CALCINABILE - Confezione 5pz **1133**
POM - Polimetilmetacrilato

Cannula calcinabile in PMMA per cementazione su moncone in titanio provvisorio.
Duttile per protesizzazione e realizzare manufatti privi da tensioni residue.

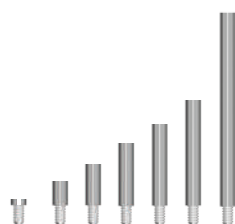

VITE M.S.A.

L 1.0 - Ribassata	1134
L 2.0	1037
L 4.0	1135
L 6.0	1136
L 8.0	1137
L 14.0	1036
L 24.0	1138

TI5 - Titanio Grado 5

Vite di ricambio per componenti protesiche per abutment M.S.A. in titanio grado 5, sono in dotazione per la realizzazione della sovrastruttura.



COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE



**ANALOGO
CONO MORSE M.S.A.**
TI5 - Titanio Grado 5

1267

Analogo Cono Morse Standard compatibile con le librerie in dotazione alla sistemica implantare IDC®.



CONO MORSE M.S.A.
TI5 - Titanio Grado 5

1263

Questo componente offre il vantaggio di due protocolli già ampiamente diffusi in implantoprotesi: la saldatura intraorale provvisoria e la conometria per la fase sia provvisoria che definitiva: utilizzando protesi senza cemento e consentendo più mobilità da parte dell'operatore.



**IMPRESSION COPY
CONO MORSE M.S.A.**
PEEK - Polietereeterchetone

1266

Transfer Pick-up in PEEK per moncone cono morse standard consente sia un utilizzo per carico immediato ma consente l'uso per presa dell'impronta a tecnica "closed tray" (cucchiaino chiuso).



**MONCONE SALDATURA
CONO MORSE M.S.A.**
TI5 - Titanio Grado 5

1265

Moncone per cono morse standard dedicato ad una protesizzazione mediante saldatura intraorale o ad una eventuale ribasatura di una vecchia protesi utilizzandolo come provvisorio.



**MONCONE TITANIO
CONO MORSE M.S.A.**
TI5 - Titanio Grado 5

1264

Moncone in titanio grado 5 per cono morse standard. Utilizzato per protesizzazione immediata o ribasatura di protesi già esistenti.

COMPONENTI PROTESICHE PER CARICO IMMEDIATO/OVERDENTURE



**MONCONE SFERA
M.S.A.**
TI5 - Titanio Grado 5

1163

Moncone a Sfera da applicare ai monconi M.S.A. angolati. Consente la gestione di un corretto parallelismo riducendo lo stress e il relativo consumo delle cuffie di ritenzione.



**MONCONE CONNECTOR
M.S.A. LONG 4.5mm**
TI5 - Titanio Grado 5

1162

Moncone Connector da applicare ai monconi M.S.A. angolati. Questi componenti consentono di ottenere un parallelismo migliorato, con minor consumo delle cuffie di ritenzione.



**MONCONE CONNECTOR
M.S.A. SHORT 3.0mm**
TI5 - Titanio Grado 5

1253

CONNECTOR

C A R A T T E R I S T I C H E E U S O



COMPONENTI PROTESICI SOLUZIONI OVERDENTURE

L'overdenture su impianti rappresenta un'opzione terapeutica relativamente semplice con un buon rapporto costo-beneficio per molti pazienti. In alcuni casi non è necessario realizzare una nuova protesi in quanto è possibile utilizzare la protesi del paziente.

L'overdenture su impianti può essere utilizzata anche come protesi provvisoria.

L'overdenture può essere fissata all'impianto nei seguenti modi:

1. Equator;
2. Connector;
3. Moncone a sfera;
4. Moncone per barra.


I monconi a sfera sono tradizionalmente utilizzati nella mandibola, su due impianti.

L'overdenture fissata su barra può avere una struttura rigida (impianti multipli) o resiliente (due impianti).

Il moncone connector è indicato in caso di protesi totali o parziali supportate da impianti IDC® nell'arcata superiore o inferiore.

Il design auto-posizionante permette ai pazienti di applicare facilmente la protesi.

Soluzioni Overdenture MONCONE CONNEKTOR

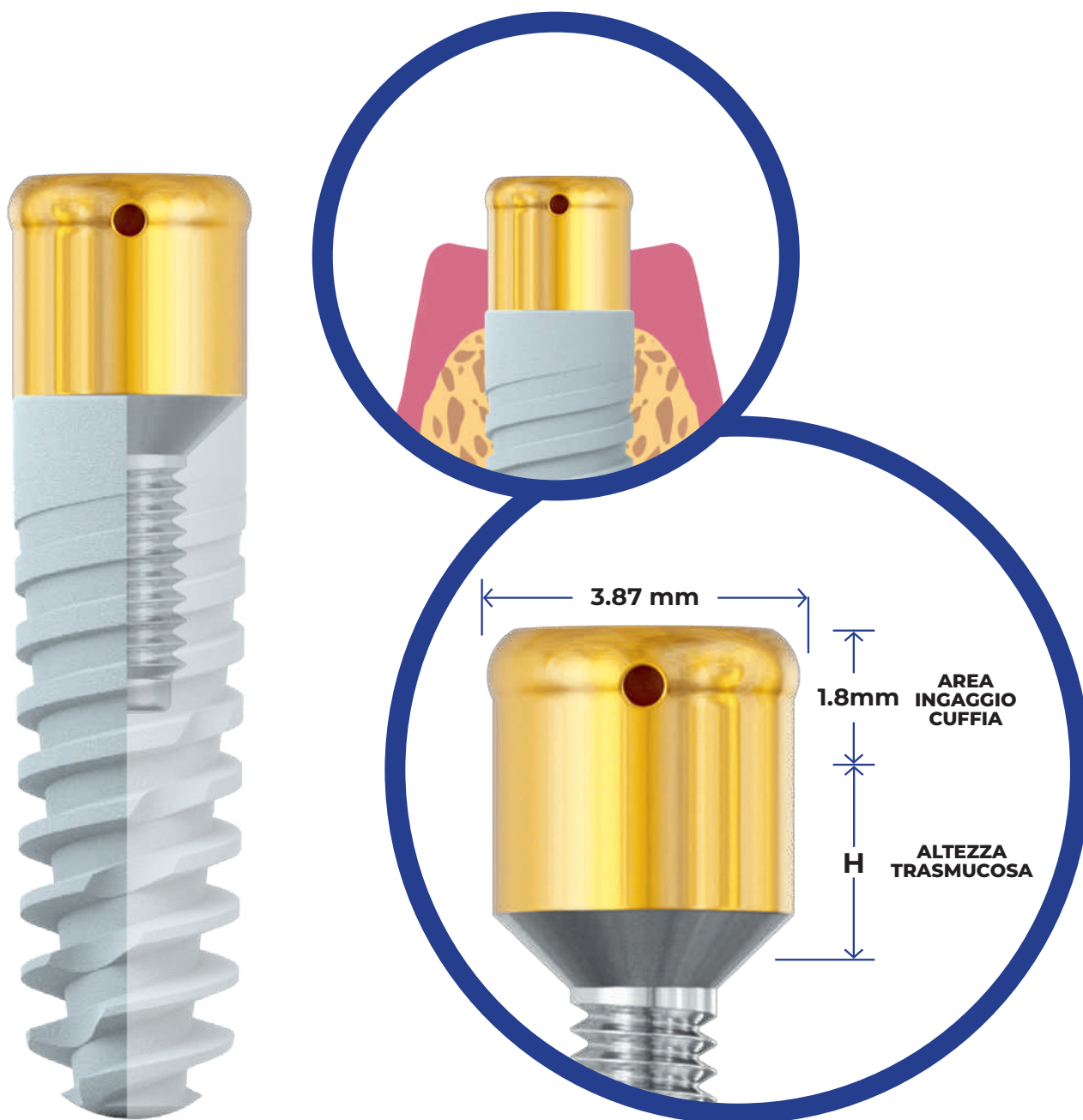

MONCONE CONNEKTOR

H 1.0 mm	1055
H 2.0 mm	1056
H 3.0 mm	1057
H 4.0 mm	1058
H 5.0 mm	1059

TI5 - Titanio Grado 5




VERSATILITÀ IN RITENZIONE E ANGOLAZIONE

Il segreto è nel consentire un collegamento resiliente della protesi tra il machio Connektor e gli inserti femmina durante l'inserimento.

Doppia ritenzione per massimizzare la stabilità e un'azione di rotazione che consente una divergenza fino a 20° tra due impianti.


L'esclusiva innovazione Dual Retention fornisce all'attacco CONNEKTOR una superficie di ritenzione maggiore.

Consente di ripristinare un impianto non parallelo con un'angolazione fino a 20 gradi. L'azione pivotante consente una divergenza totale fino a 40° tra due impianti.

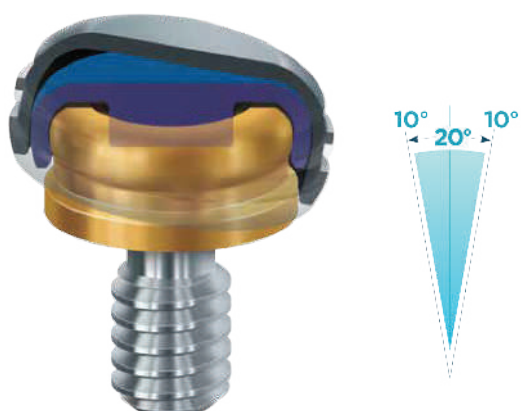

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0° - 10°

1 Cuffia Nera, 1 Spaziatori Bianchi, 1 Cuffia Trasparente, 1 Cuffia Rosa, 1 Cuffia Blue, 1 Contenitore in titanio.

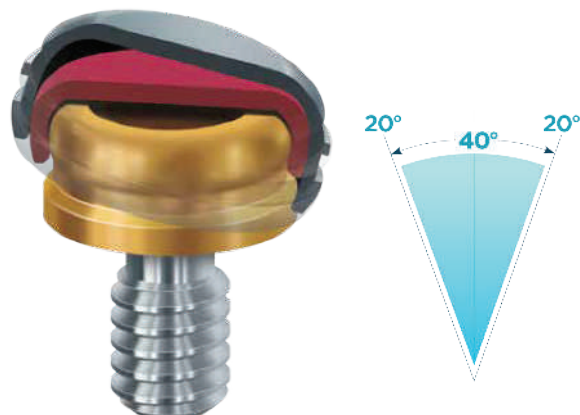

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10° - 20°

1 Cuffia Nera, 1 Spaziatori Bianchi, 1 Cuffia Verde, 1 Cuffia Rossa, 1 Cuffia Arancio, 1 Contenitore in titanio.



Connektor - Ref. 1089

(Cuffia Trasparente) RETENTION: 5LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1090

(Cuffia Rosa) RETENTION: 3LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1091

(Cuffia Blue) RETENTION: 1.5LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1092

(Cuffia Nera) CUFFIA LABORATORIO
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1083

(Cuffia Verde) RETENTION: 5LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1084

(Cuffia Arancio) RETENTION: 2LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1085

(Cuffia Rossa) RETENTION: 1LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1086

(Cuffia Grigia) RETENTION: 0LB
4 PACK



Contenitore titanio - Ref. 1087

2 PACK



Transfer abutment - Ref. 1094

2 PACK

STRUMENTI E ACCESSORI

Sono a disposizione tutta una serie di strumenti e accessori per consentire un lavoro semplice e coordinato.



Analogo Connektor
Ref. 1088



Guida misurazione angolare Connektor
Ref. ST1506



Perno parallelismo
Ref. 1093



Puntale in acciaio avvitamento Connektor
Ref. ST1003



Adattatore per wrench
Ref. ST1007

Lo strumento Connektor

Lo strumento Connektor ST1110 è un utensile multifunzionale diviso in tre parti.

MODALITÀ D' USO DEL PUNTALE

La punta ST1109 serve per rimuovere gli inserti ritentivi dall'involucro di metallo.

1. Svitare la punta di due giri completi in senso antiorario. Risulta visibile una fessura tra punta ed elemento intermedio definita "Gap".

2. Guidare la punta nell'involucro metallico tenendo lo strumento dritto. Durante l'estrazione, i bordi taglienti della punta trattengono l'inserto ritentivo dopodichè estrarre lo strumento dall'involucro metallico tenendolo dritto.

3. Per staccare l'inserto ritentivo dallo strumento avvitare la punta sull'elemento intermedio ruotandola completamente in senso orario. In tal modo si attiva il perno di distacco all'interno della punta, che stacca l'inserto ritentivo.

L'elemento intermedio consente l'inserimento di inserti ritentivi nell'involucro del contenitore metallico: svitare la punta e utilizzare l'inserto dell'elemento intermedio per posizionare correttamente gli inserti (cappette) colorate.

NB. i vari inserti saranno saldamente ancorati nell'involucro metallico quando si avverterà un "clic".


il driver manuale Connektor ST1111 consente di trasportare il moncone Connektor nel cavo orale, aiutando l'operatore durante la fase di inserimento sull'impianto

NB. Tutti gli strumenti posso essere messi tutto in autoclave.

Strumento universale Connektor
Ref. ST1010



Puntale in acciaio rimozione
Ref. ST1109

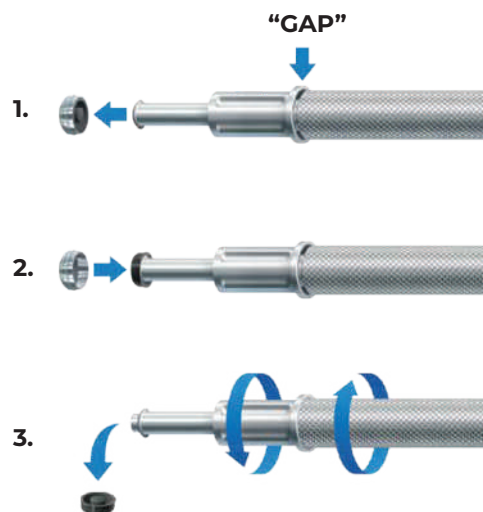


Elemento intermedio inserimento



Driver Manuale - Ref. ST1111




Soluzioni Overdenture MONCONE CONNEKTOR PER M.S.A.


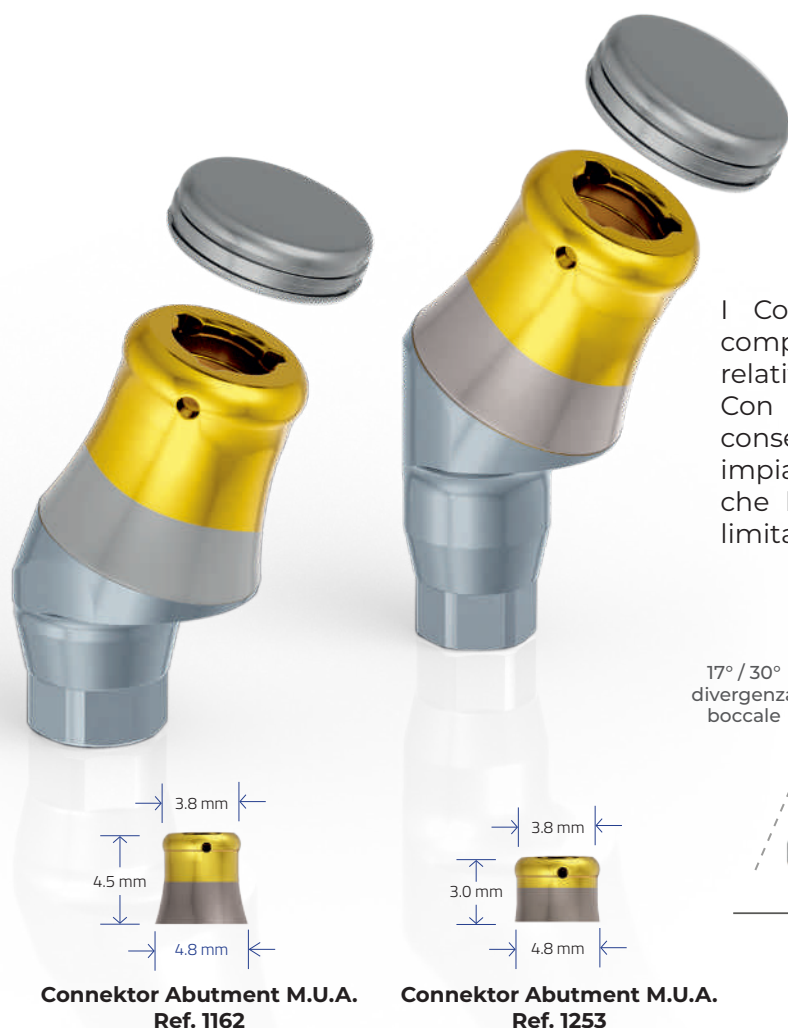


I Connektor abutment M.U.A. risolvono casi complessi, supportando fino a 60° di divergenza relativa.

Con inclinazioni di 17° e 30° questi dispositivi consentono di posizionare liberamente gli impianti e di inclinare i Connektor in modo che l'inserimento della protesi sia più agevole, limitando l'usura del Connektor stesso.

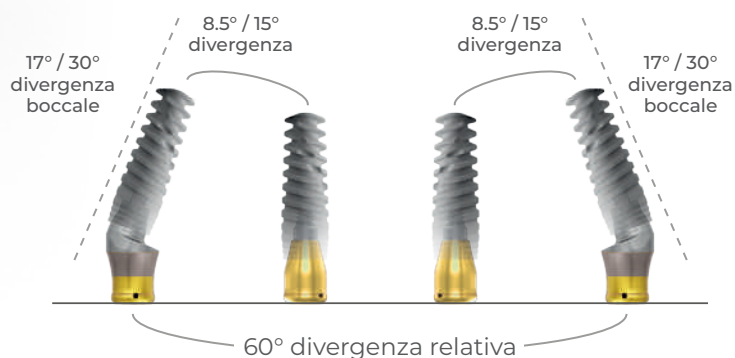


MONCONE CONNEKTOR PER BARRE

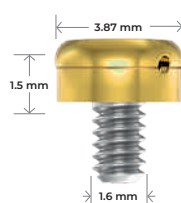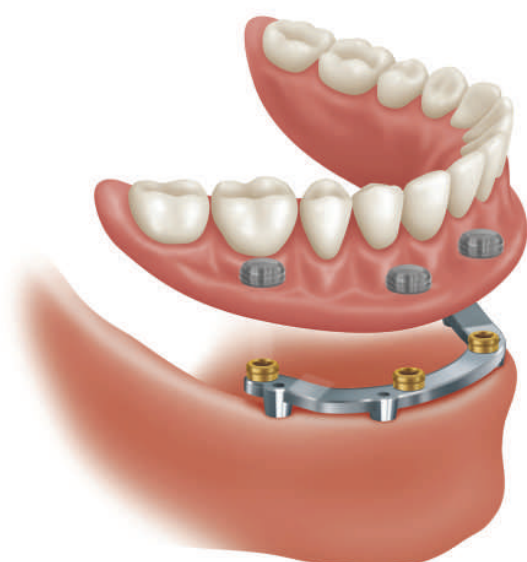


Connektor per barre Ref. 2213



Guaina Filettata Ref. 239GSF

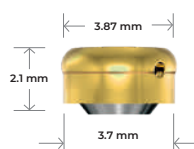

Connektor per barre Saldatura laser Ref. 2214

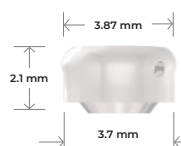


Connektor per barre per fusione in PMMA Ref. 2215

Soluzioni Overdenture

ATTACCO A SFERA

La sovrastruttura dell'attacco a sfera serve a fissare una protesi rimovibile.
Il moncone con il suo attacco sferico, consente una tenuta e una resilienza ottimale.
È possibile, inoltre, regolare i differenti gradi di ritenzione, tramite le cappette in dotazione in teflon e il suo corrispettivo contenitore in acciaio inox.

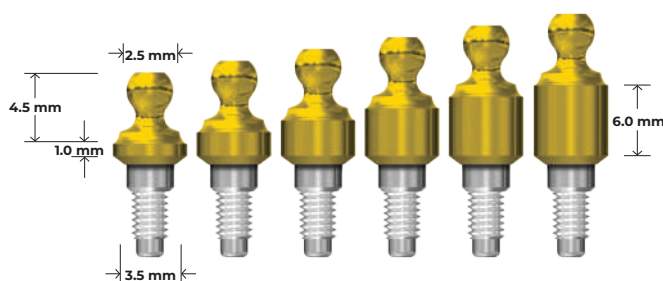

ATTACCO A SFERA

H 1.0 mm	1050
H 2.0 mm	1051
H 3.0 mm	1052
H 4.0 mm	1053
H 5.0 mm	1054
H 6.0 mm	1270
Ti5 - Titanio Grado 5	



CONTENITORE IN ACCIAIO



**ADATTATORE PER WRENCH
ST1007**



Ritenzione ZERO



**CHIAVE UNIVERSALE
SPHERO FLEX E SPHERO BLOCK**
Chiave dinamometrica attacco Straumann
Normal / Micro - Esagono 2.3 mm
ST1516



Ritenzione SOFT





DRIVER CONTRANGOLO
MEDIO - 15mm
ST1044



**Ritenzione
EXTRA SOFT**



**Ritenzione
STANDARD**

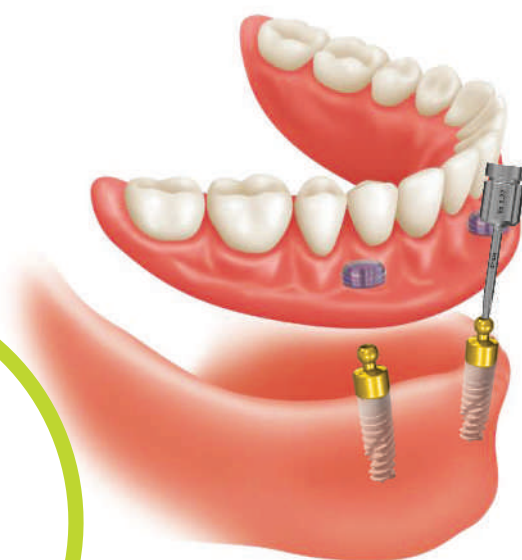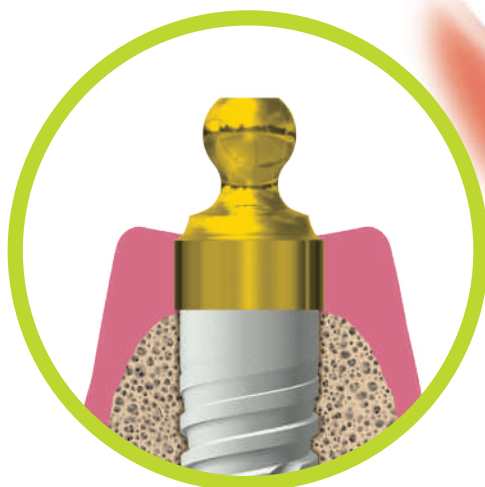

Soluzioni Overdenture

RICAMBI ATTACCO A SFERA

Normo $\varnothing 2.5\text{mm}$

KIT BN250

- 1 - Contenitore in Titanio,
- 5 - Cappette Ritentive:
 - 1 - Trasparente (ritenzione standard - 1300gr);
 - 1 - Rosa (ritenzione soft - 900gr);
 - 1 - Gialla (ritenzione extra soft - 500gr);
 - 1 - Verde (ritenzione molto elastica - 350gr);
 - 1 - Nera (ad uso laboratorio).
- 1 - Disco protettivo
- 3 - Anelli direzionali.



ANALOGO NORMO BALL ATTACHMENT

1 per confezione

044PPN



CONTENITORE TITANIO

Per saldatura o ritenzione resina
(2 per confezione)

041 CTN



CAPPETTA NERA

Solo ad uso laboratorio
(6 per confezione)

043 CLN



CAPPETTA VERDE

Uso clinico
Ritenzione molto elastica
(6 per confezione)

049 PCN



CAPPETTA GIALLA

Uso clinico
Ritenzione extra soft 500-550g
(6 per confezione)

060 CRN SN



CAPPETTA ROSA

Uso clinico
Ritenzione soft 800-950g
(6 per confezione)

040 CRN SN



CAPPETTA BIANCA

Uso clinico
Ritenzione standard 1200-1300g
(6 per confezione)

040 CRN



DISCO PROTETTIVO

(10 per confezione)

100 PD



ANELLI DIREZIONALI

con inclinazioni per parallelismo
0°, 7°, and 14° rings.
(Set di 3)

100 AD



ESTRATTORE MULTIUSO

Per cappette
(con foro portastelo)

491EC



INSERTORE/ESTRATTORE

per cappette (Ot Equator - Normo - Micro)

485IC



DiTRE
IMPLANT PLATFORM Ø3.0

IMPIANTI ESAGONO INTERNO Connessione ø3.0

CARATTERISTICHE

DiTRE® è un impianto conico con esagono interno e connessione diametro 3.0. La connessione aumentata in precisione permette una perfetta tenuta tra impianto e moncone evitando micromovimenti e complicazioni. Il suo design consente un facile inserimento e di ottenere un'elevata stabilità primaria, anche in situazioni cliniche molto complesse. DiTRE® offre un'ampia gamma di monconi per soddisfare le diverse esigenze di riabilitazione implantoprotesica. Gli impianti con diametro stretto (inferiore a 3,5 mm), le cui prestazioni cliniche sono state validate da numerosi studi con follow-up anche fino a 7 anni, consentono il trattamento sicuro e prevedibile di situazioni in cui gli impianti di diametro tradizionale aumenterebbero il rischio clinico, ad esempio indicazioni con tessuto duro minimo e spazio limitato.

CORONA

CARATTERISTICHE:

- Pressione ridotta lungo la testa dell'impianto;
- Superficie microporosa fino alla testa dell'impianto;
- Eccellente capacità di osteointegrazione (BIC aumentato del 10%).

VANTAGGI:

- Facilita l'aumento del volume osseo intorno alla testa;
- Ridurre il riassorbimento crestale;
- Ottimizzazione della distribuzione del carico;
- Ridurre lo stress crestale.

CORPO

CARATTERISTICHE:

- Corpo affusolato;
- Nucleo conico - più pronunciato delle bobine;
- Corpo condensante di tipo osteotomico.

VANTAGGI:

- Condensazione ossea;
- Eccellente stabilità primaria;
- Facile inserimento.

SPIRE

CARATTERISTICHE:

- Spira con passo 0,8 mm (2 principi);
- Filettature inverse con ampi bordi d'attacco piatti per una maggiore stabilità;
- Penetrazione rapida e controllata.

VANTAGGI:

- Favorisce la procedura di inserimento;
- Elevata stabilità primaria nell'osso compromesso (D4-D5);
- Consente la condensazione ossea;
- Consente una ridotta osteotomia.

CONNESSIONE

CARATTERISTICHE:

- Connessione esagonale interna conica;
- Connessione implantare moncone a 60° aumentata di precisione

VANTAGGI:

- Perfetta connessione impianto-moncone;
- Semplicità nel processo di riabilitazione protesica o protesica.

APICE

CARATTERISTICHE:

- Efficace conicità di taglio;
- Funzione di centraggio e punta di presa;
- Area apicale estremamente stretta (1,7 mm);
- Design osteocondensante.

VANTAGGI:

- Controlla e facilita l'inserimento;
- Previene i danni alle strutture anatomiche;
- Ottimo su siti sottodimensionati.



DiTRE
IMPLANT PLATFORM Ø3.0


CODICI IMPIANTI

DiTRE

H30100	3.0x10 mm
H30115	3.0x11.5 mm
H30130	3.0x13 mm
H30150	3.0x15 mm

VITE TAPPO


Ø3.0 1181

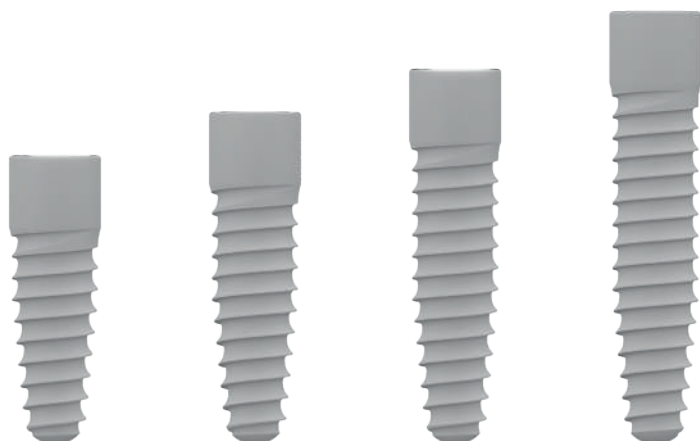

MISURE IMPLANTARI

PIATTAFORMA IMPLANTARE	Lunghezza Effettiva	Diametro impianto	Diametro Apice	Interfaccia Moncone	Interfaccia Ponte	Passo Spire	
3.0	3.0x10 mm	10	Ø 3.15	Ø 1.7	Ø 2.9	Ø 3.0	2.4
	3.0x11.5 mm	11.5	Ø 3.15	Ø 1.7	Ø 2.9	Ø 3.0	2.4
	3.0x13 mm	13	Ø 3.15	Ø 1.7	Ø 2.9	Ø 3.0	2.4
	3.0x15 mm	15	Ø 3.15	Ø 1.7	Ø 2.9	Ø 3.0	2.4

Tutte le misure sono in millimetri

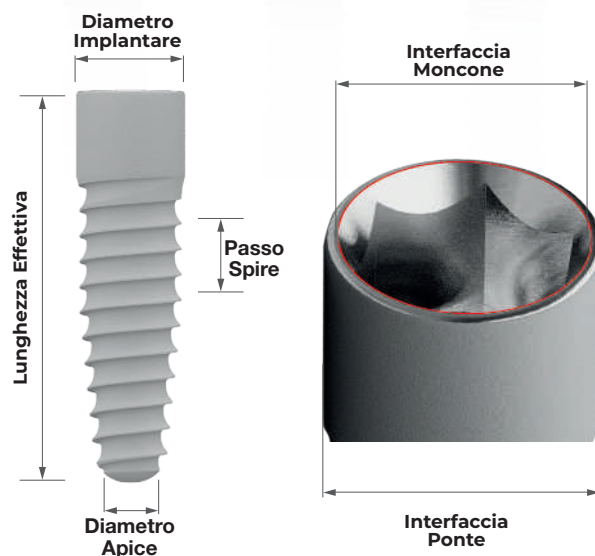

STRUMENTARIO INSERIMENTO*

*optional solo su richiesta in kit per impianti DiTre



DRIVER LUNGO
CHIAVE DINAMOMETRICA
ST1404



MONTATORE CONTRANGOLO
LUNGO **ST1358**



DRIVER CORTO
CHIAVE DINAMOMETRICA
ST1405



MONTATORE CONTRANGOLO
CORTO **ST1357**


PROTOCOLLO CHIRURGICO

- a) L'osteotomia deve procedere come indicato nella procedura chirurgica con abbondante e costante irrigazione di soluzione fisiologica sterile.
- b) Non superare mai i 45/50 Ncm al torque di inserimento dell'impianto.
- Un serraggio eccessivo può causare danni alla connessione implantare e/o rottura con successiva necrosi del sito osseo.*
- c) In caso di osso estremamente compatto si considera di effettuare alcune valutazioni preliminari dedicate al sito specifico.
- d) Tenere in considerazione la lunghezza della punta quando si prepara l'osteotomia
- e) Anche se il protocollo riportato è raccomandato per la maggior parte dei casi, in situazioni "particolari" potrebbero rendersi necessarie ulteriori valutazioni da parte del clinico

Velocità di rotazione consigliata (RPM)

 900 1200	 900 1200	 800 1000	 400 600
ST1067 Ø1.5	ST1068 Ø2.0/2.4	ST1069 Ø2.4/2.8	ST1074 Ø3.0

Ordine delle frese
Densità Ossea
ALTA

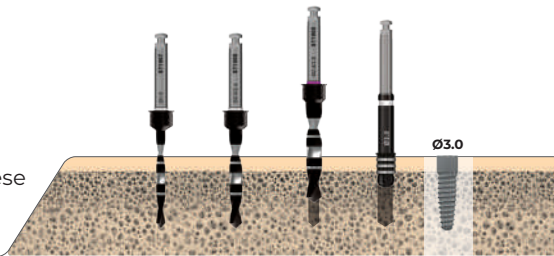


-  Per tutta la lunghezza dell'impianto.
-  Fresare parzialmente secondo la lunghezza dell'impianto.
-  A seconda dello spessore della corticale è necessario utilizzare la fresa countersink.

Velocità di rotazione consigliata (RPM)

 900 1200	 900 1200
ST1067 Ø1.5	ST1068 Ø2.0/2.4

Ordine delle frese
Densità Ossea
MEDIA

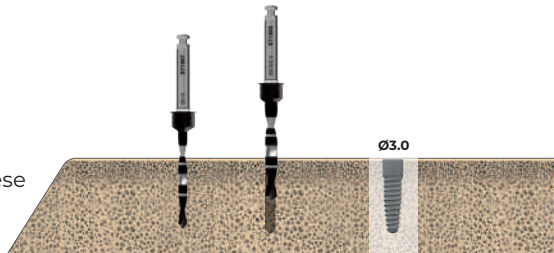

-  Per tutta la lunghezza dell'impianto.
-  Fresare parzialmente secondo la lunghezza dell'impianto.
-  A seconda dello spessore della corticale è necessario utilizzare la fresa countersink.

Velocità di rotazione consigliata (RPM)

 900 1200
ST1067 Ø1.5

Ordine delle frese
Densità Ossea
BASSA



-  Per tutta la lunghezza dell'impianto.
-  Fresare parzialmente secondo la lunghezza dell'impianto.
-  A seconda dello spessore della corticale è necessario utilizzare la fresa countersink.

COMPONENTI PROTESI CEMENTATA


COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO A.D.M.
Ø3.0 1170



TRANSFER OPEN TRAY 1171
VITE TRANSFER OPEN TRAY 1189

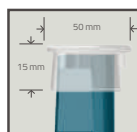

TRANSFER CLOSED TRAY 1172
VITE TRANSFER CLOSED TRAY 1190



UNIVERSAL IMPRESSION CAP 2142
Confezione 5pz

COMPONENTI PROTESICHE PER IL RICONDIZIONAMENTO DEI TESSUTI MOLLI



VITE TAPPO 1181



MONCONE GUARIGIONE SLIM
H 3.0 mm 1178
H 5.0 mm 1179
H 7.0 mm 1180



MONCONE GUARIGIONE
H 3.0 mm - P.E. 3.5 1241
H 5.0 mm - P.E. 3.5 1242
H 7.0 mm - P.E. 3.5 1243

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE PROVVISORIO
ROTANTE - H 1.5 mm 1175
ROTANTE - H 2.5 mm 1239
ROTANTE - H 3.5 mm 1240



MONCONE PROVVISORIO
NON ROTANTE - H 1.5 mm 1174
NON ROTANTE - H 2.5 mm 1237
NON ROTANTE - H 3.5 mm 1238



CANNULA CALCINABILE 2157
Confezione 5pz

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



MONCONE PERSONALIZZABILE DUAL SISTEM
ROTANTE - H 0.5 mm 1194
ROTANTE - H 1.5 mm 1196
ROTANTE - H 2.5 mm 1234
ROTANTE - H 3.5 mm 1236
CALCINABILE - Confezione 5pz 1262



MONCONE PERSONALIZZABILE COMBY CHROME
ROTANTE 1198
NON ROTANTE 1197



SCANBODY DUAL
ROTANTE S-R
NON ROTANTE S



MONCONE PERSONALIZZABILE DUAL SISTEM
NON ROTANTE - H 0.5 MM 1193
NON ROTANTE - H 1.5 MM 1195
NON ROTANTE - H 2.5 MM 1233
NON ROTANTE - H 3.5 MM 1235
CALCINABILE - Confezione 5pz 1259



MONCONE CALCINABILE
ROTANTE 1176
NON ROTANTE 1177



INTRAORAL SCANBODY
I.SCAN SCAN 1023

Aggiungendo la lettera **e** ai codici DUAL SYSTEM riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici DUAL SYSTEM riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



SIRONA® CEREC® I-BASE
H 0.5 mm 1199
H 1.5 mm 1200
H 2.5 mm 1201




VITI
PRIMARIA 1188
VITE D.I.S. ESA 1191
VITE D.I.S. TORX 1192


COMPONENTI PROTESICI PER PROTESI CEMENTATA



MONCONE DRITTO
H 1.5 mm - P.E. 4.5 1183
H 3.5 mm - P.E. 4.5 1184

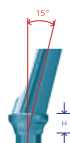

MONCONE 15°
H 1.5 mm 1185
H 3.5 mm 1186

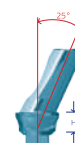


MONCONE 25°
H 3.5 mm 1187

COMPONENTI PROTESICI PER OVERDENTURE



MONCONE OT-EQUATOR
H 1.0 mm 1207
H 2.0 mm 1208
H 3.0 mm 1209
H 4.0 mm 1210
H 5.0 mm 1211
H 6.0 mm 1212
H 7.0 mm 1213

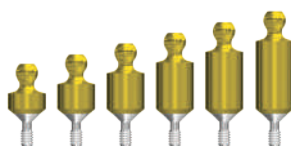

MONCONE SFERA
H 1.0 mm 1214
H 2.0 mm 1215
H 3.0 mm 1216
H 4.0 mm 1217
H 5.0 mm 1218
H 6.0 mm 1219

NOTE

La corretta posizione dei monconi angolati può essere verificata considerando che l'esagono esterno del driver è in fase con l'esagono interno.

SERRAGGIO


Il serraggio della vite protesica si realizza con il cacciavite esagonale 1.27 e il cricchetto dinamometrico. Per la seduta finale si consigliano coppie di 25 Ncm.



Componenti Secondarie M.S.A. MULTI SYSTEM ABUTMENT

Un moderno sistema multiprotesico, per realizzare ponti avvitati, barre avvitate e "toronto bridges" ma anche unità singola.

Il perfetto accoppiamento tra impianto e componente secondaria consente la semplificazione delle componenti terziarie per tutti i tipi di impianto. Le angolazioni sono comprese tra 17° e 30°.

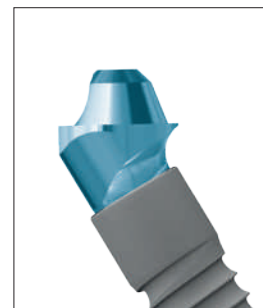

MONCONE M.S.A. DRITTO

H 1.0 mm	1220
H 2.0 mm	1221
H 3.0 mm	1222
H 5.0 mm	1223


TI5 - Titanio Grado 5



MONCONE M.S.A. 17°

H 2.5 mm	1224
H 3.5 mm	1227

TI5 - Titanio Grado 5

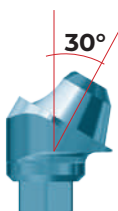

MONCONE M.S.A. 30°

H 3.5 mm	1225
H 4.5 mm	1228

TI5 - Titanio Grado 5



VITE M.S.A


1226

TI5 - Titanio Grado 5



POSIZIONATORE DINAMOMETRICA M.S.A. DRITTO

Lunga	ST1106
Corta	ST1107
A - Acciaio Inox	

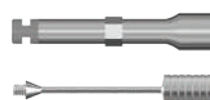

CHIAVE M.S.A.

Contrangolo	ST1001
Posizionatore	ST1210*

A - Acciaio Inox

*compreso nel moncone m.s.a.

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.S.A. 1270 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.S.A. 2212 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. VITE TRANSFER M.U.A. 1073 1036 Titanio grado 5		SLEEVE ANALOGO. 2162 Titanio grado 5 Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.S.A. 1164 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.S.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			ANALOGO PROTEZIONE M.S.A. 1080 Acciaio Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.S.A. 1077 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO M.S.A. CONO MORSE 1267 Acciaio		CONO MORSE M.S.A. 1263 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY M.S.A. CONO MORSE 1266 Polietere etere chetone		MONCONE SALDATURA M.S.A. CONO MORSE 1265 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO M.S.A. CONO MORSE 1264 Titanio grado 5
--	--	---	--	---	--	--	--	---	--

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.S.A. 1163 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.S.A. LONG 4.5 mm 1162 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.S.A. SHORT 3.0 mm 1253 Titanio grado 5
---	---	---	---	---	--

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE


	DUAL SISTEM M.S.A. H4.0mm 1076 DUAL SISTEM M.S.A. H9.0mm 1279 DUAL SISTEM M.S.A. NON ROTANTE H9.0mm 1280 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.S.A. CANNULA COMBY CHROME M.S.A. 360° 1078 ST1594 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE 1133 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz CANNULA DUAL SISTEM 360° M.S.A. ST1594 Polimetilmetacrilato Confezione 1pz		CALCINABILE M.S.A. 1075 CALCINABILE M.S.A. 360° 1290 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	VITI M.S.A. DUAL SISTEM 8.0 mm AN5744 Titanio grado 5		
	SCANBODY M.S.A. SCAN - MSA 1137 Alluminio VITE SCANBODY M.S.A. 8.0 mm 1137 Titanio grado 5		INTRAORAL SCANBODY M.S.A. SCAN 1001 1137 Alluminio VITE SCANBODY M.S.A. 8.0 mm 1137 Titanio grado 5
			INTRAORAL SCANBODY M.S.A. SCAN 1020 1136 Alluminio VITE SCANBODY M.S.A. 8.0 mm 1136 Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA TITANIO M.S.A. 1079 Titanio grado 5		MONCONE TITANIOM.S.A. 360° 1282 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.S.A. 1074 Titanio grado 5
	MONCONE SALDATURA ACCIAIO M.S.A. 1132				CALCINABILE PASSIVAZIONE 1133 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

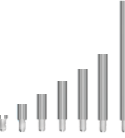	VITI M.S.A. 1.0 mm - RIBASSATA 1134 2.0 mm 1037 4.0 mm 1135 6.0 mm 1136 8.0 mm 1137 14.0 mm 1036 24.0 mm 1138 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.S.A. 1037 MICRO-VITE D.I.S. ESA 2218 MICRO-VITE D.I.S. TORX 2225 Titanio grado 5		DRIVER M.S.A. LONG ST1106
					DRIVER M.S.A. SHORT ST1107
					DRIVER M.S.A. ST1001

15 Ncm Per il serraggio dei componenti in questa sezione si raccomanda di non superare i 15 Ncm. 15 Ncm

CHIRURGIA GUIDATA

COORDINIAMO IL TUO LAVORO

IDC GUIDE® è il protocollo chirurgico assistito che permette di pianificare in modo preciso il successo implantare, anche in casi caratterizzati da situazioni anatomiche estremamente complessi.

Sviluppato per le proprie linee implantari HELI®, SPEEDHEX® e HELIKON® consente di realizzare screening diagnostici accurati e completi, pianificare la posizione ottimale degli impianti, progettare la riabilitazione protesica ed effettuare l'intervento in tutta sicurezza, grazie a:


- 1. Sistematica utilizzabile con i tutti i software in commercio**
- 2. Kit chirurgico estremamente performante con strumenti dedicati**
- 3. Possibilità di realizzare la propria dima personalizzata**

VANTAGGI

Maggiore predicibilità dell'intervento chirurgico grazie alla chirurgia protesicamente guidata specifica per le linee implantari IDC®.

Kit modulare con frese calibrate per lunghezza e per diametro con conseguente aumento dei casi clinici trattabili.

Migliore comunicazione tra odontoiatra e paziente per il massimo risultato.

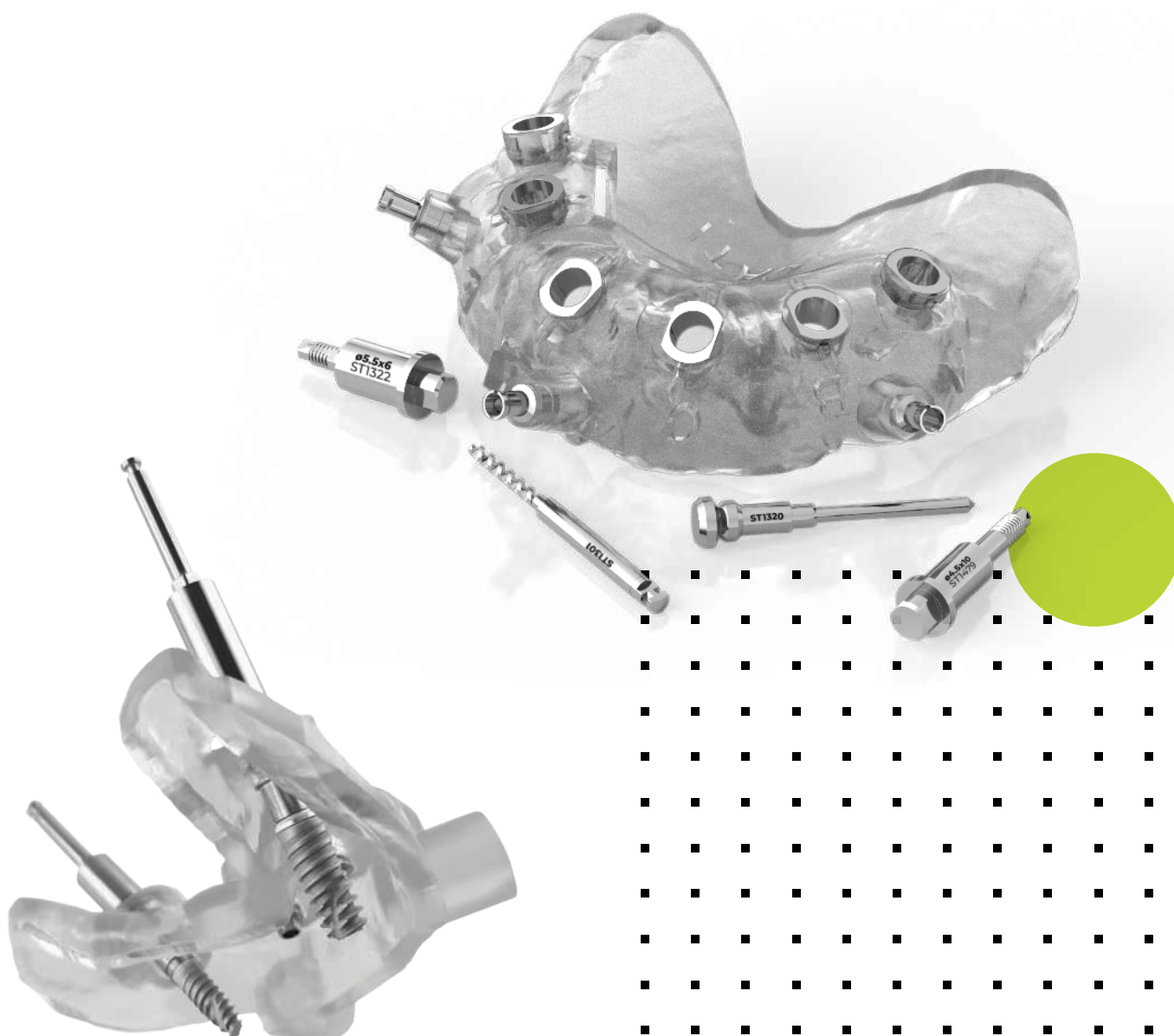

CHIRURGIA GUIDATA

SOFTWARE COMPLETO

IDC GUIDE® è supportato da tutti i maggiori software di pianificazione e chirurgia guidata. IDC® è presente anche nelle librerie di software di pianificazione chirurgica più diffusi e affidabili, per assicurare a tutti i clienti ampia libertà di scelta e pianificare il caso senza modificare le proprie abitudini.



KIT COMPLETO

IDC®, ha creato un kit chirurgico versatile, disponibile in due versioni:

IDC Guidata® ø4.5 per eseguire una chirurgia guidata fino ad impianti con ø4.3.

IDC Guidata® ø5.5 per essere assistiti fino all'inserimento di impianti con ø5.0.

In entrambi i casi la creazione del sito implantare è precisa e sicura, grazie ad un numero ridotto di strumenti con cui è possibile stabilire posizione, inclinazione e profondità delle osteotomie e degli impianti, nonché gestire in modo semplice il protocollo chirurgico dedicato.

Gli strumenti rotanti si distinguono anche per il ridotto ingombro e per lo stop incorporato; questo per effettuare l'intervento in tutta sicurezza.

NB. Il kit contiene frese calibrate con diametro e lunghezza specifica per ogni impianto.



MASCHERA GUIDA

Le dime chirurgiche e la loro produzione può essere effettuata presso i centri di fresaggio IDC® tramite stampanti 3D, assicurando un costo contenuto.

La dima chirurgica è realizzata in funzione di ogni caso clinico, seguendo le specificità del protocollo chirurgico degli impianti IDC® e le linee guida del progetto effettuato del clinico.




CHIRURGIA GUIDATA

FASIDILAVORO

Gli strumenti IDC® sono stati sviluppati per essere utilizzati con i più diffusi e affidabili software di pianificazione chirurgica implantare: consentendo di pianificare il posizionamento implantare perfetto, in base alla posizione ideale della protesi, senza trascurare l'anatomia e le relative strutture ossee.

AVVERTENZE:

- seguire le istruzioni fornite dalla software house per acquisire i dati, pianificare correttamente l'intervento e realizzare la dima chirurgica adeguata in base alle proprie preferenze (tipo di supporto, quantità e posizione degli elementi di fissaggio della dima, etc.);
- pianificare l'intervento sul software utilizzando la libreria degli impianti e delle componenti protesiche IDC®;
- verificare sempre la correttezza dell'impianto selezionato in funzione di linea, diametro e lunghezza;
- prestare attenzione allo spazio interarcata nei settori distali: qualsiasi guida chirurgica richiede frese lunghe, in grado di attraversare la dima e i tessuti molli;
- terminare la pianificazione, definire il tipo di supporto della dima e salvare il file.

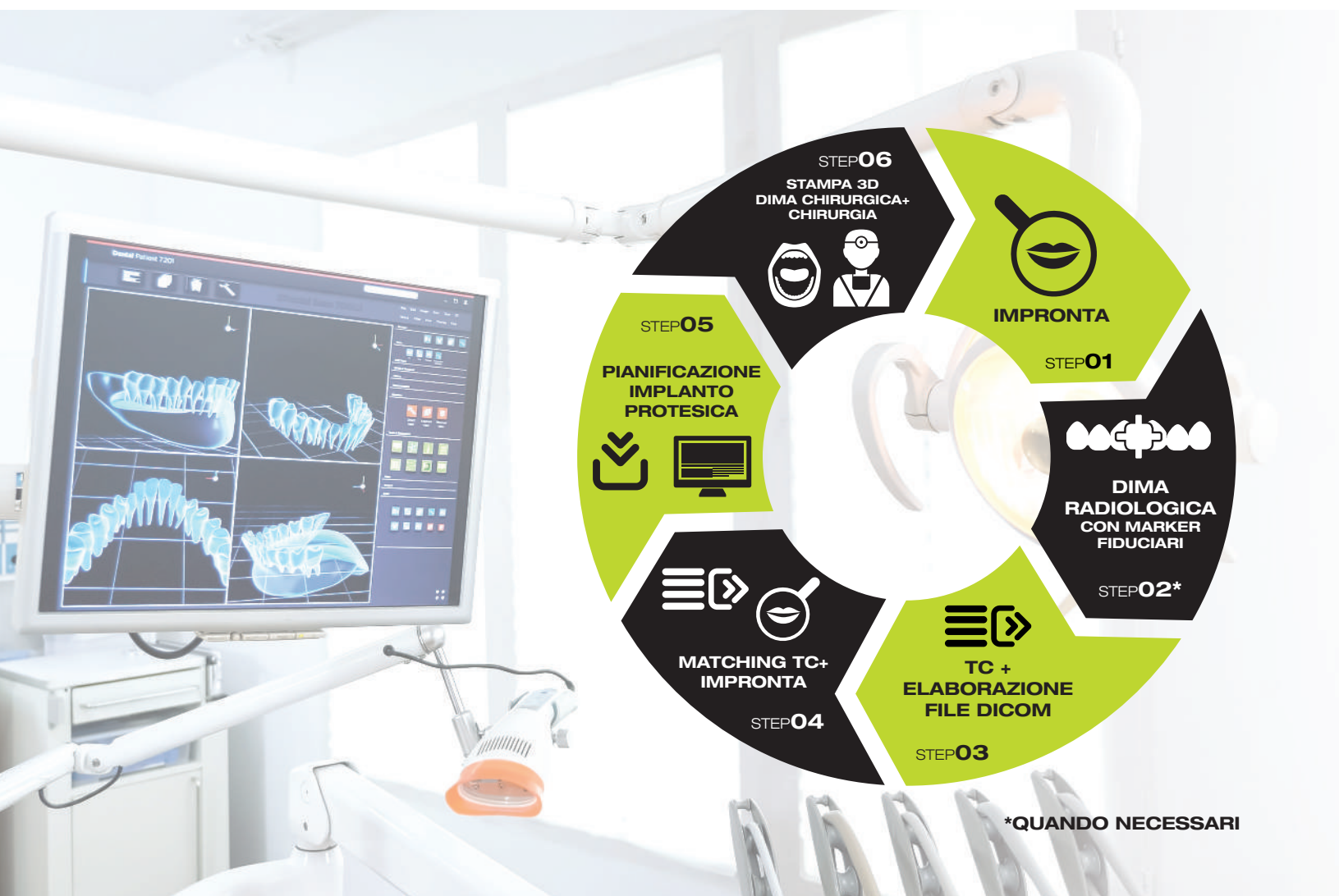

KIT VG ST1296 Sleeve ø4.5

Kit Chirurgia Guidata

Il kit comprende

MUCOTOMO Ø4.5	ST1211
FRESA INIZIALE	ST1213
BONE MILL GUIDE Ø4.5	ST1124
FRESA Ø2.0-2.4 L6.0	ST1215
FRESA Ø2.0-2.4 L8.0	ST1216
FRESA Ø2.0-2.4 L10.0	ST1217
FRESA Ø2.0-2.4 L11.5	ST1218
FRESA Ø2.0-2.4 L13.0	ST1219
FRESA Ø2.0-2.4 L15.0	ST1220
FRESA Ø2.4-2.8 L6.0	ST1221
FRESA Ø2.4-2.8 L8.0	ST1222
FRESA Ø2.4-2.8 L10.0	ST1223
FRESA Ø2.4-2.8 L11.5	ST1224
FRESA Ø2.4-2.8 L13.0	ST1225
FRESA Ø2.4-2.8 L15.0	ST1226
FRESA Ø2.8-3.2 L6.0	ST1228
FRESA Ø2.8-3.2 L8.0	ST1229
FRESA Ø2.8-3.2 L10.0	ST1230
FRESA Ø2.8-3.2 L11.5	ST1231
FRESA Ø2.8-3.2 L13.0	ST1232
FRESA Ø2.8-3.2 L15.0	ST1233
FRESA Ø3.2-3.6 L6.0	ST1235
FRESA Ø3.2-3.6 L8.0	ST1236
FRESA Ø3.2-3.6 L10.0	ST1237
FRESA Ø3.2-3.6 L11.5	ST1238
FRESA Ø3.2-3.6 L13.0	ST1239
FRESA Ø3.2-3.6 L15.0	ST1240
FRESA Ø3.6-4.2 L6.0	ST1242
FRESA Ø3.6-4.2 L8.0	ST1243
FRESA Ø3.6-4.2 L10.0	ST1244
FRESA Ø3.6-4.2 L11.5	ST1245
FRESA Ø3.6-4.2 L13.0	ST1246
FRESA Ø3.6-4.2 L15.0	ST1247
FRESA CORTICALE Ø3.5	ST1339
FRESA CORTICALE Ø3.75	ST1234
FRESA CORTICALE Ø4.2/4.3	ST1241
DRIVER MONTATORE LUNGO DINAMOMETRICA	ST1278
DRIVER MONTATORE CORTO CONTRANGOLO	ST1275
PIN LATERALE*	ST1320
FRESA LATERAL PIN Ø1.5	ST1301
ADATTATORE DINAMOMETRICA	ST1314
ESTRATTORE**	ST1272
PUNTA DRIVER CORTA	ST1034
PUNTA DRIVER MEDIA	ST1044
CHIAVE DINAMOMETRICA 15-100Ncm	ST1131

*in dotazione tre pezzi

**in dotazione due pezzi



OPTIONAL

DRIVER MONTATORE CORTO DINAMOMETRICA	ST1277
DRIVER MONTATORE LUNGO CONTRANGOLO	ST1276
MONTATORI HELI Ø4.5	ST1249
MONTATORI HELI Ø4.5 (+2)	ST1395
MONTATORI DITRE Ø4.5	ST1359
MONTATORI DITRE Ø4.5 (+2)	ST1355
MONTATORI HELIKON Ø4.5 NP	ST1251
MONTATORI HELIKON Ø4.5 NP (+2)	ST1399
MONTATORI HELIKON Ø4.5 RP	ST1252
MONTATORI HELIKON Ø4.5 RP (+2)	ST1401
MONTATORI SPEEDHEX Ø4.5 NP	ST1285
MONTATORI SPEEDHEX Ø4.5 NP (+2)	ST1483
MONTATORI SPEEDHEX Ø4.5 RP	ST1256
MONTATORI SPEEDHEX Ø4.5 RP (+2)	ST1397
CHIAVE DRIITA MSA CORTA	ST1107
CHIAVE DRIITA MSA LUNGA	ST1106
CHIAVE MSA CONTRANGOLO	ST1001
PIN CRESTALI Ø4.5	ST1271
CHIAVE INSERIMENTO CAMMA	ST1582
GUIDE PILOT Ø2.4	ST1254
SLEEVE Ø4.5 NP	ST1255
SLEEVE Ø5.5 LP	ST1256
RIDUZIONE SLEEVE K Ø4.5 RP	ST1305
SLEEVE K Ø5.5 LP	ST1486
SLEEVE Ø4.5 NP	ST1303
SLEEVE Ø5.5 LP	ST1304
SLEEVE Ø4.5 CAMMA	ST1390
SLEEVE Ø5.5 CAMMA	ST1391
BOCCOLE PIN LATERALI Versione A	ST1295
BOCCOLE PIN LATERALI Versione B	ST1517
PIN LATERALE	ST1295
CHIAVE FISSA ∞ NCM	ST1010
CHIAVE MANUALE CHIRURGICA	ST1276



Altissima qualità, artigianalità, attenta selezione delle migliori materie prime, rispetto e considerazione per il cliente: queste sono le “parole chiave” e i valori che fanno di IDC® una realtà originale ed emergente nel panorama dei produttori di impianti dentali.

Ma la sua particolarità è quella di essere “glocal” (think global, act local), ovvero un’azienda che è insieme globale e locale, attenta allo sviluppo internazionale, ma anche al suo rapporto con il territorio.


Il cliente è sempre stato al centro dell’impegno quotidiano, sia esso un privato o un dentista. Un rapporto di fiducia fatto di conoscenza, esperienza, “sentimento” e intuizione, un meccanismo di fidelizzazione reciproca e duratura è ciò che lega IDC® ai suoi consumatori, un segno di attenzione ai loro bisogni, un elemento chiave del successo dell’azienda.

Con il programma IDC® Care intendiamo anche essere vicini al medico e al paziente in ogni fase del trattamento offrendo consigli costanti dei nostri opinion leader su casi specifici.

Tutto questo affinché un impianto dentale sia per sempre.

HELLI

IMPLANT SERIES

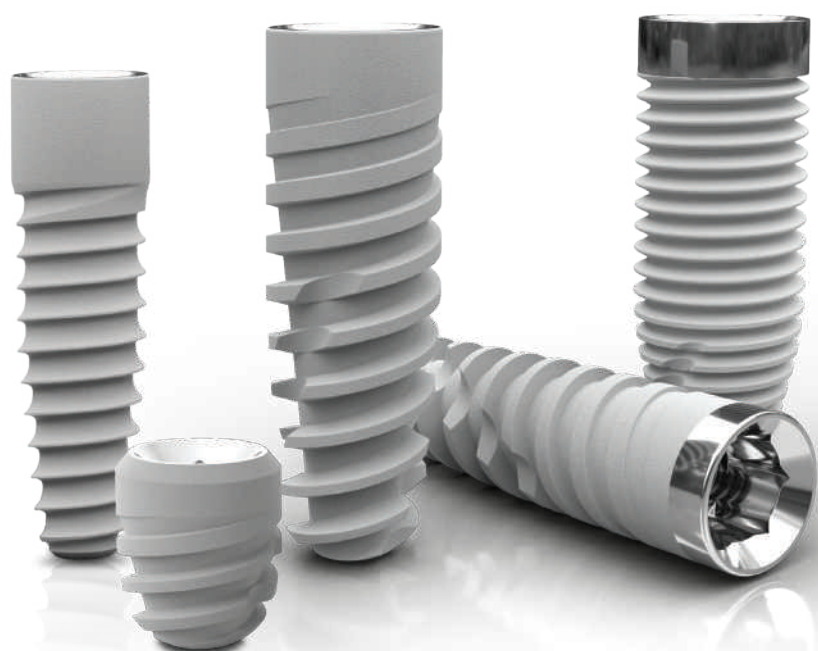



Viale Europa, 126 O/P - 55012 loc. Lammari (LUCCA) - ITALY

Tel. +39 0583 308371

info@idcimplant.com

www.idcimplant.com